

## Інструкція з експлуатації


### Ваги Mi Body Composition Scale 2



Перед початком використання пристрою уважно прочитайте цю Інструкцію та збережіть її для подальшої довідки.

#### Установка батарейок

Відкрийте кришку відсіку для батарейок та встановіть чотири батарейки AAA, розташовуючи їх згідно з вказівками всередині відсіку, дотримуючись полярності.

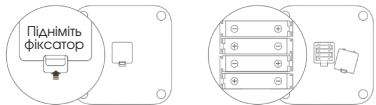

#### Встановлення додатку

Відскануйте QR-код, щоби завантажити та встановити останню версію додатку Mi Fit, або знайдіть його в Google Play, App Store або іншому сторонньому магазині додатків.



#### Встановлення з'єднання

Відкрийте додаток Mi Fit та увійдіть за допомогою свого облікового запису Mi, а потім встановіть з'єднання ваг з обліковим записом і введіть свої особисті дані, згідно з інструкціями на екрані.

Після підключення ваг ви можете переглядати результати зважувань і дані про склад тіла в додатку Mi Fit та додатку Mi Home/Xiaomi Home\*. \* В Європі додаток називається «Xiaomi Home» (крім Росії). Назву додатку, яка відображається на вашому пристрої, повинно бути прийнято за замовчуванням. Особисті дані використовуються для аналізу композиційного складу тіла. Щоби забезпечити точність результатів, введіть їх правильно.

#### Зважування та вимірювання кількості жиру в організмі

Розташуйте ваги на твердій, плоскій підлозі. Станьте босоніж на ваги, як показано на малюнку. Переконайтеся, що шкіра стоп добре стикається з чотирма металевими електродами на вагах. Визначивши вашу вагу, пристрій почне аналізувати склад тіла. Як тільки цей процес завершиться, рядок стану під визначеною вагою почне блимати. Після цього ви зможете переглянути результати аналізу на своєму мобільному телефоні.



Дані про композиційний склад тіла, отримані за допомогою цих ваг, носять суто довідковий характер та не є медичними рекомендаціями.

#### Зважування предметів

Розташуйте ваги на твердій, плоскій підлозі. Натисніть на ваги, щоби включити їх. Дочекайтесь появи напису «0.00» і помістіть на ваги предмет, який потрібно зважити. Рухи й поштовхи можуть вплинути на точність зважування. У цьому випадку рекомендуємо повторити зважування, аби переконатися в точності вимірювань.

#### Попередження

Блимаюча літера L, під час зважування, означає низький рівень заряду. Слід замінити батарейки якомога швидше.



Блимаючі літери OL, під час зважування, означають занадто велике навантаження на ваги (максимальна допустима маса становить 150 кг).



#### Вибір одиниці вимірювання

За замовчуванням ваги обчислюють масу в кілограмах (кг). Ви можете змінити одиницю вимірювання за допомогою налаштувань пристрою в додатку Mi Fit. Ваги можуть показувати масу в кілограмах (кг), цинь та фунтах.

#### Безпека під час використання

- Щоби не посковзнутися, не розміщуйте ваги на слизькій підлозі і не використовуйте їх, якщо ваші ноги або сам пристрій мокрі.
- Завжди становіться у центр ваг, аби вони не перекинулися під час зважування.
- Використовуйте ваги тільки в сухому приміщенні і не занурюйте їх у воду.
- Протирайте поверхню ваг тканиною, змоченою м'яким миючим засобом. Не використовуйте органічні розчинники або інші хімічні речовини.
- Відразу виймайте відпрацьовані батарейки, щоби запобігти протіканню та виникненню корозії.
- Ці ваги не рекомендується використовувати людям з кардіостимуляторами або іншими імплантованими медичними пристроями. Точність даних про композиційний склад тіла може відрізнитися для професійних спортсменів, вагітних та людей з особливими медичними показаннями.
- У додатку Mi Fit ви можете спробувати функцію «Метод стояння на одній нозі з закритими

очима». При втраті рівноваги відкрийте очі та станьте прямо, щоби не перевернутися і не впасти. Людям з порушеннями рівноваги (включаючи дітей, літніх людей та вагітних) або з іншими фізичними порушеннями, слід використовувати цю функцію з обережністю.

#### Сертифікати



#### Технічні характеристики

**Розміри:** 300\*300\*25 мм  
**Маса нетто:** 1,7 кг  
**Діапазон ваги:** 0, 1-150 кг  
**Одиниці вимірювання:** кг/фунти/цинь  
**Бездротове з'єднання:** Bluetooth 5.0  
**Робоча температура:** від 0 до 40° C  
**Частота:** 2402-2480 МГц  
**Максимальна вихідна потужність:** 0 дБм  
**Крок:** 0,1 кг / фунти / цинь  
**Джерело живлення:** батарейки AAA, 1,5 В (4 шт.)  
**Матеріал корпусу:** загартоване скло, інженерний АБС-пластик  
**Сумісність:** Android 4.4 або iOS 9.0 (на iPhone 5S і більш пізніх моделях) і вище, Bluetooth 4.0 і більш пізніх версій

#### Ваги Mi Body Composition Scale 2

**Модель:** XMTZC05HM  
**На замовлення:** Xiaomi Communications Co., Ltd.  
**Виробник:** Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.  
(Входить до групи компаній Mi Ecosystem)  
**Адреса:** офіс 1201, будівля A4, Державна база анімації, західна вулиця Ванцзян № 800, район Гаосін, Хефей, Аньхой, Китай  
Додаткова інформація представлена на сайті [www.mi.com](http://www.mi.com).

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу:\_\_\_\_\_

Найменування виробу:\_\_\_\_\_

IMEI/SN: \_\_\_\_\_

Підпис продавця/М.П.:\_\_\_\_\_

Найменування та адреса торговельної організації:\_\_\_\_\_

ПІБ/підпис клієнта:\_\_\_\_\_

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

| Дата | Опис недоліків | Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин | Кількість днів у ремонті | Підпис виконавця, номер пломбатора |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|      |                |                                                                                               |                          |                                    |
|      |                |                                                                                               |                          |                                    |
|      |                |                                                                                               |                          |                                    |
|      |                |                                                                                               |                          |                                    |

Гарантійний термін експлуатації  
подовжено на \_\_\_\_\_ днів

Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації  
подовжено на \_\_\_\_\_ днів

Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації  
подовжено на \_\_\_\_\_ днів

Підпис та печатка виконавця

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ  
ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов’язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону,  
1.1 Гарантійний термін на продукцію вказується у Таблиці 1.

1.2 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території. України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке (ий) зазначено (ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару  
1.3 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).  
1.4 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього  
1.5 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1. Порухення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
  - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
  - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
  - неправильна установка і підключення товару;
  - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схематехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не повноваженими особами;
  - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНІІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток(або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликанні переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв’язку з використанням або неможливістю використання виробу.  
3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з’єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні

руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохлаи, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.  
3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.  
3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).  
4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.  
4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів(включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам’яті) програмних продуктів, що не були поставленні або рекомендовані виробником  
4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.  
4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів,

що відповідає вимогам ISO 9241-303  
4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

АВТОРИЗОВАНІ  
СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ  
В УКРАЇНІ



ТОВ «РОБИМ ГУД»  
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а  
(ТЦ «Олімпійський»)  
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57  
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57  
код ЄДРПОУ 38014308  
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратіс, ЛТД»  
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20  
(044) 296-35-72  
(095) 273-09-81  
(068) 201-93-30  
код ЄДРПОУ 23159341  
gratis.com.ua



ТОВ «МТІ-СЕРВІС»  
04050, м. Київ, вул. Білоруська, 26  
(044) 483-03-89  
(044) 483-86-53  
(044) 489-38-88  
код ЄДРПОУ 39554115  
mti-service.com.ua