


Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Веб-сторінка: www.naipocare.com
Ел.пошта: support@naipocare.com
Поштова адреса: КНР, Шеньчжень,
Район Лонганг, Хуанан Сіті
Електронік Трейдінг Білдінг, Р05, кімната 116

CE FCC RoHS  
— ВИРОБЛЕНО В КНР

Naipo

Інструкція з використання

Масажер для ніг NAIPO Shiatsu (з підтримкою унікальної функції масажу п'ят)

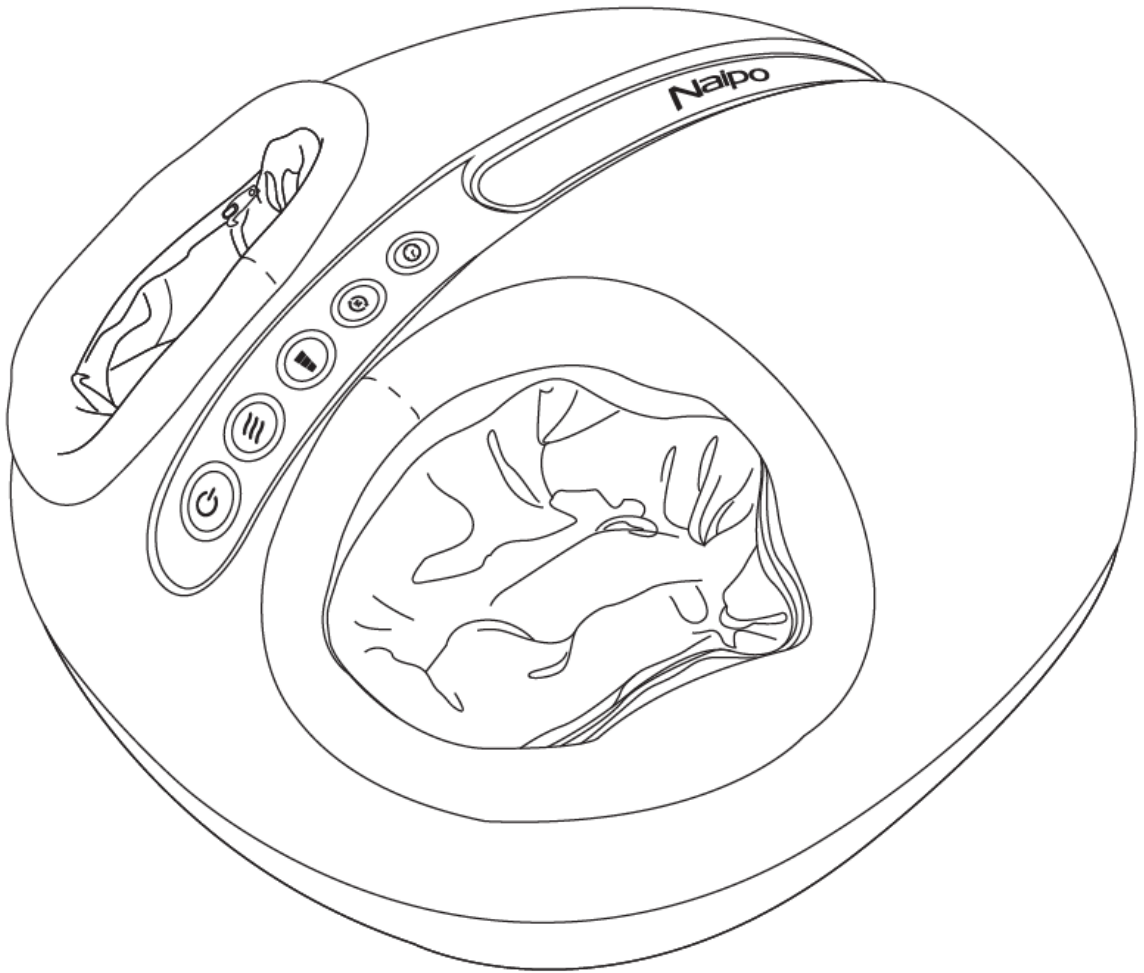

Модель: MGF-F15

КЕРІВНИЦТВО З ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРИМІТКИ:

Використовуйте пристрій 1-2 рази на день, 5-10 хвилин щоразу, для зняття втоми м'язів та покращення кровообігу в організмі.

- Не засинайте під час використання пристрою
- Не використовуйте пристрій для масажування понад 30 хвилин за раз
- Не використовуйте пристрій протягом 1 години до або після прийому їжі
- Не слід використовувати пристрій одразу після того, як він побував на холоді, оскільки накопичення вологи у вигляді конденсату може вплинути на нормальну роботу пристрою і навіть до його пошкодження або виходу з ладу. Тому ми рекомендуємо, після перебування пристрою на холоді перед його використанням потримати його у приміщенні протягом 1 години за кімнатної температури.



Кнопка часу: контроль тривалості масажу

- 1) За вмовчуванням кнопка підсвічується синім кольором, при цьому тривалість масажу становить 10 хвилин
- 2) При натисканні на кнопку вона почне підсвічуватись червоним кольором, що свідчитиме про 15-хвилинну тривалість масажу
- 3) При повторному натисканні на кнопку вона почне підсвічуватись поперемінно червоним і синім кольором, а тривалість масажу становитиме 20 хвилин.

Кнопка режиму

- 1) За вмовчуванням на пристрої встановлено Режим 1, проте ви можете активувати Режим 2, натиснувши на цю кнопку, і Режим 3, повторно натиснувши на цю кнопку.
- 2) Про активацію Режиму 1 свідчить синє підсвічування, Режиму 2 – червоне, а Режиму 3 – кнопка буде поперемінно блимати червоним та синім кольором.
- 3) Режим 1 і Режим 2 – комбінований масаж підошви та подушечок, а Режим 3 – лише масаж подушечок.

Кнопка інтенсивності

- 1) За вмовчування пристрій налаштований на низьку інтенсивність масажу; натиснувши на цю кнопку, ви зможете перейти до режиму середньої інтенсивності; повторним натисканням на цю кнопку ви можете активувати режим високої інтенсивності масажу.
- 2) Підсвічування кнопки синім кольором свідчить про те, що встановлено режим низької інтенсивності, зелений колір свідчить про режим середньої інтенсивності, а червоний колір – про вибір високої інтенсивності.

Кнопка підігріву

Якщо пристрій увімкнений у стандартному режимі, функція підігріву ніг активується і працює автоматично, при цьому індикатор світиться червоним кольором. Ви можете вимкнути функцію підігріву натисканням на цю кнопку, при цьому індикатор також згасне.

Кнопка увімкнення/вимкнення

- 1) При підключенні пристрою до електромережі кнопка увімкнення/вимкнення не буде підсвічуватись.
- 2) Для увімкнення пристрою необхідно натиснути на кнопку увімкнення/вимкнення (режим підігріву + режим газових хвиль + Режим 1), при цьому усі кнопки будуть підсвічуватись синім кольором, а тривалість масажу за вмовчуванням становитиме 10 хвилин.
- 3) Після вичерпання встановленого 10-хвилинного терміну або при натисканні на кнопку увімкнення/вимкнення пристрій повертається до режиму очікування, при цьому буде продовжувати світитись індикатор живлення.
- 4) Після використання пристрою необхідно його вимкнути та від'єднати електричний шнур від електромережі.

Догляд та обслуговування

А) Зберігання

- Якщо ви не використовуєте пристрій, покладіть його у кольорову коробку і тримайте пристрій у коробці у безпечному, сухому і прохолодному місці з доброю вентиляцією повітря.
- Не допускається перекручувати кабелі або проводи пристрою.
- Не допускається піднімати або переносити пристрій за кабель.
- Уникайте гострих кромek, оскільки вони можуть пошкодити поверхню пристрою.
- Не тримайте пристрій під прямим сонячним світлом або в умовах високих температур.

Б) Очищення

- Не забувайте від'єднати електричний шнур пристрою від електромережі перед очищенням пристрою.
- Для очищення поверхні пристрою використовуйте суху тканинну серветку; не використовуйте абразивні засоби для очищення, такі як бензол або розчинники.

С) Обслуговування

- Утримуйте пристрій у чистоті і тримайте його осторонь від вологих місць.
- Якщо ви не використовуєте пристрій протягом тривалого часу, накрийте його пилозахисним чохлам (придбається окремо).
- Не допускайте падіння пристрою у пил або бруд.

Даний пристрій обладнано модулем температурного захисту, тобто якщо пристрій під час використання нагріється до температури, рівень якої перевищує безпечні норми, пристрій автоматично вимкнеться; у такому разі необхідно від'єднати пристрій від електромережі і дати йому охолонути перед повторним використанням.

Гарантія та підтримка

У разі виникнення питань стосовно підтримки, ремонту, обслуговування або гарантійних умов, будь-ласка, звертайтеся до нашої компанії за вказаними нижче контактними даними.

Веб-сторінка: www.citrus.ua

Ел.пошта: support@citrus.ua