

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.

Веб-сторінка: www.naipocare.com

Ел.пошта: support@naipocare.com

Поштова адреса: КНР, Шеньчжень,
Район Лонганг, Хуанан Сіті
Електронік Трейдінг Білдінг, Р05, кімната 116



RoHS
Made in China



Naipo

Інструкція з використання

**Масажер Naipo Body Beauty
портативний пристрій для перкусійного
масажу з функцією підігріву**

Модель: MGPC-5000


Вступ

Дякуємо вам за те, що придбали Портативний пристрій для перкусійного масажу з функцією підігріву компанії Naipo! Будь-ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією з використання і зберігайте її у безпечному місці для повторного перегляду у майбутньому. Якщо вам необхідні будь-які консультації або підтримка, будь-ласка, звертайтеся до нашої Служби з підтримки клієнтів за вказаними вище контактними даними. При зверненні обов'язково вкажіть номер моделі та номер замовлення Amazon.

Комплектація виробу

- 1 x пристрій для перкусійного масажу
- 3 x змінні масажні насадки
- 1 x інструкція з використання

Зовнішній вигляд пристрою

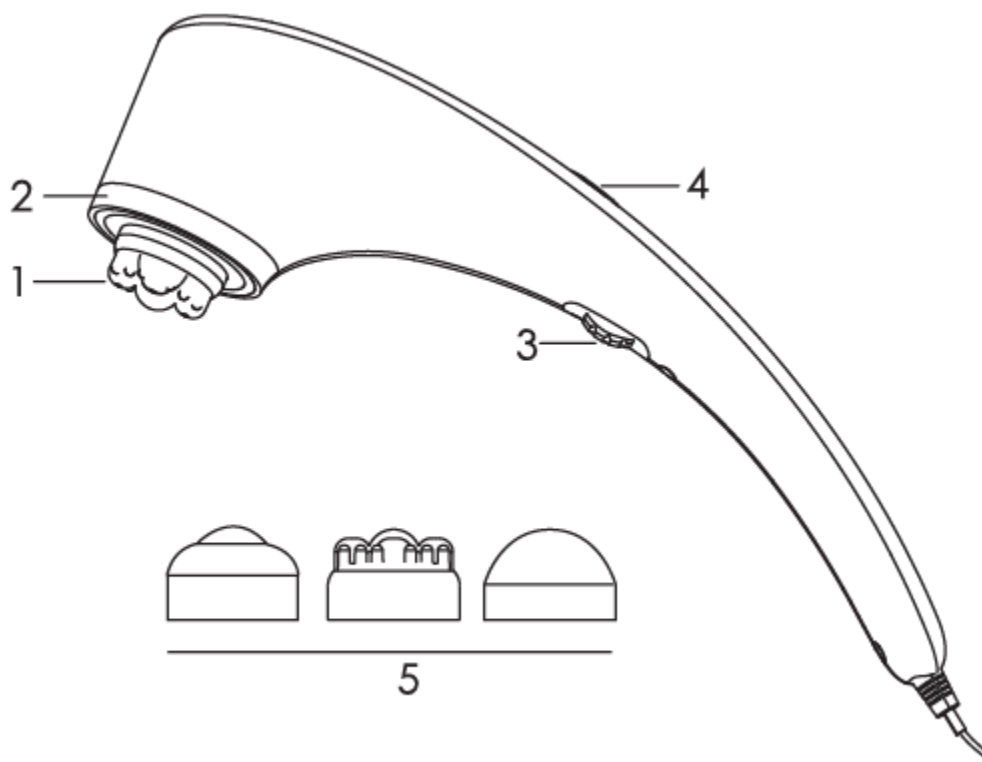

- 1) Масажні вузли
- 2) Зони підігріву
- 3) Кнопка увімкнення/вимкнення та регулятор вибору швидкості (безкінечно регульована інтенсивність масажу)
- 4) Кнопка активації функції підігріву
- 5) Змінні масажні насадки

Технічні параметри

Габаритні розміри (Ш x В x Г)	95 x 445 x 95 мм (3,74 x 17,52 x 3,74 дюйми)
Вага	1000 г
Номінальна вихідна потужність	20 Вт
Номінальна напруга	220-240 В змінного струму, 50/60 Гц

Початок роботи

- Дістаньте пристрій з упаковки
- Візуально перевірте пристрій, блок живлення та кабелі на наявність пошкоджень та/або дефектів
- Підключіть пристрій до джерела живлення (електромережі). Пристрій має бути вимкнтий.
- Прокладіть кабель так, щоб не було ризику перечепитись за нього та впасти.

Питання та відповіді

Проблема	Причина	Рішення
	Пристрій не підключено до джерела живлення.	Підключіть пристрій до джерела живлення і увімкніть його.
	Пристрій не рухається.	Увімкніть пристрій за допомогою кнопки увімкнення/вимкнення.
	Спрацював захист від надмірного нагрівання.	Відключіть пристрій від джерела живлення і дайте йому охолонути протягом 15 хвилин. Після цього знову підключіть його до джерела живлення і увімкніть.

Догляд за пристроєм

- Перед очищення пристрою завжди відключайте його від джерела живлення
- Завжди очищайте пристрій лише так, як зазначено у цій Інструкції. Не допускайте потрапляння будь-якої рідини всередину пристрою або насадок
- Не користуйтеся пристроєм до його повного висихання

Гарантія та підтримка

У разі виникнення питань стосовно підтримки, ремонту, обслуговування або гарантійних умов, будь-ласка, звертайтеся до нашої компанії за вказаними нижче контактними даними.

Веб-сторінка: www.citrus.ua

Ел.пошта: support@citrus.ua

* Примітка до уваги: Компанія Naipo надає післяпродажну підтримку лише стосовно тих виробів, які були придбані безпосередньо у компанії Naipo. Якщо ви придбали виріб у іншого дилера, рекомендуємо вам звертатись безпосередньо до такого дилера, у разі виникнення питань щодо підтримки або гарантії.