


封底



AMEUDA TECHNOLOGICAL CO., LTD
Адрес: Кімната 2102, Комплексна будівля, Веселозавицька зона вільної торгівлі Цзянцзінь, No.88, проспект Мау, місто Пуоухан, район Цзянцзінь, місто Чунцінь, Китай

Детали та компоненти приладу

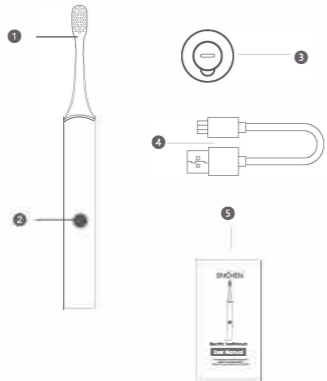

1. Головка зубної щітки
2. Кнопка живлення
3. Інтерфейс зарядки
4. Зарядний кабель
5. Інструкція з експлуатації

说明书 风琴 折页双面印

材质工艺：105g哑粉纸，单色印刷，无膜

成品尺寸：60*110 mm

印刷要求：色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印、不露杂色

ВИКОРИСТАННЯ ЩІТКИ

1. Встановіть головку зубної щітки.
2. Перед використанням нанесіть відповідну кількість зубної пасту на головку щітки, змочіть її водою, а потім помістіть у рот.
3. Увімкніть живлення та виберіть відповідний режим, відповідно до ваших потреб.
4. Розташуйте щітку в роті під кутом 45° до лінії ясен, та повільно нею рухайте.
5. Тримайте основний корпус зубної щітки рукою та повільно рухайте нею в ротовій порожнині круговими рухами. Не натискайте та не трійте щіткою занадто сильно.
6. Після чищення прополощіть рот та головку зубної щітки водою.

Зубна щітка може безперервно працювати протягом 120хв. після повного заряджання протягом 1 години.



ЗАРЯДЖАННЯ ЗУБНОЇ ЩІТКИ

1. У разі недостатності заряду акумулятора на зубній щітці буде блимати червоний індикатор, щоб нагадати вам про необхідність зарядити зубну щітку. Якщо червоний світловий індикатор блимає під час першого використання, це означає що рівень заряду батареї менше 30%. Будь-ласка зловтемо більше зарядити щітку. Якщо індикатор живлення постійно блимає, це означає що рівень заряду менше 10% . негайно зарядіть прилад перед подальшим використанням.
 2. Під'єднайте зарядний кабель до щітки та адаптера, а потім під'єднайте адаптер до розетки змінного струму 100-240 В. «Сід» використовувати адаптер SV/A.
 3. Під час заряджання буде миготіти білий індикатор, як нагадування вам, що зубна щітка заряджається.
 4. Час зарядки зубної щітки становить 2 години, про повинні заряд свідчитьме зелений індикатор.
- Примітка: Якщо зубна щітка не буде використовуватись протягом тривалого часу, будь-ласка, повністю заряджайте її принаймні раз на підроз.

Важливі інструкції з техніки безпеки

Будь-ласка, уважно прочитайте наведені нижче інструкції з техніки безпеки та дотримуйтеся всіх звичайних профілактичних заходів під час використання зубної щітки. Будь-ласка, прочитайте дану інструкцію та зберігайте її в належному стані для подальшого використання. Використовуйте дану зубну щітку виключно так, як зазначено в даному посібнику з експлуатації.

УВАГА
Цей пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.

- Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари до нього в недоступному для дітей місці.
- Символ справа вказує на те, що приладу можна мити під проточною водою
- Не занурюйте зубну щітку у воду під час її заряджання та не заряджайте її у вологому середовищі. Зберігайте зубну щітку сухою після використання.
- Прилад містить акумуляторну батарею. Ніколи не кидайте акумулятор у вогонь і ніколи не заряджайте його та не зберігайте у призначених з високою температурою.
- Не стискайте та не кидайте прилад. Якщо прилад пошкоджено внаслідок падіння або удару, припиніть його використання.
- Не намагайтесь полагодити або розібрати прилад самостійно.

- **Важливо!** Головка зубної щітки підлягає певному технічному обслуговуванню. Замінюйте головку зубної щітки кожні три місяці. Якщо головка зубної щітки пошкоджена замініть її.
- Якщо ви проходите лікування ротової порожнини або маєте інші проблеми в ротовій порожнині, перед використанням цього продукту обов'язково проконсультуйтеся з вашим стоматологом.
- Даний прилад використовується лише для чищення зубів, не використовуйте його для інших цілей.
- Якщо після користування приладом ви відчуваєте погіршення самопочуття та інші симптоми, які не зникають, або у вас тривала кровотеча з ясен, припиніть його використання та зверніться до стоматолога.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва продукту	
Дата покупки	
Адреса клієнта	
Дата/Місяць /Рік	
Назва магазину	
Гарантійний термін	

УМОВИ ТА ГАРАНТІЇ

* Усі пов'язані з якістю дефекти товарів, які продаються безпосередньо через ENCHEN або через авторизованих торгових посередників ENCHEN, покриваються розширеною гарантією, починаючи з дати покупки.
* Обмежена гарантія ENCHEN поширюється лише на країну придбання. Обмежена гарантія не діє для товарів, вивезених за межі країни, у якій вони спочатку були придбані або відправлені безпосередньо з авторизованої онлайн-покупки.
* Ця гарантія поширюється лише на оригінальні продукти ENCHEN. Гарантія не стосується нормального зносу та експлуатації приладу, а також будь-яких дефектів, що виникли внаслідок пошкодження, спричиненого неправильним використанням цього продукту.
Гарантія поширюється виключно на первинного покупця.
У разі виникнення будь-якої несправності продукту під час його нормального використання споживачі можуть користуватися безоплатними обслуговуванням, наданим продавцем або центром технічного обслуговування нашого заводу відповідно до змісту гарантійного талона.
* Щоб вимагати гарантії, зверніться до центру сервісного обслуговування в магазині, де ви купували прилад або напишіть нам за електронною адресою: export@enchen.cn

РЕЖИМИ ОЧИЩЕННЯ

1. Режим очищення (щоденне чищення зубів)
 2. Режим для чутливих зубів (з м'якою вібрацією для чутливих зубів)
 3. Режим відбілювання (глибоке відбілювання зубів)
- *Кожен режим має 3 напругування інтенсивності.
*Протягом 5 секунд після початку чищення натисніть на кнопку перемикача режимів, щоб змінити режим, або утримуйте кнопку, щоб вимкнути щітку.

Світловий дисплей

- Режим очищення-біле світло
- Чутливі режим-синє світло
- Режим відбілювання-зелене світло

30-секундна зміна зони очищення та розумний таймер на 2 хвилини.

Таймер допомагає вам очистити зуби протягом 2 хвилин, рекомендованих стоматологами, тоді як розумне нагадування пропонує вам рухити щітку кожні 30 секунд роботи, щоб нагадати вам про необхідність зміни зони очищення зубів і автоматично вимкнеться через 2 хвилини.

Функція пам'яті

Завдяки функції запам'ятовування, під час наступного використання зубної щітки, вона використовуватиме останній вибраний вами режим очищення.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завжди перед очищенням зубної щітки вимийте її. Промийте зубну щітку під проточною водою.

ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ АКУМУЛЯТОРА

1. Вийміть батарею з приладу, перш ніж вилучити її.
2. Перш ніж виймати батарею, переконайтеся, що прилад вимкнено.
3. Безпечно утилізуйте батарею.

封面



Електрична зубна щітка

Посібник користувача

З міркувань безпеки рівень заряду акумулятора виробу залишається низьким під час транспортування. Будь-ласка, повністю зарядіть виріб перед першим використанням

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва продукту:Електрична зубна щітка
Модель: Anoga T2
Номинальна напруга: 3.7 В Номинальна потужність:1.5 Вт
Клас водонепроникності:IPX7



КОМПЛЕКТАЦІЯ

Зубна щітка-1 шт.
Головка щітки-2 шт.
Зарядний кабель-1 шт.
Посібник користувача-1 шт.

Усування несправностей

Помилка	Можлива причина	Можливе вирішення
Знижена інтенсивність вібрації	1.Зубна щітка сильно притисається до зубів 2.Головка щітки надто глибоко притиснута до основного корпусу.	1.Не тисніть сильно щіткою на зуби 2.Змініть головку щітки з ручки та знову надягніть її на вихідний вал. Слідкуйте за тим, щоб між головою щітки та руковою була достатня відстань.
Короткий час роботи приладу після повної зарядки	1. Основний корпус неправильно розташований на зарядному пристрої, тому він не заряджається. 2. Низький рівень заряду батареї	Розташуйте основний корпус вертикально так, щоб його нижня частина торкалася зарядного пристрою, і перевірте, чи світиться індикатор зарядки
Зубна щітка не працює	1. Недостатній час заряджання пристрою. 2. Термін служби батареї закінчився	1. Будь-ласка, зарядіть пристрій 2. Замініть батарею в сервісному центрі нашої компанії