

110 MM

## ENČHEN Електрична зубна щітка



**Aurora T3**

**Посібник користувача**

\*3 міркувань безпеки рівень заряду акумулятора виробу зазначається низьким під час транспортування. Будь ласка, повністю зарядіть виріб перед першим використанням.

ENČHEN

ТОВ"АМЕУДА ТЕХНОЛОДЖІ СО"  
АДРЕСА: Кімната 2102, Комплексна будівля,  
Всесоюплююча зона вільної торгівлі Цзянцзінь, No.88,  
проспект Мауа, місто Луохуан, район Цзянцзінь, місто  
Чунцін, Китай

60 MM

### ВИКОРИСТАННЯ ЩІТКИ

1. Встановіть головку зубної щітки.
2. Перед використанням наведіть відповідну кількість зубної пасту на головку щітки, змочіть її водою, а потім помістіть у рот.
3. Увімкніть живлення та виберіть відповідний режим , відповідно до ваших потреб.
4. Роташуйте щітку в роті під кутом 45° до лінії ясен, та повільно нею рухайте.
5. Тримайте основний корпус зубної щітки рукою та повільно рухайте нею в ротовій порожині круговими рухами. Не натискайте та не тріть щіткою занадто сильно.
6. Після чищення прополщіть рот та головку зубної щітки водою.



- \* Зубна щітка може безперервно працювати протягом 240 хв. після повного заряджання протягом 18 годин.

### РЕЖИМИ ОЧИЩЕННЯ

1. Режим очищення - білий світловий індикатор: для очищення зубів.
2. Чутливий режим - рожевий світловий індикатор: легка вібрація для захисту чутливих ясен.
3. Режим відбілювання - жовтий індикатор: для глибокого відбілювання зубів.

Після вимкнення зубної щітки натисніть перемикач режимів, щоб змінити режим очищення та налаштування інтенсивності. Кожен режим має 3 налаштування інтенсивності.

#### ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ

Завдяки функції запам'ятовування, під час наступного використання зубної щітки, вона використовуватиме останній вибраний вами режим очищення.

#### ПРОФЕСІЙНИЙ ТАЙМЕР

Вбудований таймер допомагає вам очистити зуби протягом схвалених стоматологом 2 хв, в той час як інтелектуальне нагадування робить паузу кожні 30 секунд, щоб нагадати вам про перехід до наступної зони порожнини рота.

Щітка автоматично вимикається через 2 хвилини очищення.

#### РОЗУМНИЙ ДАТЧИК ТИСКУ

Для оптимального комфорту під час чищення зубів, щітка оснащена датчиком тиску. Якщо застосовано занадто великий тиск, світловий індикатор засвітиться синім кольором, а вібрація головки зубної щітки припиниться, сповіщаючи вас про необхідність зменшити тиск на зуби. Після увімкнення зубної щітки натисніть і утримуйте перемикач режимів, щоб увімкнути/вимкнути функцію датчика тиску, і світловий індикатор почне блимати.

#### ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ

1. Щітку оснащено функцією блокування під час подорожі, щоб запобігти її випадковому увімкненню в багажі.
2. Щоб увімкнути блокування під час подорожі, у вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку живлення, білий індикатор почне блимати, нагадуючи про те, що зубна щітка ввійшла в режим блокування.
3. Щоб вимкнути блокування, натисніть і утримуйте кнопку живлення, білий індикатор заблмнє, нагадуючи, що зубна щітка тепер готова до використання.

### Деталі та компоненти



### Важливі інструкції з техніки безпеки

Будь ласка, уважно прочитайте наведені нижче інструкції з техніки безпеки та дотримуйтеся всіх звичайних профілактичних заходів під час використання зубної щітки.

#### УВАГА

- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.
- Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари для нього в недоступному для дітей місці.
- Не закруйте зубну щітку у воду під час її заряджання та не заряджайте її у вологому середовищі. Зберігайте зубну щітку сухою після використання.
- Символ справа вказує на те, що приладе можна мити під проточною водою.

- Прилад містить вбудовану акумуляторну батарею. Ніколи не кидайте акумулятор у вогонь і ніколи не заряджайте його та не зберігайте у приміщеннях з високою температурою.
- Не стискайте та не кидайте прилад. Якщо прилад пошкоджено внаслідок падіння або удару , припиніть його використання.
- Не намагайтеся полагодити або розібрати прилад самостійно.


#### Важливо!

- Головка зубної щітки підлягає певному технічному обслуговуванню. Замінюйте головку зубної щітки кожні три місяці. Якщо головка зубної щітки пошкоджена, замініть її.
- Якщо ви проходите лікування ротової порожнини або маєте інші проблеми в ротовій порожнині, перед використанням цього продукту обов'язково проконсультуйтеся з вашим стоматологом.
- Даний прилад використовується лише для чищення зубів, не використовуйте його для інших цілей.
- Якщо після користування приладом ви відчуваєте погіршення самопочуття та інші симптоми, які не зникають, або у вас тривала кровотеча з ясен, припиніть його використання та зверніться до стоматолога.

### ЗАРЯДКА ЩІТКИ

1. Перед зарядкою обов'язково вимкніть зубну щітку. У разі недостатності заряду акумулятора на зубній щітці буде блимати червоний індикатор, щоб нагадати вам про необхідність зарядити зубну щітку. Будь ласка, зарядіть зубну щітку якнайшвидше.
2. Під'єднайте зарядний кабель Type-C до зарядної бази і адаптер, потім підключіть адаптер до розетки 100-240 В змінного струму. Необхідно використовувати адаптер 5 В/1 А.
3. Під час заряджання буде миготіти білий індикатор, як нагадування вам, що зубна щітка заряджається.
4. Час зарядки зубної щітки становить 18 годин, про повний заряд свідчить білий індикатор. .

**Примітка:** Якщо зубна щітка не буде використовуватись протягом тривалого часу, будь ласка, повністю заряджайте її принаймні раз на півроку.

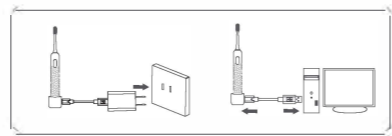

### ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ АКУМУЛЯТОРА

1. Вийміть батарею з приладу, перш ніж викинути її.
2. Перш ніж виймати батарею, переконайтеся, що прилад вимкнено.
3. Безпечно утилізуйте батарею.

### ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Після очищення промийте головку щітки проточною водою.
2. Зніміть насадку щітки та очистіть ручку та насадку щітки окремо. Переконайтеся, що вода тече в середину верхньої частини ручки, а також всередині головки щітки.
3. Витріть усі частини насухо та дайте їм висохнути на повітрі, перш ніж знову збирати свою зубну щітку.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва продукту: Електрична зубна щітка

Модель: Aurora T3

Вхідна напруга: 5 В==

Номінальна потужність: 1,2 Вт

Час зарядки: 18 годин



### КОМПЛЕКТАЦІЯ

НАЗВА	КІЛЬКІСТЬ
Зубна щітка	1
Головка щітки	2
Зарядний кабель	1
Зарядна база	1
Посібник користувача	1

## Aurora T3 英俄说明书

技术要求 骑马钉

材质: 105g哑粉纸

尺寸: 110\*60 mm

印刷要求: 色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印、不露杂色

颜色及专色: Pantone cool gray 11C

### ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва продукту	
Дата покупки	
Адреса клієнта	
Дата/Місяць /Рік	
Назва магазину	
Гарантійний термін	

### УМОВИ ТА ГАРАНТІЇ

\* Усі пов'язані з якістю дефекти товарів, які продаються безпосередньо через ENČHEN або через авторизованих торгових посередників ENČHEN, покриваються розширеною гарантією, починаючи з дати покупки.

\* Обмежена гарантія ENČHEN поширюється лише на країну придбання. Обмежена гарантія не діє для товарів, вивезених за межі країни, у якій вони спочатку були придбані або відправлені безпосередньо з авторизованої онлайн-покупки.

\* Ця гарантія поширюється лише на оригінальні продукти ENČHEN. Гарантія не стосується нормального зносу та експлуатації приладу, а також будь-яких дефектів, що виникли внаслідок пошкодження, спричиненого неправильним використанням цього продукту.

Гарантія поширюється виключно на первинного покупця. У разі виникнення будь-якої несправності продукту під час його нормального використання споживачі можуть користуватися безкоштовним обслуговуванням, наданим продавцем або центром технічного обслуговування нашого заводу відповідно до вартості гарантійного талона.

\* Щоб вимагати гарантії, зверніться до центру сервісного обслуговування в магазині, де ви купували прилад або напишіть нам за електронною адресою: [export@enchen.cn](mailto:export@enchen.cn)

ENČHEN

ТОВ"АМЕУДА ТЕХНОЛОДЖІ СО"  
АДРЕСА: Кімната 2102, Комплексна будівля,  
Всесоюплююча зона вільної торгівлі Цзянцзінь, No.88,  
проспект Мауа, місто Луохуан, район Цзянцзінь, місто  
Чунцін, Китай