


# 封底

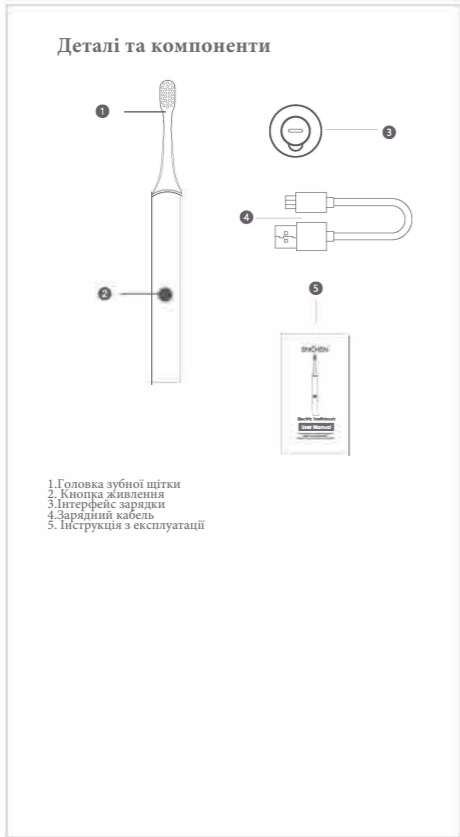

## 说明书 风琴 折页双面印

材质工艺: 105g哑粉纸, 单色印刷, 无膜

成品尺寸: 60\*110 mm

印刷要求: 色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印、不露杂色

### ВИКОРИСТАННЯ ЩІТКИ

- Встановіть головку зубної щітки.
- Перед використанням нанесіть відповідну кількість зубної пасти на головку щітки, змочіть її водою, а потім помістіть у рот.
- Увімкніть живлення та виберіть відповідний режим, відповідно до ваших потреб.
- Розташуйте щітку в роті під кутом 45° до лінії ясен, та повільно нею рухайте.
- Тримайте основний корпус зубної щітки рукою та повільно рухайте нею в ротовій порожнині круговими рухами. Не натискайте та не трій щіткою занадто сильно.
- Після чищення прополощіть рот та головку зубної щітки водою.

Зубна щітка може безперервно працювати протягом 60 хв. після повного зарядження протягом 2 години.



### ЗАРЯДЖАННЯ ЗУБНОЇ ЩІТКИ

- У разі недостатності заряду акумулятора на зубній щітці буде блимати червоний індикатор, щоб нагадати вам про необхідність зарядити зубну щітку. Якщо червоний світловий індикатор блимає під час першого використання, це означає що що рівень заряду батареї менше 30%. Будь-якш якмога швидше зарядіть щітку. Якщо індикатор живлення постійно блимаєце означає що рівень заряду менше 10%, негайно зарядіть прилад перед подальшим використанням.
  - Під'єднайте зарядний кабель до щітки та адаптера, а потім під'єднайте адаптер до розетки змінного струму 100-240 В. «Сідд використовувати адаптер SV/A.
  - Під час заряджання буде миготіти білий індикатор, як нагадування вам, що зубна щітка заряджається.
  - Час зарядки зубної щітки становить 2 години, про повний заряд свідчитиме зелений індикатор.
- Примітка:** Якщо зубна щітка не буде використовуватись протягом тривалого часу, будь ласка, повністю заряджайте її привнаймі раз на півроку.

### Важливі інструкції з техніки безпеки

- Будь ласка, уважно прочитайте наведені нижче інструкції з техніки безпеки та дотримуйтеся всіх звичайних профілактичних заходів під час використання зубної щітки.
- Будь ласка, прочитайте дану інструкцію та зберігайте її в належному стані для подальшого використання. Використовуйте дану зубну щітку виключно так, як зазначено в даному посібнику з експлуатації.
- УВАГА!**
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумними здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.
  - Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари для нього в недоступному для дітей місці.
  - Не накруйте зубну щітку у воду під час її заряджання та не заряджайте її у вологому середовищі. Зберігайте зубну щітку сухою після використання.
  - Сильної справа вказує на те, що приладе можна мити під проточною водою.
  - Прилад містить вбудовану акумуляторну батарею. Ніколи не кидайте акумулятор у вогонь і ніколи не заряджайте його та не зберігайте у приміщеннях з високою температурою.
  - Не ступайте та не кидайте прилад. Якщо прилад пошкоджено внаслідок падіння або удару, припиніть його використання.
  - Не намагайтеся полагодити або розібрати прилад самостійно.

#### Важливо!

- Головка зубної щітки піддає певному технічному обслуговуванню. Замовіть головку зубної щітки кожні три місяці. Якщо головка зубної щітки пошкоджена замінити її.
- Якщо ви переодиче лікування ротової порожнини або маєте інші проблеми в ротовій порожнині, перед використанням цього продукту обов'язково проконсультуйтеся з вашим стоматологом.
- Даний прилад використовується лише для чищення зубів, не використовуйте його для інших цілей.
- Якщо після користування приладом ви відчуваєте погіршення самопочуття та інші симптоми, які не зникають, або у вас тривала кровотеча з ясен, припиніть його використання та зверніться до стоматолога.

### ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва продукту
Дата покупки
Адреса клієнта
Дата/Місяць /Рік
Назва магазину
Гарантійний термін

### УМОВИ ТА ГАРАНТІЇ

- \* Усі пов'язані з якістю дефекти товарів, які продаються безпосередньо через ENCHEN або через авторизованих торгових посередників ENCHEN, покриваються розширеною гарантією, починаючи з дати покупки.
- \* Обмежена гарантія ENCHEN поширюється лише на країну придбання. Обмежена гарантія не діє для товарів, вивезених за межі країни, у якій вони спочатку були придбані або відправлені безпосередньо з авторизованої онлайн-покупки.
- \* Ця гарантія поширюється лише на оригінальні продукти ENCHEN. Гарантія не стосується нормального зносу та експлуатації приладу, а також будь-яких дефектів, що виникли внаслідок пошкодження, спричиненого неправильним використанням цього продукту. Гарантія поширюється виключно на первинного покупця.
- У разі виявлення будь-якої несправності продукту під час його нормального використання споживачі можуть користуватись безкоштовним обслуговуванням, наданим продавцем або центром технічного обслуговування нашого заводу відповідно до змісту гарантійного талона.
- \* Щоб вимагати гарантії, зверніться до центру сервісного обслуговування в магазині, де ви купували прилад або напишіть нам за електронною адресою: [export@enchen.cn](mailto:export@enchen.cn)

### РЕЖИМИ ОЧИЩЕННЯ

- Режим очищення (подовжене чищення зубів)
  - Режим для чутливих зубів (м'яка вібрація для чутливих зубів)
  - Режим відбілювання (глибоке відбілювання зубів)
- \*Кожен режим має 3 налаштування інтенсивності.
- Світловий дисплей**  
Режим очищення-біле світло  
Чутливий режим-сіме світло  
Режим відбілювання-зелене світло
- 30-секундна зміна зони очищення та розумний таймер на 2 хвилини.**  
Таймер допомагатиме вам висити зуби протягом 2 хвилин, рекомендованих стоматологами, тоді як розумне нагадування призупиняє рухи голівки щітки кожні 30 секунд роботи, щоб нагадати вам про необхідність зміни зони очищення зубів і автоматично вимкнеться через 2 хвилини.
- Функція пам'яті**  
Завдяки функції запам'ятовування, під час наступного використання зубної щітки, вона використовуватиме останній вибраний вами режим очищення.

### ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Завжди перед очищенням зубної щітки вимийте її.
- Промийте зубну щітку під проточною водою.

### ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ АКУМУЛЯТОРА

- Вийміть батарею з приладу, перш ніж викинути її.
- Перш ніж викинути батарею, переконайтеся, що прилад вимкнено.
- Безпечно утилізуйте батарею.

# 封面

