



УВАГА

Будь ласка, уважно прочитайте перед використанням

- Не використовуйте цей продукт, якщо у вашому тілі є такі медичні пристрої, як кардіостимулятор, штучні легені та переносний електрокардіограф.

- Не використовуйте його, якщо ви вагітні.

- Не використовуйте його на слизькій підлозі.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте перед використанням

- Дані вимірювання можуть бути неточними, якщо використовувати вимірювання відразу після інтенсивних вправ.

- Будь ласка, встаньте на ваги босоніж, щоб виміряти жир і інші показники складу тіла.

- Цей продукт не можна використовувати для лікування або діагностики будь-яких захворювань. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем або медичного працівника, щоб визначити, що вам підходить.

ПОРАДИ ЩОДО ВИМІРЮВАННЯ

Дякуємо за вибір наших ваг, уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь детальних інструкцій перед початком використання:

- Цей продукт використовує технологію BIA (аналіз біоелектричного опору). Щоб отримати точні та узгоджені результати вимірювань, будь ласка, використовуйте його щодня в один і той же час і в однакових умовах, наскільки це можливо, наприклад, щодня вранці тощо.


- Щоб отримати точніші результати, будь ласка, уникайте вимірювань за таких умов:

- (1) Під час або відразу після використання напружених вправ
- (2) Одразу після душу, ванни чи сауни
- (3) Після рясного вживання алкоголю
- (4) Під час або відразу після нагубання
- (5) Під час лихоманки


- Будь ласка, спочатку будьте босоніж і стоїте прямо на вагах під час вимірювань, носіння шкарпеток або брудних ніг тощо безпосередньо вплине на точність вимірювання та результати.

- Одиниці вимірювання ваги можна змінювати з фунтів (lb) на кілограми (kg) безпосередньо через програму ваг, включаючи одиниці висоти.

- Поради щодо правильного вимірювання ваги: покладіть ваги рівно на тверду підлогу або м'який килим і скиньте їх перед вимірюванням, зачекайте, щоб на вазі відобразилося 0,0 lb/kg після того, як ваги прокинуться, перш ніж починати вимірювання.

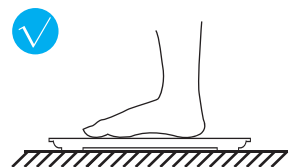

- Поради щодо правильного вимірювання жиру в організмі та інших параметрів: станьте прямо на ваги, і тримайте обидві ноги рівномірно торкаючись електродів, як показано на малюнках нижче.

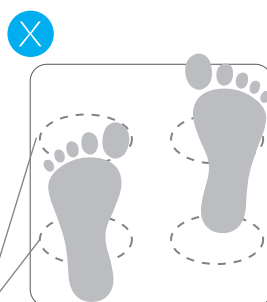

Електропровідні ділянки

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

Назва : Smart Body Composition Scale

Модель : CS20M

Розміри 280 x 280 x 24.5мм

Вага : 1.25кг

Діапазон ваги : 0.2 - 180кг

Батареї: 3 x 1.5B AAA

Bluetooth 2,4ГГц; EIRP<10мВт

Bluetooth 2400-2483 мГц, максимальна потужність випромінювання < 10 мВт

Інтерфейс



Yolanda

Смарт ваги

Smart Body Composition Scale

Керівництво користувача

Розумні ваги Wireless Body Composition Smart Scale – це аналізатор тіла, який вимірює вагу та використовує технологію аналізу біоелектричного опору (BIA) для оцінки відсотка жиру в організмі та інших даних про склад тіла. Він призначений тільки для домашнього використання.

Виробник: Shenzhen Yolanda Technology Co., Ltd. (Юланда Шенжень Технолоджи Ко.,ЛТД). Адреса: Будівля А3, парк Абао Гуаньяо, 4 пром.зона Шуйтянь, вул. Шиянь, район Баоань, м. Шеньчжень, КНР
Імпортер: вказано на упаковці.

ПАКУВАННЯ

Ваги smart body composition scale package включає:

- (1) Розумні ваги
- (2) Батареї: 3 x 1,5 В AAA
- (3) Посібник користувача

ЖИВЛЕННЯ

Ці розумні ваги постачаються з 3 батарейками типу AAA. Перед використанням вставте батареї в батарейний відсік і підключіть ваги. Після включення ви можете виміряти вагу тіла і деякі параметри. Однак, щоб виміряти більше параметрів складу тіла, таких як вісцеральний жир, вам потрібно використовувати розумні ваги разом зі смартфонами або планшетами. Спершу вам потрібно буде інсталиювати мобільні додатки на своїх мобільних пристроях, див. далі.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКУ ТА ВИМІРЮВАННЯ

Ці інтелектуальні ваги складу тіла можуть підключатися до додатку мобільних телефонів або планшетів по бездротовому зв'язку після того, як ви інсталиюєте додатки мобільних додатків.

Будь ласка, спочатку знайдіть і завантажте APP "Feelfit" в App Store або Google Play і уважно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій:

Крок 1: Завантажте ДОДАТОК



Відскануйте QR-код або знайдіть APP "Feelfit" в Apple Store або Google Play, щоб завантажити APP



Зареєструватися




Після активації пристрою покладіть його на рівну поверхню або килим


Крок 2: З'єднати з мобільним телефоном



Введіть мій пристрій / додайте новий пристрій/ з'єднайте пристрій

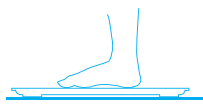

Стати на ваги

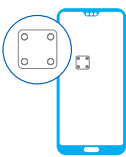

Підключення ваги до APP

Крок 3: Виміряйте та перевірте звіт про аналіз тіла



Знову встаньте на ваги після того, як ваги відобразять 0,0 lb/kg, і зійдіть із ваг до завершення вимірювань



Перевірте звіт про тіло в APP

DISPLAY INSTRUCTION

 Нормальна робота	 Немає бездротового підключення	 Калібрування
 Нестабільна вага показ понаднормової роботи	 Стандартний час зважування закінчився, звітність будь-ласка	 Помилка вимірювання
 Перевантаження	 Низький заряд батареї	 Замініти акумулятор

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:



Це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів. Для повернення відпрацьованого виробу використовуйте відповідні системи збору і повернення, або зв'яжіться із продавцем цього виробу. Він може забрати цей виріб для подальшої безпечної переробки.



Справжнім Імпортер (вказаний вище) заявляє, що тип радіобладнання (вказаний вище) відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.ctrs.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з прismoною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.
РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію в межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.
РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталиатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.
Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.
Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.
Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1.				
2				
3.				
4.				
5.				
6.				