


ONYX

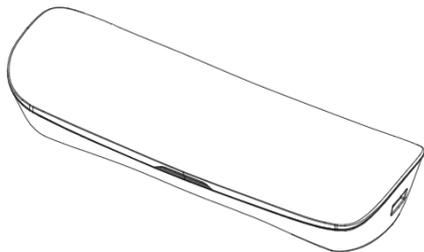


VITAMMY®

ONYX

ЗВУКОВА ЗУБНА ЩІТКА З
ІННОВАЦІЙНИМ ДОРОЖНІМ
КЕЙСОМ З ФУНКЦІЄЮ ЗАРЯДКИ
Модель ТВ9052 (ТВ9051 + ТС1905)

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням щітки, обов'язково ознайомтесь з інструкцією з використання.

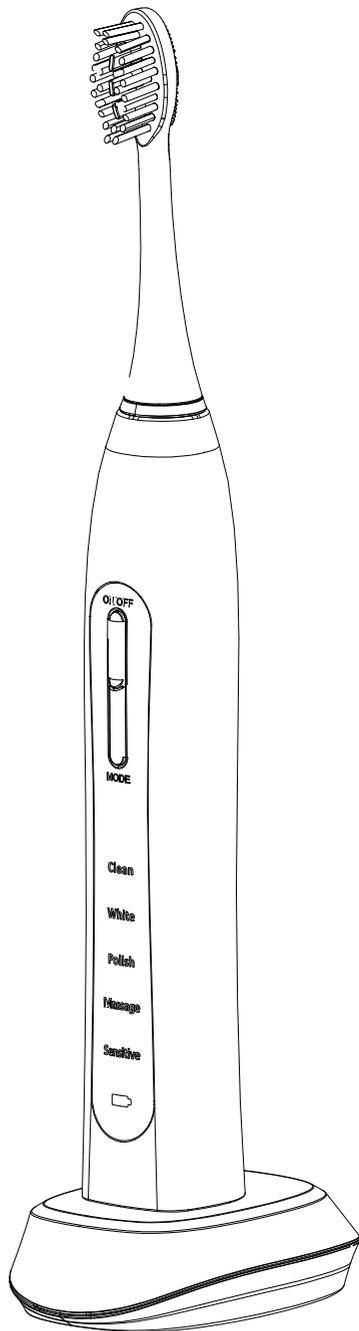

ЗМІСТ

Вступ	3
Попередження	3
Опис пристрою	6
Панель керування та опис режимів роботи	7
Перед першим використанням	8
Робота пристрою	9
Очищення та обслуговування	11
Пояснення використаних символів	12
Гарантія	13
Комплект постачання	14
Утилізація	15
Контактна інформація	16

ВСТУП

Дякуємо за вибір звукової зубної щітки Vitammy Onyx (TB9052).

Дана інструкція з експлуатації містить важливу інформацію щодо безпечного використання та поради з належного застосування та догляду за придбаним виробом.

△ Перед першим використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Під час користування електроприладами, завжди дотримуйтеся основних правил безпеки, зокрема таких:


- △ Переконайтесь, що напруга в мережі відповідає напрузі вказаній на пристрої.
- △ Щоб уникнути ураження електричним струмом або інших травм, не використовуйте зарядний пристрій у ванній кімнаті та не занурюйте шнур та вилку приладу у воду чи інші рідини. Не занурюйте пристрій у воду.
- △ Не використовуйте зарядний пристрій, якщо його шнур чи вилка пошкоджені. В разі виявлення несправності зверніться до сервісного центру для ремонту. Не ремонтуйте прилад самостійно.
- △ Відеднуючи зарядний пристрій від мережі тягніть за вилку на не за шнур.
- △ Не занурюйте зубну щітку в гарячу воду
- △ Якщо підключений до мережі зарядний пристрій впав у воду, спочатку вимкніть живлення, а потім вийміть зарядний пристрій із води.

- △ Даний пристрій може використовуватися дітьми з 8 років а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду і знань, якщо їм надано контроль або інструкція щодо безпечного використання пристрою і розуміння пов'язаної з ним небезпеки.
- △ Діти не повинні гратися з цим пристроєм.
- △ Чищення та обслуговування пристрою не повинно проводитись дітьми без нагляду дорослих.
- △ Не тисніть зубною щіткою на зуби та/або ясна з надмірною силою.
- △ Не чистіть одну ділянку протягом тривалого часу, щоб не пошкодити поверхню зубів і/або ясен.
- △ Перед кожним використанням перевіряйте зубну щітку на наявність пошкоджень.
- △ Якщо ви перенесли операцію або стоматологічну процедуру, перед використанням зубної щітки необхідна консультація стоматолога.
- △ Під час перших використань зубної щітки, ваші ясна можуть кровоточити. Якщо це не зникає після тижня використання зубної щітки, зверніться до лікаря.
- △ Якщо вам встановлено кардіостимулятор або інший імплантат, перед використанням пристрою зверніться до свого лікаря або виробника імплантованого пристрою.
- △ Це пристрій особистої гігієни, який не призначений для використання кількома особами.
- △ Рекомендовано замінювати головку щітки кожні 3 місяці.
- △ Якщо шнур живлення пошкоджено, не використовуйте пристрій та не ремонтуйте його самостійно.
- △ Використовувати пристрій виключно так, як описано в даній інструкції
- △ Не використовуйте аксесуари, не рекомендовані виробником.
- △ Захищайте кабель від нагрітих поверхонь.
- △ Подвійна ізоляція -при обслуговуванні пристрою використовуйте лише ідентичні запчастини.

- △ Не вставляйте жодних предметів у заглиблення або отвори пристрою.
- △ Не використовуйте пристрій під час сну або коли користувач млявий.
- △ Збережіть дану інструкцію для подальшого використання.

Опис пристрою


Головка щітки

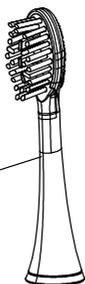


Кнопка ON/OFF

Кнопка MODE
(Вибір режиму)

Ручка

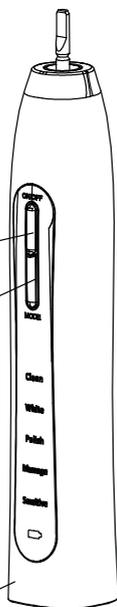

Зарядний пристрій

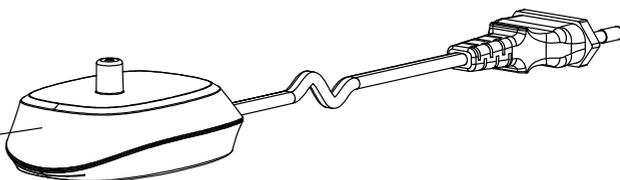

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ТА ОПИС РЕЖИМІВ РОБОТИ


Clean (Очищення): щоденне очищення та видалення нальоту (стандартний режим)

White (Відбілювання): режим відбілювання

Polish: (Полірування): режим полірування для освітлення поверхні зубів

Massage (Масаж): Режим масажу, який поєднує в собі режим очищення з масажними рухами - стимулює ясна і покращує їх стан.

Sensitive (Чутливий режим): надзвичайно ніжний режим, рекомендований для ніжних ясен і чутливих зубів

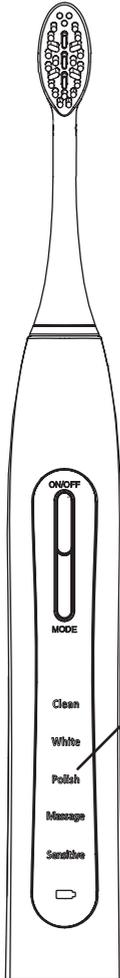

Clean (Очищення)

White (Відбілювання)

Massage (Масаж)

Polish (Полірування)

Sensitive (Чутливий режим)




ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Перед першим використанням зарядіть зубну щітку протягом 12 годин.

1. Підключіть зарядний пристрій до мережі.
2. Поставте зарядний пристрій на горизонтальну рівну стійку поверхню та підключіть його до мережі.
3. Переконайтеся, що зубна щітка вимкнена.


△ Розмістіть зубну щітку вертикально на зарядному пристрої так, щоб штифт зарядного пристрою входив в отвір у нижній частині корпусу зубної щітки, як показано на малюнку нижче.

Під час зарядки індикатор заряду акумулятора світиться червоним кольором. Після завершення заряджання індикатор світитиметься синім кольором.

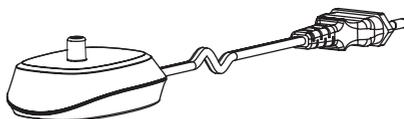

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Помістіть головку щітки на металевий штифт тримача зубної щітки, як показано на малюнку нижче. Переконайтеся, що наконечник вставлено належним чином.

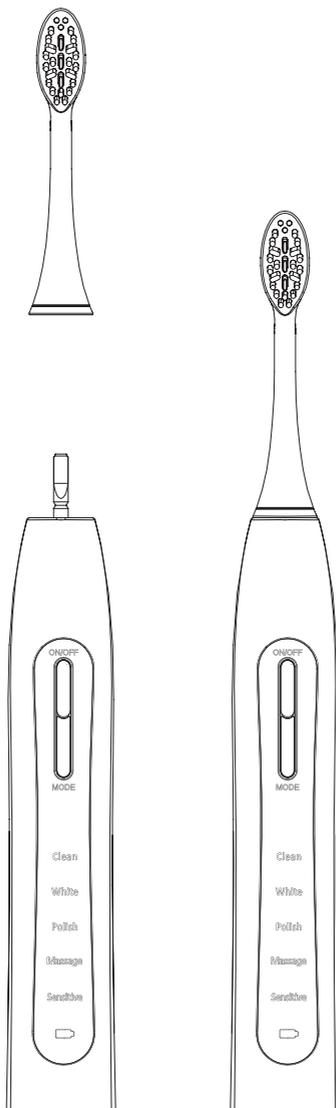

2. Жорсткість волокон щітки можна регулювати, потримавши головку зубної щітки у воді протягом певного часу. Холодна вода робить волокна жорсткішими, гаряча — розм'якшує.
3. Змочіть головку щітки водою та нанесіть зубну пасту на вимкнену зубну щітку.
4. Помістіть зубну щітку в рот і притисніть її щетиною до поверхні зубів.
5. Увімкніть зубну щітку, натиснувши кнопку ON/OFF, і почніть чистити в звичайному режимі. Зубна щітка буде працювати протягом 4 циклів по 30 секунд кожен, з короткою перервою між ними. Після останнього циклу, зубна щітка автоматично вимкнеться.
6. Під час роботи щітки можна змінити режим роботи натиснувши кнопку MODE.
Послідовність режимів: **Clean** ->**White** ->**Polish** -> **Massage** -> **Sensitive**. Зубна щітка запам'ятовує останній обраний режим і наступне очищення почне з нього.
7. Після чищення зубів зніміть головку щітки, щоб промити її під проточною водою.
8. Якщо зубна щітка розрядилася, поставте її на зарядний пристрій і зарядіть її.

⚠ **Захист від низького заряду акумулятора: під час розрядження акумулятора, індикатор стану заряду акумулятора блимає червоним кольором. У цьому випадку необхідно припинити очищення, вимкнути зубну щітку та негайно повставити її на зарядку, щоб уникнути повного розрядження акумулятора.**

УВАГА! Пристрій призначений виключно для домашнього використання. Не використовуйте зубну щітку на відкритому повітрі або в місцях, де розпилюються аерозолі або подається чи використовується кисень.

- △ Перед очищенням від'єднайте зарядний пристрій від джерела живлення
- △ Не використовуйте для очищення щітки корозійні хімікати, грубі абразивні матеріали або металеві губки.
 - Очистіть корпус щітки та зарядну базу вологою тканиною
 - Ми рекомендуємо замінювати головку щітки кожні 3 місяці.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ДОРОЖНЬОГО КЕЙСА З ФУНКЦІЄЮ ЗАРЯДКИ

ВАЖЛИВО! ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Користуючись електроприладом, дотримуйтеся основних правил безпеки:

△ Уважно прочитайте інструкцію з використання.


- Перед використанням, переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, зазначеній на паспортній табличці пристрою.
- Не використовуйте зарядний пристрій у ванній, щоб уникнути ураження електричним струмом або пожежі. Ніколи не занурюйте кейс у воду чи будь-яку іншу рідину та не промивайте його водою.
- Не використовуйте виріб, якщо корпус або USB-кабель пошкоджено або якщо USB-кабель не вдається повністю вставити в відповідний роз'єм.
- Від'єднуючи USB-кабель, ніколи не тягніть за кабель. Не торкайтеся корпусу або USB-кабелю мокрими руками.
- Якщо зарядний пристрій впав у воду, - спочатку від'єднайте живлення, а потім вийміть його з води.
- Не розбирайте та не модифікуйте прилад самостійно.
- Температура навколишнього середовища під час використання дорожнього кейса має бути від 0 до 45°C.
- Не кладіть металеві предмети на зарядний пристрій, щоб уникнути пожежі.
- Перед використанням кейса, переконайтеся, що пристрій не має ознак пошкодження. Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений.
- Не використовуйте зарядний футляр для подорожей кейс у вологому середовищі або у воді, оскільки цей пристрій не є водонепроникним. Очистіть і протріть пристрій, якщо на ньому є залишки води.

Якщо пристрій пошкоджено або він не працює належним чином, зверніться до авторизованого сервісного центру або дилера VITAMMY для ремонту.

△ Збережіть діну інструкцію для подальшого використання.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ДОРОЖНЬОГО КЕЙСА З ФУНКЦІЄЮ ЗАРЯДКИ

1. Зніміть головку зі щітки.
2. Помістіть зарядний кейс на плоску стійку поверхню, потім відкрийте верхню кришку та вставте в кейс зубну щітку без насадки.
3. Вставте кабель USB в відповідний роз'єм на кейсі і підключіть його до зовнішнього джерела живлення USB 5 В, щоб почати заряджання. Верхню кришку можна тримати як закритою, так і відкритою під час зарядки. Час повної зарядки зубної щітки становить приблизно 16 годин. Точний час заряджання залежить від стану акумулятора.

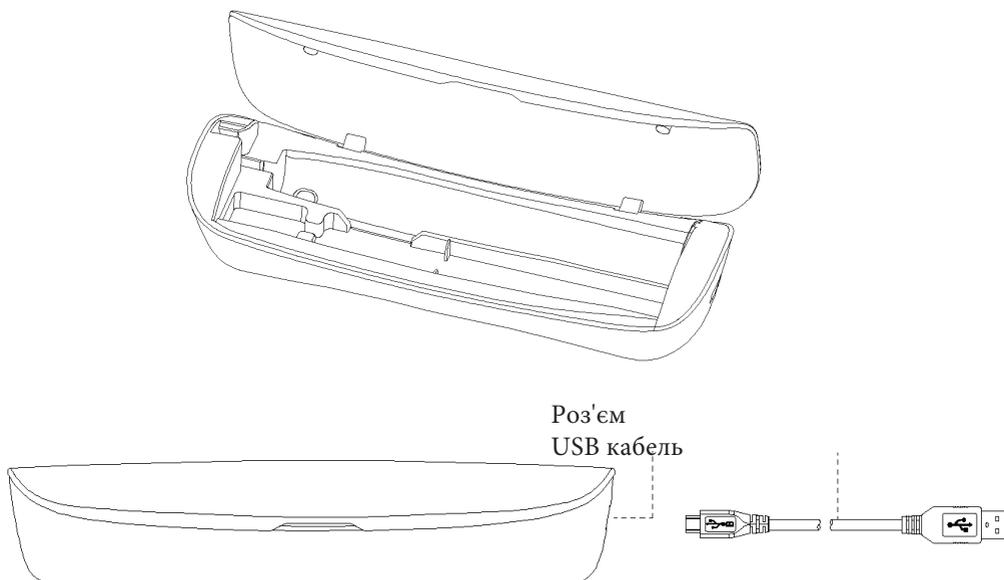

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ДОРОЖНЬОГО КЕЙСА З

△ Перед очищенням відєднайте кейс і вийміть з нього USB-кабель .

Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій, щоб періодично очищати пристрій.

1. Протріть корпус сухою тканиною.
2. Періодично очищайте вилку від пилу та бруду.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ДОРОЖНЬОГО КЕЙСА З ФУНКЦІЄЮ ЗАРЯДКИ

ПРОБЛЕМА	ВИРІШЕННЯ
<p>Під час заряджання зубної щітки в кейсі не світиться індикатор зарядки.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Переконайтеся, що USB-кабель надійно вставлено в зарядний пристрій. 2. Індикатор заряджання засвітиться приблизно через 10 хвилин після заряджання, якщо зубна щітка використовується вперше або не використовувалася більше трьох місяців.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель продукту	TC1901
Номінальна напруга	DC 5В /USB
Вхідний струм	500 мА - 1000 мА

СИМВОЛИ ТА ЗНАКИ

Попереджувальні знаки та символи, які є в посібнику та на самому пристрої, важливі для безпечного використання придбаного обладнання.

Їх значення пояснюється в таблиці нижче:

	Прочитайте інструкцію з експлуатації		Виробник
	Постійний струм		Імпортер
	Дата виготовлення		Маркування матеріалів, призначених для контакту з їжею
	Серійний номер		Подвійна ізоляція
	Відповідно до директиви WEEE 2012/19/EU: відпрацьоване обладнання має бути утилізовано відповідно до чинних норм.		Пристрій відповідає вимогам, зазначеним у відповідних директивах CE

ГАРАНТІЯ

Пристрій	МОДЕЛЬ :Vitammy Onyx (ТВ9052)	
Продавець	Компанія Extreme Pride, м.Київ, Машинобудівна, 41+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram) service@extremepride.com.ua diagnostic@extremepride.com.ua	
Гарантія	Продавець запевняє Покупця, що прилад VITAMMY, на який поширюється ця гарантія, був розроблений і виготовлений відповідно до високих стандартів якості. Також запевняє покупця в тому, що пристрій належної якості, без дефектів матеріалів, які можуть перешкоджати його належній роботі. У разі виявлення дефектів, пошкоджень і несправностей протягом гарантійного терміну, Продавець безкоштовно відремонтує або замінить пристрій на новий у найкоротший термін, але не більше ніж за 14 днів.	
Гарантійний термін	Ця гарантія передбачає, що обладнання буде доставлено до сервісного центру за рахунок Покупця, безкоштовно відремонтовано та безкоштовно повернуто Покупцю.	
	Гарантійний термін пристрою становить 24 місяці	
Порядок дій у разі виявлення несправності	Гарантія не поширюється на частини та аксесуари, які зношуються під час нормального використання: насадка для щітки, акумулятор. Гарантія дійсна з дати покупки, підтверженої доказом покупки, який повинен бути доданий до гарантійного талона. Ця гарантія діє на території України Щоб скористатися гарантією, протягом 14 днів з моменту виявлення дефекту зверніться на гарячу лінію для довідки та технічної підтримки для отримання допомоги та, якщо необхідно, ініціювання процедури репарації. У рамках процедури розгляду репарації, обладнання, на яке подано скаргу, слід надіслати на адресу сервісу, додавши цей гарантійний талон і доказ покупки. Для збереження чинності гарантії разом із пристроєм необхідно надати цей гарантійний талон (правильно заповнений і підписаний) і чек, що містить дату покупки та назву придбаного пристрою.	
На що не поширюється гарантія	Гарантія не передбачає будь-якої компенсації за пряму чи непряму шкоду, заподіяну особам або пристроям, коли пристрій не працював або перебував в обслуговуванні.	
	Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли через неправильну експлуатацію, використання виробу не за призначенням, на пошкодження, які виникли в зв'язку з неправильним зберіганням та обслуговуванням приладу, на несанкціоноване втручання в обслуговування, несанкціонований ремонт, модифікацію та зміну конструкції або порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику.	
	Гарантія не поширюється на поломку виробу внаслідок зміни властивостей (зниження якості) елементів, що піддаються природному зносу.	
	Гарантійний ремонт не поширюється на дії, пов'язані з обслуговуванням і очищенням пристрою, описані в Посібнику користувача.	
Печатка та підпис продавця	Дата	Підпис

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Тримач для зубних щіток ONYX (ТВ9052)
2. 2 насадки для щітки
3. Зарядний пристрій
4. Дорожній кейс із зарядним пристроєм
5. USB-кабель для зарядного пристрою
6. Посібник користувача

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ



Це маркування вказує, що цей виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами.

Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних джерел.

Щоб отримати додаткову інформацію про пункти збору використаного обладнання, зверніться до місцевих органів влади або місцевого пункту утилізації побутових відходів.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ



Компанія Extreme Pride, м.Київ, Машинобудівна,

41+38 (067) 654-32-86

(Viber, Telegram)

service@extremepride.com.ua

diagnostic@extremepride.com.ua



Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.

Південна дорога Чженхе, місто Леліу, район Шунде, місто

Фошань, провінція Гуандун, Китай Зроблено в Китаї /

Made in China

