


G6说明书

121 mm

Jeeback × ENCHEN

Масажер для шії

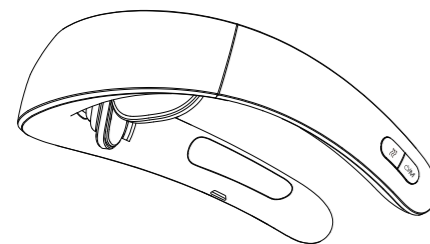

G6
ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА

Jeeback

Важливі вказівки з техніки безпеки!

Попередження: Прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче вказівок, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

- Завжди знімайте зарядний кабель, перед очищенням та використанням приладу.
- Ніколи не кидайте виріб у воду чи інші рідини.
- Якщо прилад випадково впав у воду під час заряджання, будь ласка, негайно від'єднайте зарядний пристрій і не торкайтеся виробу.
- Не використовуйте прилад під час водних, прийняття ванни або душу.
- УВАГА!**
 - Не використовуйте прилад у легкозаймистих і вибухонебезпечних місцях, таких як автозаправні станції та майстерні з пилом.
 - Не використовуйте прилад у вологому, високотемпературному та електромагнітному середовищі.
 - Цей продукт містить літій-іонну батарею, будь ласка, не розбирайте, не модифікуйте та не викидайте її у вогонь.
 - Якщо виріб зламався або впав у воду, і він не працює належним чином, припиніть його використання.
 - Користувачі, які не чутливі до джерел тепла або схильні до алергії на тепло, повинні використовувати нагрівальну трубку з обережністю.
 - Користувачам із кардіостимуляторами, серцево-судинними захворюваннями та іншими медичними пристроями заборонено використовувати продукт.
 - Не використовуйте даний прилад, якщо ваша шия травмована, запалена, або ви відчуває інший дискомфорт.
 - Не використовуйте виріб біля рота, очей, голови, статевих органів і слуху
 - Не використовуйте виріб разом з іншим медичним обладнанням або більше ніж з 2 продуктами одночасно.
 - Якщо ви почуваетесь погано під час або після використання приладу, будь ласка, негайно припиніть використання цього приладу та зверніться до лікаря.
 - Даний продукт є приладом для особистого використання і не може замінити професійне лікування та оздоровлення. Якщо у вас є будь-які запитання чи зауваження, будь ласка, зверніться за консультацією до використання.
 - Даний прилад розроблений як продукт для домашнього догляду за здоров'ям і не призначений для медичної допомоги чи іншого комерційного використання.
 - Перед використанням інструменту переконайтеся, що електродні подушечки щільно прилягають до шкіри.
 - Перед використанням приладу причешіть волосся та зніміть металеві аксесуари, такі як намиста та годинники.

Jeeback

ПРИМІТКА

- Даний прилад не є водонепроникним.
- Не використовуйте насадку для гарячого компресу на одному місці протягом тривалого часу (більше 30 хвилин), щоб уникнути опіків.
- Не використовуйте даний прилад на одній і тій самій частині протягом тривалого часу, інакше масажна частина може знежити та спричинити фізичний дискомфорт.
- У будь-якій з наступних ситуацій, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням приладом: Вагітні, хворі або зі слабким здоров'ям.
- Заборонено використовувати прилад в післяопераційний період відновлення.
- Заборонено використовувати прилад пацієнтам, які проходять курс лікування і відчувають себе ненормально. Пацієнтам з гіпертонічною хворобою, захворюваннями серця, атеросклерозом і церебральним тромбозом.
- Пацієнтам з високою температурою, зльокнісними пухлинами та остеопорозом. Пацієнтам з інфекційними захворюваннями.
- Пацієнтам з шкірними сенсорними порушеннями або аномаліями шкіри
- Даний прилад не може замінити будь-яке медичне лікування.
- Щоб уникнути небезпеки, тримайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Даний продукт не підходить для хворих людей та людей з обмеженими можливостями.

Комплектація:

- Масажер для шії-1
- Інструкція користувача-1
- Сумка-1
- Кабель для зарядки-1 (Type-C)
- Заспокійливий гель з алое, 30 г.-1

Jeeback

Знайомство з приладом



Використання приладу

Off(вимкн.): натисніть щоб увімкнути прилад.

On(увімкн.): утримуйте щоб вимкнути прилад.

On(увімкн.):прокручіть ролик вгору, щоб збільшити інтенсивність масажу та вниз-щоб зменшити інтенсивність.

Існує 10 рівнів інтенсивності.Прилад за замовчуванням працює на найнижчому рівні інтенсивності з вимкненим режимом прогрівання.

Натисніть ще раз щоб обрати рівень інтенсивності прогрівання.

В приладі встановлено 3 рівня режиму прогрівання:-38°C+1.5°C, 40°C+1.5°C,42C +1.5°C (Рівень за замовчуванням-низка температура).

On(увімкн.): натисніть щоб налаштувати режим масажу.

Режим 1: Автоматичний (режим за замовчуванням)



Регульована масажна голівка

Режим 3: Циркуляційний
Режим 4: Режим постукування



Електроди з обох сторін масажної голівки будуть нагріватись одночасно.

Jeeback

Час роботи приладу

Виріб оснащено функцією автоматичного вимкнення через 15 хвилин, щоб уникнути надмірного використання приладу. Якщо масажна голівка не використовується більше 80 секунд, виріб автоматично вимкнеться.

Технічні характеристики

Назва продукту: Масажер для шії	Розмір упаковки 249*168*68 мм
Акумулятор: 800 мАг	Вага нетто: 108 г
Модель: G6	Номинальна потужність: 5 Вт
Розмір виробу: 142*138*80 мм	Робоча температура : 0C-42°C 1.5° C
Вхід зарядки: DC 5V 1A	

Утилізація батареї



- Вийміть силікагель
- Від'єднайте з'єднувальний кабель між системою платого та акумулятором
- Безпечно вийміть акумулятор

Jeeback

Усунення несправностей

Проблема	Причина	Вирішення
Прилад не працює.	1.Низький заряд акумулятора 2.Прилад знаходиться на заряді.	1.Зарядіть прилад. Від'єднайте зарядний кабель. 2.Під'єднайте зарядний пристрій до іншого джерела живлення, наприклад до комп'ютера.
Білий світлодіод, який світиться про помилку зарядку приладу не світиться після 6 годин заряджання.	Низька напруга в мережі.	1.Зарядний кабель пошкоджено, замініть його на новий.
Прилад автоматично вимкнеться під час використання приладу	1.Автоматичне вимкнення через 15 хв. використання приладу 2.Низький Заряд акумулятора 3.Прилад не використовується більш ніж 1 хв.	1.Переапустіть прилад. 2.Зарядіть прилад. 3.Дотримуйтеся інструкцій з використання приладу.
Масаж непродуктивний	1.Низька інтенсивність масажу 2.Неправильне використання масажеру 3.Завдато суха шкіра	1.Збільшіть інтенсивність масажу 2.Використовуйте масажер правильно, так щоб масажна голівка торкалась шкіри. 3.Змочіть шкіру водою та знову почніть сеанс масажу.
Почервопіння шкіри та біль під час масажу.	1.Завдато довгий час масажу 2.Інтенсивність масажу завдато висока 3.Масажна голівка недостатньо щільно прилягає до шкіри 4.Завдато суха шкіра	1...Сеанс масажу не повинен перевищувати більше 30 хв. 2.Знизьте інтенсивність масажу 3.Використовуйте масажер правильно, так щоб масажна голівка торкалась шкіри. 4.Змочіть шкіру водою та знову почніть сеанс масажу.

Jeeback

Зберігання та очищення приладу

- Вимкніть виріб і вийміть зарядний кабель.
- Зберігайте масажер і всі аксесуари в упаковці або в безпечному, сухому та прохолодному місці.
- Не обмотуйте USB-кабель зарядки навколо масажера.
- Уникайте торкання масажером гострих предметів, щоб не подряпати та не проткнути поверхню тканини масажера.
- Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте масажер самостійно.

Очищення та технічне обслуговування

- Вимкніть виріб і вийміть зарядний кабель.
- Очистіть поверхню м'якою вологою тканиною.
- Ніколи не мийте виріб під проточною водою та іншими рідинами.
- Не використовуйте очисники, розчинники, бензин та інші хімічні речовини.
- Не зберігайте прилад у місцях з високою температурою, вологістю або під прямими сонячними променями.

Зарядка приладу

- Стандартний час використання масажера становить 15 хвилин. Він автоматично припинить свою дію після 15 хвилин масажу
- Коли масажер повністю заряджений, його можна використовувати безперервно близько 6 циклів (один цикл становить 15 хвилин), і його можна використовувати приблизно 7-8 годин після вимкнення режиму прогрівання.
- Коли заряд батареї низький (про низький заряд батареї буде вам повідомлено голосовим повідомленням, будь ласка, зарядіть прилад, після 2 повідомлень програма повідомлень автоматично вимкнеться), якщо ви знову увімкнете програму повідомлень, до того як зарядите прилад вона автоматично вимкнеться через 5 секунд).
- Обов'язково увімкніть масажер після заряджання.
- Коли заряд приладу завдато низький і масажер автоматично вимкнеться, під'єднайте його до джерела живлення для заряджання. Повна зарядка займає близько 2.5 годин. Світловий індикатор змінюється з червоного на білий, що вказує на те, що акумулятор повністю заряджено.

Охорона навколишнього середовища

Вбудована акумуляторна батарея може містити забруднювачі навколишнього середовища. Перш ніж викинути виріб, обов'язково вийміть батарею або відправте виріб до офіційно призначеного центру переробки для утилізації батареї. Ви також можете відправити продукт до відділу переробки, призначеного Компанією, і відділу технічного обслуговування утилізує та переробить батарею.

Shanghai Jeeback Smart Sci-Tech Co., Ltd. Адреса: кімната 101, будівля 3, 320 Donglan Road, Minhang District, Shanghai

71 mm