

01-用户手册-21国

版本:V1

技术要求:

1.成型尺寸:76*216mm

2.材质:60G书纸 骑马钉 过哑油;

3.裁切整齐无毛边;

4.双面印刷 PANTONE CoolGray 8C 色彩准确,无套印不准等现象;
尾页、首页的背面为空白页,不印刷;目录页背面为空白页,不印刷;

5.其他要求:产品需满足REACH法规及最新RoHS指令要求。

产品需满足欧可林《包装材料来料检验通用标准》。

6.公差:±1mm

7.标注单位mm

尾页、首页的背面为空白页，不印刷

(尾页+首页)=封面4P

Розумна зубна електрощітка Oclean Flow

Посібник користувача звукової електричної зубної щітки Oclean

Дякуємо, що використовуєте звукову електричну зубну щітку Oclean.

Важливе повідомлення щодо безпеки

При використанні виробу вперше виникає відчуття подразнення або оніміння, спричинене високочастотним коливанням щітки. Не хвилюйтеся, це нормально. Відчуття ослабне й поступово зникне протягом 7-14 днів.

Якщо ви тривалий час не користувалися зубною щіткою (відсутнє живлення акумулятора через енергоспоживання в режимі очікування), то під час повторного заряджання індикатор заряджання не загоряється одразу. Зачекайте 6-10 хвилин, щоб відновилося нормальне заряджання.


Якщо основна частина зубної щітки трохи нагрівається під час заряджання, це нормально. Якщо ви відчуваєте рукою, що зубна щітка гаряча, негайно припиніть заряджання й надішіть зубну щітку на перевірку до центру післяпродажного обслуговування Oclean.

У цьому виробі можна використовувати лише спеціальну насадку для звукової електричної зубної щітки Oclean. Oclean не несе відповідальності за будь-які наслідки, спричинені використанням інших неофіційних або недозволених насадок для щітки.

Виріб слід використовувати виключно для чищення зубів. Цей прилад є предметом особистої гігієни. Його не рекомендовано застосовувати декількома особам одночасно. Виріб слід використовувати лише в закритих приміщеннях. Не залишайте зубну щітку під палочим сонцем протягом тривалого часу. Його слід тримати в сухих, добре провітрюваних приміщеннях із кімнатною температурою.

Слід звернути увагу на тих, хто має такі умови чутливості ротової порожнини:

- особи, які пройшли пародонтальне хірургічне втручання або проходять лікування
особи з іншими симптомами в ротовій порожнині, зокрема ті, що мають нестабільні зубні протези або мають постійні сильні кровотечі з ясен.
Інші особи з проблемами чутливості ротової порожнини.
Цей виріб не рекомендується для використання особам із вищезазначеною групою станів, або перед використанням вони повинні проконсультуватися з професійним стоматологом.
Цей виріб не підходить для використання особами з обмеженими розумовими та фізичними можливостями, а також особами без відповідного досвіду (зокрема дітьми (0-12 років)).
Користування можливе тільки під наглядом опікувача.

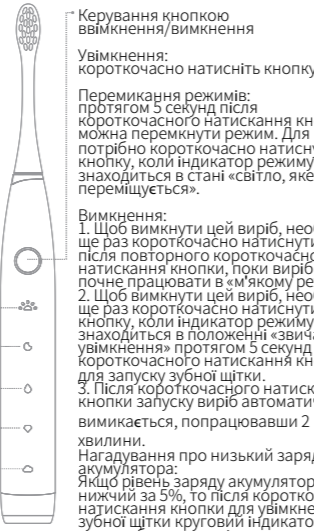

Керування кнопкою увімкнення/вимкнення

Увімкнення: короткочасно натисніть кнопку

Перемикання режимів: протягом 5 секунд після короткочасного натискання кнопки можна перемикати режим. Для цього потрібно короткочасно натиснути кнопку, коли індикатор режиму знаходиться в стані «Світло, яке переміщується».

Вимкнення: 1. Щоб вимкнути цей виріб, необхідно ще раз короткочасно натиснути кнопку після повторного короткочасного натискання кнопки, поки виріб не почне працювати в м'якому режимі. 2. Щоб вимкнути цей виріб, необхідно ще раз короткочасно натиснути кнопку, коли індикатор режиму знаходиться в положенні «Звичайне увімкнення» протягом 5 секунд після короткочасного натискання кнопки запуску зубної щітки. 3. Після короткочасного натискання кнопки запуску виріб автоматично вимикається, попрацювавши 2 хвилини.

Нагадування про низький заряд акумулятора. Якщо рівень заряду акумулятора нижчий за 5%, то після короткочасного натискання кнопки для увімкнення зубної щітки круговий індикатор кнопки буде мерехтити червоним світлом.

1

Інструкція з використання

Програма чищення за замовчуванням. Цей виріб має п'ять режимів чищення зубів: ранковий режим, нічний режим, режим чищення, режим відбілювання і М'який режим.

- Ранковий режим: створює малий тиск порівняно з нічним режимом. Як засіб для чищення й догляду, виріб здатен ефективно видаляти зубний наліт, який виникає під час сну.
Нічний режим: ретельно видаляє залишки їжі й зубний наліт на зубах під високим тиском.
Режим чищення: відповідає вимогам до повсякденного звичайного чищення. Має вищу інтенсивність порівняно з нічним режимом.
Режим відбілювання: ефективно очищає плями на зубах людей, які мають звичку палити або пити.
М'який режим: захищає здоров'я ясен, виконуючи основну функцію видалення зубного нальоту у людей, які страждають на алергію в ротовій порожнині.

Пряме заряджання через роз'єм Type-C. Відкрийте нижню кришку електричної зубної щітки, підключіть інтерфейс Type-C до порту в нижній частині зубної щітки, а потім підключіть один кінець інтерфейсу USB до джерела живлення. Круглий індикатор кнопки почне блимати білим світлом, що свідчить про заряджання зубної щітки.

Процес заряджання

Заряджання: круговий індикатор кнопки миготить білим світлом.

Перше використання. Користувач може заряджати зубну щітку з огляду на потребу в заряджанні акумулятора, щоб забезпечити нормальне використання цього виробу.

Процес застосування. Якщо рівень заряду акумулятора нижчий за 5%, то після короткочасного натискання кнопки для увімкнення зубної щітки круговий індикатор кнопки буде мерехтити червоним світлом.

Застереження!

Користувач не може самостійно замінювати акумулятор. Заміну акумулятора може здійснювати лише персонал у центрі обслуговування клієнтів, вказаному компанією Oclean. Некваліфікований персонал не має права самостійно розбирати виріб, інакше це автоматично вважатиметься відмовою користувача від гарантії.

Для заряджання зубної щітки Oclean використовуйте зарядний пристрій для мобільного телефона (5 В/1 А або 5 В/2 А). Для заряджання підходить зарядний пристрій для iPhone, планшетів тощо. Якщо струм заряджання менше 1 А, то заряджання може тривати довше. Якщо зарядний пристрій для мобільного телефону, яким ви заряджаєте зубну щітку, має напругу більше 5 В, це може спричинити пошкодження ланцюга заряджання.

Table with 2 columns: Name, Value. Technical characteristics of the product.

* Підтверджено 2 процедурами чищення на день по 2 хвилини кожна. ** Теоретично ємність акумулятора має допустиме відхилення ±50 мА·год. *** Рекомендовано використовувати стандартний блок живлення на 5 В/1 А.

Рекомендований спосіб чищення зубів



Повільно переміщуйте щітку під кутом 45° між щіткою та лінією ясен. Під час цього процесу немає необхідності рухати щіткою вгору та вниз.



Обережно тримайте рукоятку зубної щітки, повільно переміщуйте її круговими рухами та не докладайте надмірного тиску.



Після чищення ополосніть рот чистою водою.



Очищення корпусу зубної щітки та насадки. Після ополіскування водою з-під крана натігніть кришку і зачистіть її лопи високої насадки. Не тягніть за щетинки насадки.

Warning box with a triangle icon and text: НЕ розбирайте, НЕ бійте, НЕ зчавлюйте пристрій та не кидайте його у вогонь. НЕ використовуйте зубну щітку, якщо її акумулятор роздувся або розширився. НЕ допускайте впливу на акумулятор високої температури. НЕ використовуйте акумулятор, якщо він зазнав впливу вологи. Перш ніж викинути прилад, необхідно витягнути з нього акумулятор. Перед тим, як викинути акумулятор, необхідно вимкнути прилад. Акумулятор необхідно безпечно утилізувати.



Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання. Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого вивалення відходів. Будь-яка не відповідна виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Широ вітаємо Вас з прямою покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання. РОЗДІЛ 1. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. Даний гарантійний талон підтверджує автентичність та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку відсотрачання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2. УМОВИ ГАРАНТІЇ. Гарантія діє за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких даних фірми - продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора з зазначенням ПІВ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до функціонального використання. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо замовщик змарнував або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні. Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та експлуатації обладнання. Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням. Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доработок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.). Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликані невідповідністю державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, неспорядованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатувалося з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання зазначеного позначення в процесі виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідин, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія діє за умов проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <http://service.ctcs.com.ua/>

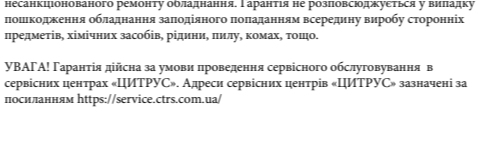


Table with 5 columns: МПП, Дата, Організація, Адреса, Представник, Штук МП. A table with 15 empty rows.

