

Jetpik JP300 Sonic Tooth Brush інструкція по застосуванню

Дякуємо вам за вибір продукції Jetpik для ідеальної гігієни зубів! Будь ласка, ознайомтеся з інструкцією перед використанням.

Перша зарядка: будь ласка, встановіть ручку на зарядний пристрій і підключіть USB-роз'єм до будь-якого джерела живлення USB (адаптер не входить до комплекту) не менше, ніж на 16 годин. (мал. 1).



Мал. 1

1. Управління кнопкою і світлодіодна індикація: зубна щітка Jetpik JP300 Sonic має 5 режимів очищення: сильне очищення, помірна чистка, режим для чутливих зубів, масаж ясен і відбілювання зубів. Для відображення використовуються кольори світлодіода, зазначені на малюнку. Одне натискання кнопки вмикає наступний режим, утримування її протягом 0,5 секунди - вимикає щітку. (див. Мал. 2)




Мал. 2

2. Індикація процесу зарядки і рівня заряду батареї: при установленні на зарядний пристрій світлодіод подає зелений повільний пульсуючий сигнал. Кожен раз, коли ви вимикаєте пристрій, світлодіод буде блимати, вказуючи рівень заряду акумулятора: зелений більше 3 разів: 80% або вище; зелений 2 рази - 50%; зелений 1 раз - 30% або менше. Помаранчевий сигнал блимає 8 разів: батарея розряджена, і ви повинні зарядити її перед використанням пристрою. (Див. мал. 3)



Мал. 3

3. Заміна насадки щітки: поверніть і витягніть (див. мал. 4), для того, щоб зняти насадку щітки і зробити зворотні маніпуляції для установки нової насадки.

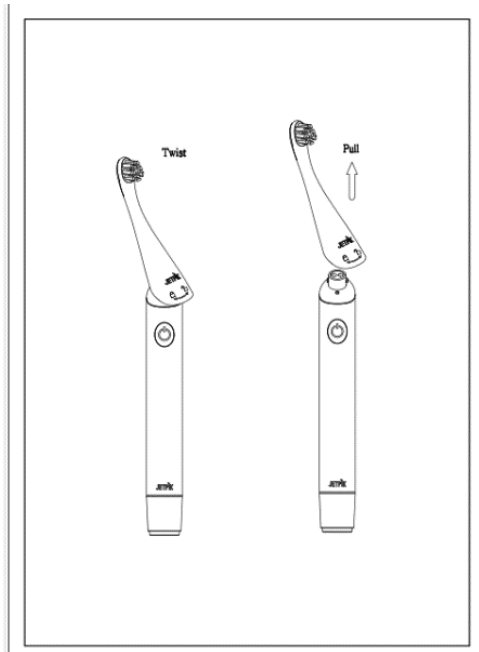

Мал. 4

4. Кейс для подорожей: щітка укомплектована компактным кейсом для подорожей (див. мал. 5), який вміщує дві насадки щітки, ручку і зарядний пристрій. Ви можете заряджати пристрій всередині кейса.



Мал. 5

Для більш детальної інформації перейдіть на сайт www.jetpik.com.ua