


BALANSE LITE

Smart scale

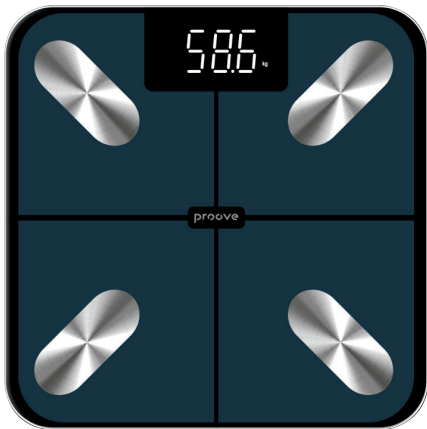

User Manual

prove

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал: ABS + загартоване скло

Максимальна вага: 180 кг

Точність вимірювання: ~0.1 кг

Батарея: 2xAAA

Підтримка: Bluetooth

LED-дисплей: 75x31 мм

Розмір: 280x280x22 мм

Колір: синій

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ:

1 вимірювання = 12 параметрів



Вага



Ожиріння



Показник базального метаболізму



Вісцеральний жир



Індекс маси тіла



Білок



Жир в організмі



Біологічний вік



Вода



Кісткова маса



М'язи



Жива маса тіла

1. Встановлення батарейки:

Зніміть кришку відсіку для батарей, вставте 2 батарейки формату AAA дотримуючись правильної полярності.

2. Встановлення додатка:

Проскануйте QR-код, зазначений вище, або завантажте застосунок «FitGo» з App Store (iOS) або Google Play (Android).

3. Реєстрація:

Увімкніть Bluetooth на мобільному пристрої, запустіть додаток «FitGo» і дотримуйтесь інструкцій у програмі.

Один обліковий запис на пристрої можуть використовувати до 8 користувачів.



iOS App



Android App



ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

1. Не використовуйте ваги, якщо у вас є імпланти в тілі, такі як кардіостимулятор, різного роду протези, металеві пластини або гвинти. Це може призвести до збою в роботі пристрою або неточного результату. У разі сумнівів з цього питання проконсультуйтеся з лікарем.
2. Встаньте рівно на поверхню терезів, не відриваючи ніг — інакше прилад покаже тільки вагу, без додаткових параметрів.
3. Переконайтеся, що ваги стоять на рівній, плоскій і твердій поверхні. Уникайте зважування на килимі або інших м'яких поверхнях.
4. Не допускайте, щоб ваші ноги або поверхня ваг була мокрою — це дуже травмонебезпечно!
5. Ваги не мають захисту від вологи, тому оберігайте їх від потрапляння води.
6. Очищайте ваги злегка вологою тканиною — не використовуйте хімічні/абразивні засоби для чищення.

7. Якщо не плануєте використовувати ваги довгий час, дістаньте з них батарейки.
8. Прилад призначений виключно для домашнього використання.
9. Використання ваг дітьми має проходити під чуйним наглядом батьків або старших.
10. При першому зважуванні показання ваги сильно різняться.

Електронні ваги будуть автоматично відрегульовані при першому використанні. Дані першого зважування включають вагу самого продукту, тому точні дані власника можна буде отримати при повторному зважуванні.

ПРАВИЛА ПЕРЕРОБКИ

Правила утилізації стабілізатора відрізняються від правил утилізації побутових відходів. Здайте пристрій до спеціалізованого центру збору й утилізації відходів або зверніться до продавця, у якого було придбано даний пристрій. За неправильну утилізацію відходів передбачені штрафи відповідно до чинного законодавства країни, у якій було придбано товар.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!