


ufesa

Фотоепілятор на основі технології IPL
(інтенсивного імпульсного світла)


DL3000 ELEGANCE COMPACT




Інструкція з використання

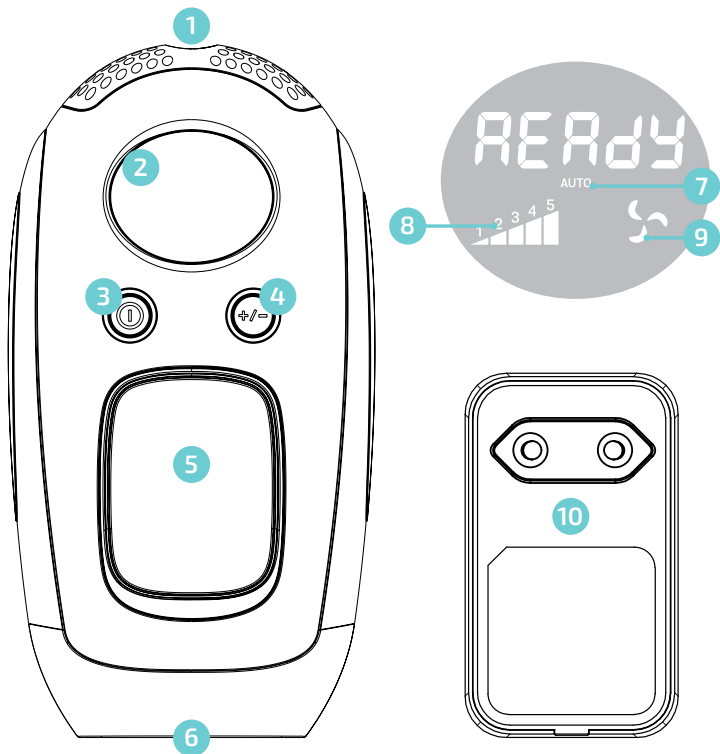

Сумісні типи шкіри

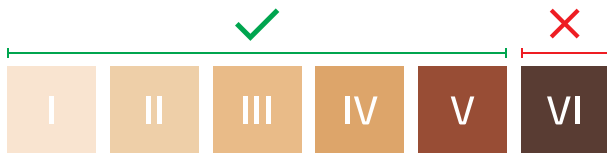

Сумісні типи шкіри

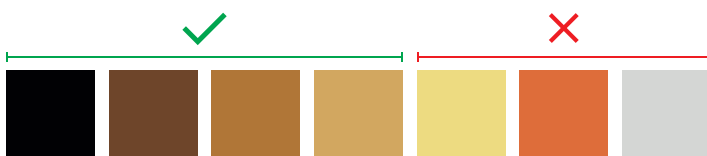

МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ UFESA ТА БАЖАЄМО,
ЩОБ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНУВАВ І ПРИНОСИВ
ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА НАСОЛОДУ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ СКОРИСТАТИСЯ НИМ ЗА ПОТРЕБИ.

ОПИС

1. Гніздо пристрою
2. РК-дисплей
3. Кнопка ввімкнення
4. Регулятор рівня потужності
5. Кнопка спалаху
6. Віконце для обробки
7. Автоматичний режим
8. Індикація 1-5 рівнів
9. Вентилятор
10. Адаптер

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Цим пристроєм не повинні користуватися особи віком до 18 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо безпечної експлуатації пристрою та не розуміють пов'язаних із цим небезпек.

Діти не повинні гратися з цим пристроєм.

Особи, які не досягли 18 років, не повинні виконувати очищення та догляд за пристроєм.

Цей пристрій призначений для експлуатації на висоті до 2000 м над рівнем моря.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не користуйтеся цим пристроєм поблизу ванн, душових кабін, раковин чи інших ємностей, що містять воду.



Цей символ означає, що пристрій не можна використовувати поблизу ванн, душових кабін, раковин чи інших ємностей з водою.

Цей пристрій можна експлуатувати лише з моделлю адаптера, що постачається разом із пристроєм, і живити його за дуже низької безпечної напруги, зазначеної на заводській табличці пристрою.

Шнур адаптера не підлягає заміні; якщо він пошкоджений, адаптер потрібно утилізувати.

Для догляду за шкірою людям з наведеними нижче особливостями не дозволено користуватися цим пристроєм:

- Порушення чутливості шкіри;
- Локальне та системне запалення, алергічний дерматит, екзема чи інші захворювання шкіри, застосування світлочутливих препаратів, алергія на косметику, одяг, метали тощо;
- Під час вагітності, менструації чи годування груддю;
- Якщо впродовж останніх двох тижнів ви приймали сонячні ванни, засмагали в солярії або користувалися косметичними засобами для засмагання без сонячних променів.

Заборонено застосовувати пристрій на:

- засмаглий шкірі;
- татуюваннях, темно-коричневих і чорних плямах (див. карту порівняння кольорів шкіри);
- гемангіомах;
- ділянках, де були проведені косметичні операції.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей пристрій призначений для користування в побутових умовах і за жодних обставин не допускається його застосування для комерційних чи промислових потреб.

Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи відповідає напруга в мережі напрузі, зазначеній на заводській табличці пристрою.

Не застосовуйте цей пристрій на вологому волоссі.

Не користуйтеся, не підключайте і не відключайте пристрій від електромережі мокрими руками чи ногами. Не використовуйте інші насадки крім тих, які входять у комплект поставки.

Під час користування пристроєм не допускається перекручування шнура живлення чи його намотування на пристрій.

Не тягніть за шнур живлення, щоб від'єднати його від розетки.

Очищення виконуйте відповідно до розділу «Догляд та очищення» цього посібника. Не застосовуйте цей пристрій на тваринах.

Під час роботи з пристроєм носіть захисні окуляри. Не можна дивитися безпосередньо у віконце спалаху або спрямовувати його прямо в очі.

Після проведення процедури на шкірі може з'явитися легке почервоніння; до цієї ділянки шкіри можна прикласти лід або почекати, поки вона охолоне самостійно.

Під час епіляції великих ділянок шкіри необхідно робити перерви в роботі пристрою. Не рекомендовано користуватися ним постійно без перерви і потрібно приділяти увагу догляду за пристроєм.

Під час очищення бруду або плям на склі освітлювальної лінзи не розпилюйте спирт безпосередньо на зону освітлювальної лінзи. Режим випромінювання необхідно представити докладніше: утримуйте кнопку випромінювання понад три секунди, щоб переключитися на ручний (режим одиночного спалаху підходить для точних зон, таких як пахви, зона бікіні та обличчя) або автоматичний режим (режим

безперервного спалаху дає можливість швидко і легко обробляти великі ділянки, такі як ноги та живіт).

Під час процедури не наносьте на шкіру желатинові косметичні засоби, такі як гель, щоб уникнути пошкодження пристрою.

Функція перемикач режимів: натисніть на перемикач режимів. Після 100 разів застосування витримайте 1 хвилину в режимі очікування перед наступним застосуванням. У режимі автоматичного випромінювання, для кращого ефекту від застосування, після 100 разів використання витримайте 1 хвилину в режимі очікування перед наступним застосуванням.

Намагайтеся не вживати світлочутливі продукти (наприклад, шпинат, ріпак, гірчицю тощо) під час процедури.

Регулюйте рівень потужності від слабкого до інтенсивного, щоб не завдати шкоди шкірі, оскільки чим вища потужність, тим кращий ефект.

У людей зі смуглою шкірою реакція шкіри може бути уповільненою. Не збільшуйте потужність, якщо миттєва реакція не є чітко вираженою.

Зволожуйте шкіру та захищайте її від сонячних променів після процедури.

Уникайте ультрафіолетового випромінювання під час користування пристроєм, будьте готові до затінення від сонця, уникайте комп'ютерного випромінювання та наносьте сонцезахисний крем для захисту.

Під час користування пристроєм не перекривайте отвори для входу повітря, вентиляції та охолодження, щоб уникнути проблем з розсіюванням тепла.

Якщо під час застосування на пластику навколо лінзи залишилося волосся або пляма, це може призвести до почорніння пластику або появи чорних плям, однак це не вплине на продуктивність і належне функціонування пристрою.

На пізній стадії зазначеного строку служби освітлювальної трубки, яка знаходиться в зоні освітлювальної лінзи, можуть спостерігатися різні ступені почорніння на внутрішній стінці трубки. Оскільки це нормальний процес старіння трубки, швидкість ослаблення енергії не перевищуватиме зазначеного діапазону впродовж строку служби, тож нею можна користуватися у звичайному режимі.

Цей пристрій не є водонепроникним.

Уникайте зберігання в місцях із сильними магнітними полями, високою вологістю, пилом або високою температурою.

Не вдаряйте пристрій та не стукайте по ньому.

Щоб уникнути будь-якої небезпеки, не відкривайте пристрій. Ремонт чи будь-які операції з пристроєм має право виконувати лише кваліфікований технічний персонал Офіційної служби технічної підтримки бренду.

У разі неправильного користування або неналежного поводження з пристроєм гарантія втрачає чинність.

B&B TRENDS S.L. відмовляється від будь-якої відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам чи предметам внаслідок недотримання цих застережень.

ЯК ПРАЦЮЄ ТЕХНОЛОГІЯ IPL - «ІНТЕНСИВНЕ ІМПУЛЬСНЕ СВІТЛО?»

Пристрої з технологією IPL випромінюють на шкіру імпульсне світло, яке поглинається меланіном і волоссяним фолікулом, розташованим під шкірою. Ця технологія підходить для кольорів шкіри за шкалою Фітцпатріка від 1 до 5 та ефективна лише для чорного, каштанового та темно-русявого волосся, оскільки світле волосся, таке як біле, сіре, руде та русаве, не поглинає достатньо світла (див. таблицю кольорів шкіри на мал. 2), і процедура не є ефективною. Тепло, що генерується, спрямоване на корінь і дестабілізує його, створюючи стан шоку для фолікула і зупиняючи його нормальний цикл росту - залишаючи гладку та м'яку шкіру на кілька місяців.

НАВІЩО ПОТРІБНО КІЛЬКА СЕАНСІВ?

Нормальний ріст волосся в організмі має три різні фази: 1-анаген або фаза росту, 2-катаген або перехідна фаза і 3-телоген або фаза спокою. Процедури епіляції ефективні лише під час фази анагену, і досягти постійного зменшення волосся можна лише під час цієї фази росту. Повний нормальний цикл росту волосся може тривати від 18 до 24 місяців. У зв'язку з цим потрібно кілька сеансів, оскільки не все волосся перебуває в одній фазі росту.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР

Ufesa Elegance Compact пропонує план зменшення волоссяного покриву:

- Початковий курс із 4-8 сеансів (1 сеанс на тиждень)
- Підтримка за 2 сеанси (1 сеанс кожні 15 днів)
- Підправляйте лише в тих місцях, де це потрібно

Результати можуть відрізнятися у різних людей залежно від ділянки тіла, кольору волосся та способу застосування пристрою.

СПОСІБ КОРИСТУВАННЯ

ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ ЕПІЛЯЦІЇ ШКІРИ

- Спочатку підготуйте шкіру і збрийте волосся за допомогою бритви. Це забезпечить поглинання світла. Переконайтеся, що на поверхні шкіри не залишилося волосся, щоб забезпечити довговічність віконця для обробки.
- Підключіть адаптер (10) до гнізда пристрою (1) та увімкніть його в розетку. Увімкніть пристрій, затиснувши кнопку увімкнення (3) на 3 секунди. Увімкнеться світлодіодний індикатор, і пристрій буде готовий до роботи.

ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ПРИСТРОЄМ

- Переконайтеся, що пристрій розміщено вертикально, а віконце для обробки (6) повністю прилягає до шкіри. Пристрій робитиме спалахи лише тоді, коли він повністю торкається шкіри.
- Натисніть кнопку спалаху (5), щоб розпочати процес епіляції. Не застосовуйте більше одного безперервного спалаху в одному місці. Віконце для обробки залишає тимчасові сліди натискання, щоб ви могли перевірити, які ділянки ви обробили.
- Проведіть тест на невеликій ділянці шкіри за 12 годин до застосування, щоб перевірити наявність побічних реакцій.
- Натисніть кнопку спалаху (5) ще раз, щоб вимкнути пристрій після завершення процедури. Цей пристрій автоматично вимикається через 10 хвилин, якщо не виконувати жодних дій.

РІЗНІ РЕЖИМИ ОБРОБКИ

Ви можете перемикатися між ручним і автоматичним режимами епіляції, утримуючи кнопку спалаху (5) натиснутою впродовж 3 секунд.

- Ручний режим «Click2Flash» підходить для невеликих або важкодоступних зон, таких як пахви, обличчя (тільки для жінок), лінія бікіні або вигнуті ділянки, такі як коліна. Для одиночного спалаху просто натисніть і відпустіть кнопку спалаху.
- Автоматичний режим «Glide2Flash» зручніший для великих ділянок, таких як ноги, руки, спина і груди. Пристрій буде автоматично робити спалахи кожні 1-3 секунди з різним рівнем потужності, а на РК-дисплеї (2) буде відображатися піктограма автоматичного режиму (7).

РІВНІ ПОТУЖНОСТІ

Рівень потужності безпосередньо пов'язаний з ефективністю процедури видалення волосся і визначає інтенсивність світла, яке фокусується на фолікулі.

- Коротким натисканням на регулятор рівня потужності (4) виберіть найбільш підходящий для вашої шкіри рівень потужності. Щоб не пошкодити шкіру, почніть з найнижчого рівня потужності 1 і поступово збільшуйте рівень інтенсивності, поки не досягнете найвищого рівня, на якому ви будете почуватися комфортно. Ви можете вибрати один рівень з 1 по 5 і в будь-який момент перевірити вибраний рівень на дисплеї (8).
- Ви досягнете кращого результату при вищих рівнях потужності. Ufesa Elegance Contrast взагалі не повинен спричиняти болісних відчуттів. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, негайно зменште рівень потужності.

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

Якщо Ви не маєте наміру користуватися пристроєм упродовж тривалого часу, відключіть його від мережі, щоб продовжити строк його служби. Очищуйте пристрій після кожної процедури. Протріть віконце для обробки чистою сухою ганчіркою.

Перед очищенням пристрою переконайтеся, що він відключений від мережі. Ніколи не застосовуйте хімічні засоби.

Перед зберіганням пристрій повинен охолонути.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ



Цей пристрій відповідає Європейській директиві 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (відпрацьоване електричне та електронне обладнання), що забезпечує правову базу, яка застосовується в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей пристрій у сміттєвий бак, натомість здайте його в найближчий до Вашого будинку центр приймання відпрацьованого електричного та електронного обладнання. Сподіваємося, що Ви залишитеся задоволені цим пристроєм.

ufesa

Імпортёр:

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,
Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

Дата виробництва: дивитись на упаковці