



Інструкція з експлуатації

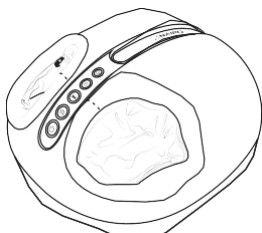

Масажер для ніг

Модель: MGF-F15

Вступ
Дякуємо за те, що придбали масажер NAIPO для ніг з функцією роликового масажу та з функцією масажу повітряними подушками. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник стосовно використання та догляду за масажером та зберігайте його в безпечному місці для застосування у майбутньому.

Вніст упаковки
1 x масажер для ніг
1 (пара) x устілки
1 x адаптер
1 x посібник користувача

Технічні характеристики виробу

Модель	MGF-F15
Торговельна назва	NAIPO BeeTe Foot Massager (Масажер для ніг)
Вхід	12В 3А
Споживання енергії	36 Вт
Таймер	10 хвилини / 15 хвилини / 20 хвилини


Важливі інструкції з техніки безпеки

- Будь ласка, не використовуйте цей виріб у вологому середовищі, щоб уникнути ураження електричним струмом та інших можливих нещасних випадків.
- Будь ласка, не використовуйте виріб у запляненому середовищі, інакше може статися несправність.
- Будь ласка, не піддавайте цей виріб впливу прямих сонячних променів.
- Будь ласка, не сідайте на масажер.
- Люди, які мають проблеми зі здоров'ям повинні проконсультуватися з лікарем перед використанням масажера.
- Необідній нагала з боку дорослих, якщо користувач - діти або люди зі зниканими здібностями.
- Вогні жінки не повинні користуватися цим виробом.
- Будь ласка, не використовуйте цей виріб менше ніж до сну.
- Будь ласка, пригніть використання масажера, якщо під час використання відчувається сильний біль або дискомфорт.
- Будь ласка, не використовуйте масажер, якщо він працює ненормально.
- Рекомендується, щоб час масажу не перевищував 20 хвилин за один раз.
- Особи, які чутливі до нагрівання, повинні бути обережні при користуванні приладом.

Запитання та відповіді

Проблема	Рішення
Масажер не працює. / Масажер зупиняється під час використання.	Будь ласка, перевірте, чи адаптер щільно підключений до джерела живлення. Будь ласка, перевірте, чи адаптер належним чином підключений до масажера. Пристрій автоматично вимикається після досягнення встановленого часу. Будь ласка, перезавантажте масажер. Будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.
Нагрівальний ефект не такий очікуваний.	Будь ласка, дочекайтеся 5 хвилин після активації функції підігріву (нагрівання).

Схема виробу



- Кнопка живлення
- Кнопка підігріву
- Кнопка інтенсивності
- Кнопка режиму

4. Кнопка Режиму

- Режим 1: роликовий масаж + масаж повітряними подушками (час масажу: роликовий масаж > масаж повітряними подушками / індикатор: синій)
- Режим 2: роликовий масаж + масаж повітряними подушками (час масажу: масаж повітряними подушками > роликовий масаж / індикатор: червоний)
- Режим 3: Масаж повітряними подушками (індикатор мерехтить між синім та червоним кольором по черзі)

5. Кнопка таймеру

- 10 хвилин: Коли виріб увімкнено, час роботи масажера за замовчуванням становить 10 хвилин (індикатор: синій).
- 15 хвилин: Натисніть кнопку, час роботи масажера буде 15 хвилин (індикатор: червоний).
- 20 хвилин: Натисніть кнопку знов, і час роботи масажера буде 20 хвилин (індикатор: фіолетовий).

Обслуговування виробу

- Будь ласка, перед чистченням від'єднайте виріб від джерела живлення.
- Будь ласка, протріть поверхню виробу м'якою вологою ганчіркою або губкою для чистчення.
- Будь ласка, не чистіть масажер корозійним миючим засобом.
- Устілки можна від'єднати для чистчення.
- Будь ласка, зберігайте цей виріб у прохолодному та сухому місці.

Утилізація і переробка

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:
Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття з метою запобігання можливій шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів.
Будь ласка, не виношайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Юридичні примітки

Весь наведений вище вніст не містить жодних заяв про лікування. Для діагностики та лікування захворювання необхідна допомога лікаря або терапевта. NAIPO не обіцяє, що продукт має якийсь лікувальний ефект.

Інформація про гарантію

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №
Щиро вітаємо Вас з придбанням продукту та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.
РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування

обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Коженна залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія діє за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чіткої печатки фірми – продавця, а також повної інформації про контактний інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до експлуатації/виконання робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо завдяцьє порушенням або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.
Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доработок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чистчення матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катастрофи і т.д.).
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікацій, кабельних мереж, некорисними коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводять до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.
Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба незалежного ремонту обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання завдяцьє попаданню всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідин, пилу, комак, тощо.

УВАГА! Гарантія діє за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДПОВІДЬ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№ПІП	Дата	Організація, Адреса	Прогнозовано	Планові МП
1.				
2.				
3.				