



Масажер для ніг
2 IN 1
FOOT & CALF MASSAGER

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Виробник: "Аукі Інтернешенел Лтд" (Aukey International Limited), № 102,
будинок P09, південне місто Китаю, місто Пінху, район Лунган, Шеньчжень,
Гуандун, КНР.
Веб-сайт: www.naipocare.com
Електронна пошта: wholesale@naipocare.com
Імпортер вказаний на упаковці.

Зроблено в КНР



Модель: MGF-K68

Дякуємо за придбання DAİRO MGF-K68 масажер для ніг та литок.
При нормальному догляді та правильному поводженні, він прослужить вам
багато років. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням
цього продукту.

Будь ласка, збережіть цей посібник для подальшого використання.

стор.	Зміст
2	Інструкції з техніки безпеки
4	Особливості виробу
5	Налаштування та експлуатація
6	Як користуватися виробом
8	Панель керування та експлуатація
10	Інструкції з очищення та обслуговування
11	Інструкції з усунення несправностей
12	Характеристики виробу
12	Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання
12	Юридичні примітки
13	Інформація про гарантію

Інструкції з техніки безпеки



Будь ласка, уважно прочитайте наведені нижче інструкції перед використанням масажного пристрою, щоб забезпечити його безперебійну роботу та оптимальну ефективність.

Будь ласка збережіть ці інструкції для подальшого використання!

- Пристрій відповідає визначеним технічним принципам і останнім нормам безпеки.
- Цей виріб НЕ є іграшкою. Необхідний ретельний нагляд при використанні цього приладу біля дітей та осіб з обмеженими можливостями. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Не дозволяйте користуватися цим виробом більше ніж одній людині одночасно.
- Пристрій ніколи не слід залишати без нагляду, коли він увімкнений в мережу.
- Ніколи не використовуйте інші джерела живлення, окрім стандартного побутового адаптера, що входить до комплекту постачання цього масажного пристрою.
- Будь-який можливий ремонт може бути виконаний лише уповноваженим на це спеціалізованим персоналом. Неправильне використання та несанкціонований ремонт **заборонені** з міркувань безпеки та призводять до втрати гарантії.
- Будь ласка, уникайте контакту пристрою з водою, високими температурами та прямими сонячними променями.
- Не пошкоджуйте, не обробляйте, не перегинайте, не тягніть сильно, не скручуйте і не зав'язуйте шнур живлення.
- Не використовуйте пошкоджені кабелі, вилки та розетки.
- Не використовуйте виріб, якщо шнур живлення пошкоджений.
- У разі несправності негайно відключіть пристрій від мережі.
- Неправильне використання виключає будь-яку відповідальність за пошкодження.
- Не використовуйте під час сну.
- Щоб уникнути надмірної стимуляції м'язів і нервів, рекомендована тривалість масажу не повинна перевищувати 15 хвилин за один раз.
- Не використовуйте цей продукт для лікування.
- Особи, нечутливі до тепла, повинні користуватися цим масажним пристроєм у супроводі здорової людини.
- Якщо під час використання ви відчули нездужання, будь ласка, негайно припиніть використання цього продукту і зверніться до лікаря.

Інструкції з техніки безпеки



Ми рекомендуємо проконсультуватися з лікарем перед використанням цього масажного пристрою особам, які страждають будь-яким з наведених нижче захворювань.

1. Ті, хто використовує електронні медичні апарати, імплантовані в тіло, наприклад, кардіостимулятор, слухові апарати тощо.
2. Ті, хто лікується у лікарів, особливо ті, хто відчуває дискомфорт.
3. Хворі на злоякісні пухлини, серцеві захворювання, гострі стани.
4. Вагітним жінкам та жінкам під час менструації.
5. З остеопорозом або переломом хребта.
6. Ті, хто страждає на шкірні захворювання, або ті, чия шкіра травмована.
7. Ті, у кого температура тіла перевищує 38 градусів (гарячкова фаза).

Недотримання наведених вище інструкцій може призвести до неправильного використання виробу і спричинити серйозні травми та опіки.

Особливості виробу

- Масажер для ніг 2 в 1 або пуф з підігрівом
- Шиацу, компресійний і розігріваючий масаж для стоп та литок
- 3 режими масажу
- 3 рівнями інтенсивності тиску
- 3 функціями швидкості розминання / вібрації
- 2 налаштування нагріву
- Знімні рукави для ніг, які можна прати



Налаштування та експлуатація

1. Будь ласка, поставте виріб на рівну підлогу.
2. Підключіть адаптер живлення до відповідного порту масажера для ніг.
3. Підключіть адаптер до електричної розетки (адаптер безпечний для використання як з напругою 110-120В, так і з напругою 220-240В).



Як користуватися виробом



Мал.1. Пуф з підігрівом



Мал.2. Масажер для стоп та литок

Варіант 1. Використовується як сидіння

- 1) Після увімкнення натисніть кнопку "Нагрівання", щоб увімкнути функцію підігріву для комфортного підігріву сидіння пуфика або підставки для ніг. Безперервно натискайте кнопку "Нагрівання", щоб вибрати низький/високий рівень нагрівання або вимкнути нагрівання.
- 2) Відключіть адаптер від мережі, використовуйте його як неелектричний пуфик, додаткове сидіння або підставку для ніг.

Варіант 2. Використовується як масажер для стоп і литок

- 1) Відкрийте виріб і використовуйте його як масажер для стоп і литок



Як користуватися виробом


- 2) Відрегулюйте опорну планку в нижній частині виробу під потрібним вам кутом масажу.
- 3) Будь ласка, оберіть стілець бажаної висоти та сядьте на нього, а потім поставте ноги на масажер.
- 4) Увімкніть масажний пристрій за допомогою панелі керування (див. інструкцію нижче)



Розширене опорну планку

• ПРИМІТКА: Не встановлюйте і не використовуйте пристрій у ванній кімнаті або подібних вологих приміщеннях.

Панель керування та експлуатація

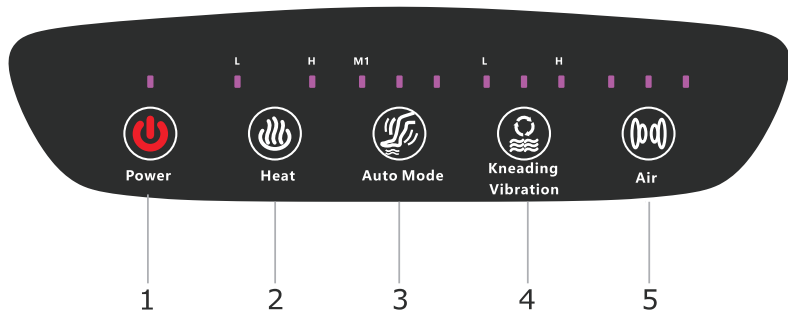

1. Кнопка живлення

Після увімкнення індикатор блимає і апарат знаходиться в режимі очікування, натисніть цю кнопку, щоб увімкнути масажер.

Коли прилад працює, натисніть цю кнопку, щоб вимкнути всі функції.

2. Кнопка підігріву

Після увімкнення натисніть цю кнопку, щоб увімкнути функцію нагріву, безперервно натискайте для перемикання між низьким/високим рівнем нагріву або вимкненням. Загориться відповідний індикатор L / H.

Панель керування та експлуатація

3. Кнопка автоматичного режиму

Після увімкнення натисніть кнопку, щоб активувати повноцінні режими інтелектуального масажу.

Безперервно натискайте кнопку для переходу від M1 до M3 або вимкнення.

Режим 1 - світиться індикатор M1 (Поеднання компресії, розминання шию та вібрації)

Режим 2 - світиться індикатор M2 (в основному працює компресійний масаж, розминання шию і вібрація працюють з перервами)

Режим 3 - світиться індикатор M3 (розминання та вібромасаж працюють в першу чергу, функція компресії працює з перервами)

4. Кнопка розминання та вібрації

Після увімкнення натисніть кнопку, щоб активувати функцію розминання та вібромасажу, безперервно натискайте її для проходження через налаштування низької, середньої, високої швидкості або вимкнення. Загориться відповідний індикатор.

5. Кнопка "Повітря"

Після увімкнення натисніть кнопку, щоб активувати функцію компресійного масажу, безперервно натискайте її для перемикання між низьким, середнім і високим рівнем інтенсивності або вимкненням. Загориться відповідний індикатор.

• Пристрій автоматично вимкнеться після закінчення таймеру 15 хвилин.

Увага!!!

- Після увімкнення живлення можна вільно налаштувати параметри компресії, нагрівання, розминання та вібрації.
- "Автоматичний режим", "Розминання/вібрація" та "Повітряна" компресія доступні лише тоді, коли апарат відкрито для використання в якості масажера для стоп та литок.
- Використовується як пух, доступний тільки підігрів.

Інструкції з очищення та обслуговування

- Перед чищенням переконайтеся, що джерело живлення вимкнене, а вилка витягнута з розетки.
- Забороняється занурювати весь виріб у воду або іншу рідину під час очищення.
- Використовуйте м'яку тканину, щоб протерти поверхню виробу та контролювати його працездатність.
- Використовуйте шматок тканини, змочений м'якими засобами, щоб протерти основний блок масажера для ніг, а потім використовуйте шматок сухої м'якої тканини, щоб витерти його.
- Не тягніть вилку живлення вологими руками.
- Не використовуйте засоби для миття, не розпилюйте воду або інші рідини на внутрішню частину виробу.
- Не використовуйте агресивні розчинники, такі як бензол, для чищення масажера для ніг, інакше колір оббивки потьмяніє, масажер для ніг потріскається або розмиється.
- Не прасуйте оббивку.
- Якщо виріб вологий, дайте йому висохнути природним шляхом, залиште до повного висихання.

Знімний чохол, що миється

- Зніміть чохол і виперіть у пральній машині або вручну. Дати висохнути.

Обслуговування

- Переконайтеся, що джерело живлення вимкнено, а вилка витягнута з розетки.
- Вимітайте пил. Зберігайте масажер для ніг чистим та подалі від вологих місць.
- Зберігайте масажер в сухому, прохолодному, недоступному для дітей місці.
- Уникайте контакту з гострими краями або гострими предметами, які можуть порізати або проколоти кришку / чохол масажера.

Інструкції з усунення несправностей

Несправність	Рішення
Чутно стукіт при роботі приладу	Це абсолютно нормальне явище, викликане роботою виробу. Це нормальний стан.
Масажний пристрій раптово вимикається	Пристрій можна використовувати протягом 15 хвилин. Функція автоматичного вимкнення активована. Продовжуйте використання натисканням кнопки "живлення" після відпочинку пристрою протягом 15 хвилин.
Масажний пристрій не запускається	Перевірте, чи не використовувався пристрій протягом 15 хвилин. Якщо так, дайте пристрою відпочити 15 хвилин, перш ніж продовжити. У теплу середовищі пристрою може знадобитися більше часу для охолодження.
	Перевірте, чи підключено адаптер до розетки.
	Перевірте, чи підключено вихід адаптера до входу живлення пристрою.

Характеристики виробу

Торговельна назва: 2 In 1 Foot & Calf Massager

Модель: MGF-K68

Вхідна напруга: AC 100-240В ~50/60Гц

Вихідна напруга: 24В=== 2.5А

Максимальна споживана потужність: 53Вт

Максимальний час таймеру: 15 хвилин

Не містить шкідливих речовин.

Умови зберігання та використання: Температура зберігання +5... +40 °С.



Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів.

Юридичні примітки

Весь наведений вище вміст не містить жодних заяв про лікування. Для діагностики та лікування захворювання необхідна допомога лікаря або терапевта. Наіро не обіцяє, що продукт має якийсь лікувальний ефект.

Інформація про гарантію

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань.

Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інстальатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням. Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrs.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис, МП
1.				
2.				