

材质: 105g
 铜版纸尺寸: 100 x
 140 mm 印刷:
 单黑双面印刷
 装订方式:
 骑马钉装订(封面内页
 留白)

Важливі інструкції з техніки безпеки
 Під час використання цього виробу завжди слід дотримуватися всіх інструкцій та основних запобіжних заходів, включені наступні:

НЕБЕЗПЕКА
 Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом:
 Завжди від'єднуйте цей виріб від електричної розетки одразу після використання та перед чищенням.

УВАГА
 Щоб уникнути ризику виникнення опіків, пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей:

- Масажер ніколи не повинен залишатися без нагляду під час підключення до мережі. Вимкніть його з розетки, коли він не використовується та перед тим, як надати чи зняти насадки.
- Не використовуйте його під ковдрою або подушкою. Це може призвести до надмірного нагрівання та спричинити пожежу, ураження електричним струмом або травмування людей.
- Не тисніть цей виріб за шнур живлення та не використовуйте шнур як рукоятку.
- Ніколи не експлуатуйте виріб із заблокованими ковзаними опорами. Сперте, щоб ковзани отвори були не заблоковані ворсом, волоссям тощо.
- Не кидайте і не вставляйте будь-які предмети в будь-який отвір.
- Не використовуйте масажер на відкритому повітрі.

- Не використовуйте масажер там, де використовується аерозольні (розпилювальні) речовини або де податися кисень.
- Щоб від'єднати масажер від джерела живлення, спочатку зніть всі насадки та вийвіть вилику з розетки.
- Необхідний ретельний нагляд, коли цим приладом користуються або знаходяться поруч діти чи інваліди, щоб бути впевненим, що вони не зловживають виробом.
- Тримайте шнур подалі від нагрітої поверхні, інакше це може спричинити серйозні опіки. Не використовуйте масажер на нечутливих ділянках шкіри або при логаному кровообігу.
- Прилад наск. поверхню, яка нагрівається. Люди, нечутливі до тепла, повинні бути обережними під час використання масажера.
- Постачання живлення до приладу повинно здійснюватися лише при надзвичайній безпечній напрузі, що відповідає маркуванню на приладі.
- Прилад можна використовувати лише з блоком живлення, що постачається разом з приладом.
- Цей прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) зі зниклими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або особами, які не мають досвіду та знань, якщо вони не отримали інструкції або вказані щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.


- Особливу увагу слід приділяти компонентам, найбільш схильним до зносу, і рекомендується негайно замінювати дефектні деталі та/або тримати обладнання поза використанням до ремонту.
- Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як описано в цьому посібнику.
- Ніколи не експлуатуйте цей прилад, якщо він має пошкоджений шнур або вилику, якщо він не працює належним чином, якщо він втече або був пошкоджений, або якщо він упав у воду. Поверніть прилад у сервісний центр для огляду та ремонту.

Цей пристрій не можна використовувати в кондитерській або в медичних цілях. Якщо у вас є проблема зі здоров'ям, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням масажера для шиї з технікою масажу шию та з функцією 3D-обертання.


Тільки для використання всередині приміщення!

Не використовуйте пристрій у приміщеннях з підвищеною вологістю (наприклад, під час прийняття ванни)

- Не прати!
- Не відраховувати в кімнату!
- Після використання виробу протягом 20 хвилин, відключіть 30 хвилин, а потім використовуйте знову.

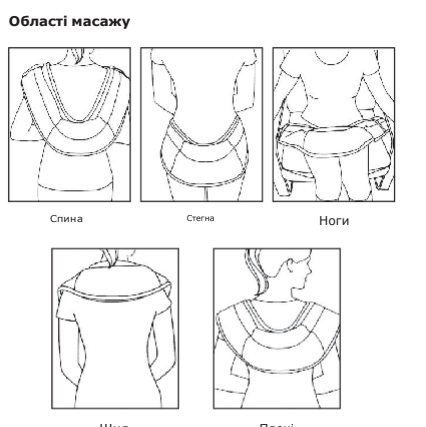

- 04 -

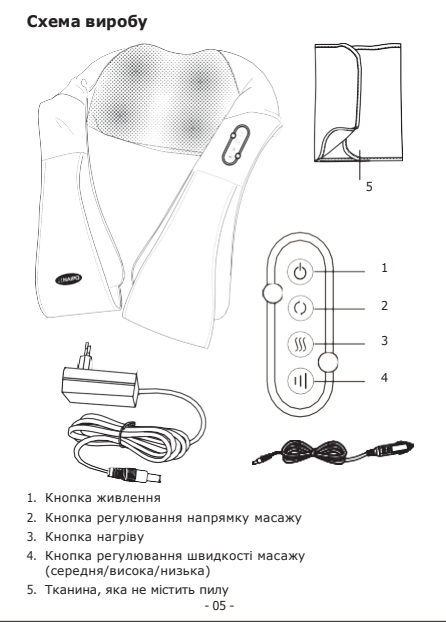

- 05 -

Інструкції з експлуатації виробу

- Підключіть адаптер живлення до електричної розетки.
- Натисніть кнопку живлення, щоб розпочати масаж. Функції нагріву та обертання також будуть активовані.
- Натисніть кнопку нагріву, щоб увімкнути функцію нагріву, або вимкніть цю функцію.
- Натисніть кнопку регулювання напрямку масажу, щоб змінити напрямок масажу.
- Натисніть кнопку регулювання швидкості масажу, щоб вибрати один з трьох рівнів швидкості масажу (низький/середній/високий).
- Натисніть кнопку живлення, щоб зупинити масаж в будь-який момент.

Чистка та обслуговування масажера

1. Чистка
 Перед процесом чищення, будь ласка, переконайтеся, що виріб вимкнено, а адаптер витягнуто з розетки.
 Для чищення виробу, будь ласка, використовуйте суху тканину.

2. Обслуговування
 Зберігайте масажер у чистоті та подаль від вологого середовища.

- 06 -

Увага
 Будь ласка, не використовуйте бензол, розчинювач та інші агресивні німолі засоби для чищення виробу, інакше поверхня масажера може вивщити.

Зв'яжіться з нами
 Якщо вам потрібна допомога чи підтримка, будь ласка, зв'яжіться з нами. Ми зробимо все можливе, щоб надати вам дієве рішення щодо вашого питання.

Технічні параметри
 Назва: Масажер для плечей та шиї
 Торговельна назва: NAIPO Shoulder & Neck Massager (with Shiatsu Kneading Massage and Heat)
 Модель: MS-1500S
 Номінальна напруга: 12 В=V
 Номінальний струм: 2.5 A
 Номінальна потужність: 30 Вт

Утилізація і переробка
 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інші побутові сміття з метою запобігання можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів.
 Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи.
 Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Юридичні примітки
 Весь наданий вище текст не містить жодних зав'язок про лікування. Для діагностики та лікування захворювання необхідна допомога лікаря або терапевта. NAIPO не обіцяє, що продукт має якийсь лікувальний ефект.

Інформація про гарантію
 ГАРАНТІЙНИЙ ТАБЛИЦІ № _____
 Щиро вітаємо Вас з придбанням цього продукту та впевнені, що ви отримаєте задоволення від його використання.
РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 Даний гарантійний табличка надає вам певні права та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають діяти у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Точніше обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відновитися від гарантійного ремонту у випадку надиртримання ним незаряджених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ
 Гарантія дієсна за умов наявності правильно заповненого гарантійного таблички з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, члени контактної фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталюатора з зазначенням ПІБ співробітника відповідального за проведення монтажу робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконалагоджувальних робіт. Після використання даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією до встановлення.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, незрозумілі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні. Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання. Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання дробних, а також використання деталей, комплектуючих, подібного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непередбачених сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізи (т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликані невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, електромагнітної, сейсмічної нерівності, нерівномірними коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводять до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компонентів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатувалося з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несамостійного ремонту обладнання. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного погляданням всередину виробу стороннім предметом, кімчатих засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дієсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦІТРИС». Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://getvivo.citri.com.ua/>

ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ СПОЖИВАЧІВ				
№пит	Дата	Проблема, запит	Рішення	Ім'я МП
1.				
2.				
3.				