





## Посібник Користувача

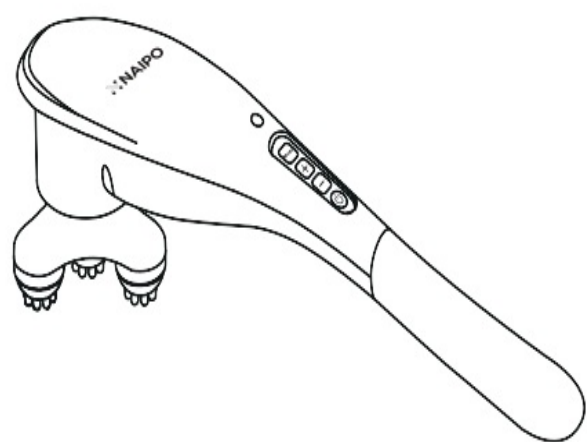

### Акумуляторний ручний перкусійний масажер Nairo

Модель: MGPC-5610

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.  
Веб: [www.naipocare.com](http://www.naipocare.com)  
Електронна адреса: [support@naipocare.com](mailto:support@naipocare.com)  
Адреса: г. Хуанан Electronic Trading Building P05  
Кімната 116, район Лонган, Шеньчжень, Китай



#### Вступ

Дякуємо за те, що придбали акумуляторний ручний перкусійний масажер NAIPO. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник стосовно використання та догляду за масажером та зберігайте його в безпечному місці для застосування у майбутньому. Якщо вам потрібно допомоги, зв'яжіться з нашою командою з підтримки клієнтів та повідомте номер моделі вашого виробу та номер замовлення на Amazon.

#### Вміст упаковки

- 1 x Ручний Масажер;
- 1 x Посібник користувача;
- 3 x змінні насадки;
- 1 x зарядний пристрій;
- 1 x Підставка.

#### Технічні характеристики виробу

Модель	MGPC-5610
Назва	Акумуляторний ручний перкусійний масажер NAIPO
Вихідна потужність	7 В
Споживання енергії	7 Вт
Таймер за замовчуванням	20 хвилин
Літій-іонний акумулятор	1800 mAh
Час зарядки	2,5 години
Час використання	1,5 години

#### Важливі інструкції з техніки безпеки

- Будь ласка, завжди витягуйте вилку з розетки під час чищення, обслуговування або переміщення виробу.
- Будь ласка, негайно вимкніть виріб, якщо сталося щось незвичайне.
- Будь ласка, не витягуйте та не вставляйте кабель живлення мокрими руками.
- Будь ласка, не використовуйте масажер у вологих місцях, таких як ванна кімната.

01-

- Будь ласка, не перекручуйте, не згинайте та ні на що не намотуйте кабель живлення, інакше це може спричинити пожежу.
- Будь ласка, регулярно очищайте адаптер від пилу.
- Будь ласка, уникайте тривалого перебування масажера на сонці.
- Будь ласка, не робіть ніякі модифікації у виробі.
- Будь ласка, не використовуйте масажер, коли ви спите.
- Будь ласка, не мийте масажер водою.
- При тривалому використанні масажер повинен знаходитись під наглядом.
- Дітям заборонено використовувати цей виріб, будь ласка, зберігайте його у надійному місці, яке недоступне для дітей.

#### Запитання та відповіді


Проблема	Рішення
Пристрій не працює	Перевірте, чи відбувається подача живлення. Будь ласка, вимкніть пристрій і знову підключіть вилку до електромережі.
Під час використання масажер перегрівається	Масажер перегрівається через тривале використання. Будь ласка, відключіть пристрій від електромережі, зочекайте не менше 50 хвилин, перш ніж увімкнути його знов.
Контролер працює, а масажер ні.	Натисніть кнопку живлення, щоб перезавантажити пристрій.
Пристрій раптово перестав працювати	Перевірте, чи відбувається подача живлення. Будь ласка, вимкніть пристрій і знову підключіть вилку до електромережі.

#### Схема виробу



-02-

#### Схема контролера

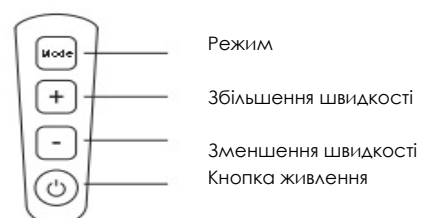

#### Інструкції з експлуатації виробу

##### Підготовка до експлуатації

- Виберіть потрібну насадку для масажу.
- Правильно підключіть адаптер та під'єднайте його до джерела живлення.

##### Інструкції щодо використання

##### Кнопка живлення

Натисніть кнопку живлення, щоб активувати функцію вібрації, натисніть її знову, щоб вимкнути пристрій.

##### [+]

Натисніть кнопку [+], щоб збільшити швидкість вібрації, доступно 5 рівнів швидкості.

##### [-]

Натисніть кнопку [-], щоб зменшити швидкість вібрації.

##### Кнопка Режиму

Натисніть кнопку режиму, щоб активувати програму автоматичного масажу, доступно 5 програм масажу (перехід від інтенсивного до повільного).

- 03 -

#### Зони для масажу



Спина

Плечі

Руки



Стена

Гомілки

Ноги

#### Гарантія та підтримка клієнтів

Якщо вам потрібна допомога щодо питань стосовно виробу, післяпродажного обслуговування або інших відповідних питань, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою або за адресою, що відповідає вашому регіону. Укажіть номер свого замовлення на Amazon та номер моделі виробу.

Вебсайт: [www.naipocare.com](http://www.naipocare.com)

Електронна пошта: [support@naipocare.com](mailto:support@naipocare.com)

\* Примітка: Вироби, придбані безпосередньо у NAIPO, отримують переваги від наших умов стосовно післяпродажного обслуговування. Якщо покупки здійснювались в інших пунктах продажу, ми рекомендуємо звертатися до них щодо питань гарантії.

Авторизовані сервісні центри :  
ЦЕТЕХНО <https://service.ceteh.com/> 093 170 20 33 /м. Київ, вул. Вербова, 17а/  
м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 21

-04-

-05-