




Посібник Користувача

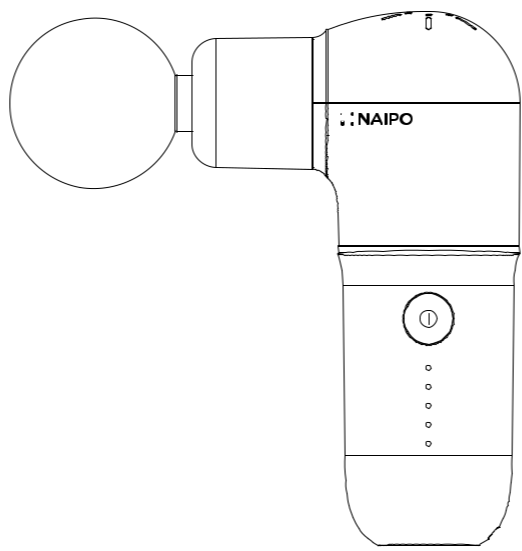

Масажер для м'язів глибокої дії

Модель: MGPC-002

Шеньчжень Bestvap Technology Co., Ltd.
 Веб: www.naipocare.com
 Електронна адреса: bestvap@naipocare.com
 Адреса: 503 Будівля ManTao 720 Minzhi
 Вулиця Мінжі, район Лонгтао,

Шеньчжень, Гуандун 518000



Зміст

Українська	01-07
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Вступ

Дякуємо за те, що придбали портативний масажер для м'язів глибокої дії NAIPO. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник стосовно використання та догляду за масажером та зберігайте його в безпечному місці для застосування у майбутньому. Якщо вам потрібно допомога, зв'яжіться з нашою командою з підтримки клієнтів.

Вміст упаковки

Назва	Кількість
Масажер для м'язів	1
Масажні головки	4
USB кабель	1
Посібник користувача	1
Шнур	1

Важливі інструкції з техніки безпеки

- Будь ласка, масажуйте лише ті місця, які не набрякли та не поранені. Не використовуйте масажер, коли ви відчуваєте біль або дискомфорт.
- Не використовуйте його на голові, кістках або твердих ділянках шкіри.
- Ми не рекомендуємо масажувати одну область протягом тривалого періоду часу. Негайно припиніть використання виробу, якщо під час використання ви відчуваєте біль або дискомфорт.
- Будь ласка, масажуйте лише чисті та сухі місця. Будь ласка, обережно переміщуйте та рухайте виріб по шкірі.
- Будь ласка, тримайте пальці, волосся або інші частини тіла подаль від вібраційної осі, оскільки вони можуть запалитися.
- Не використовуйте його в чутливих місцях або поблизу них, включаючи очі, зуби, протези грудної клітини, статеві органи або шлунки кімчівки.
- Не використовуйте його в місцях, де є тріщини.
- Якщо під час використання ви відчуваєте постійний біль, будь ласка, припиніть використання та негайно зверніться до лікаря.
- Виріб не є медичним приладом і не призначений для використання у медичних цілях.


- 01 -

- Будь ласка, перевірте головний двигун та адаптер живлення перед початком використання. Якщо якісь деталі пошкоджені, зверніться до виробника або до фахівця з приводу ремонту та заміни.


Застереження:

- Не використовуйте пристрій під час зарядки.
- Не вставляйте жодні предмети у вентиляційні отвори.
- Не опускайте виріб у воду та не капайте водою у вентиляційні отвори.
- Не кидайте масажер та не використовуйте його неналежним чином.
- Перед використанням переконайтеся, що пристрій, акумулятор та USB кабель працюють належним чином.
- Ні в якому разі не змінюйте виріб, не модернізуйте виріб.
- Не залишайте виріб без нагляду під час зарядки або експлуатації.
- Заряджайте пристрій TlANKi за допомогою оригінального USB кабелю.
- Не кладіть пристрій у камінь.
- Не використовуйте пристрій безперервно більше 1 години, щоб уникнути перегріву. Зупиніться на 30 хвилин, перш ніж повторно використовувати.

Деталі виробу

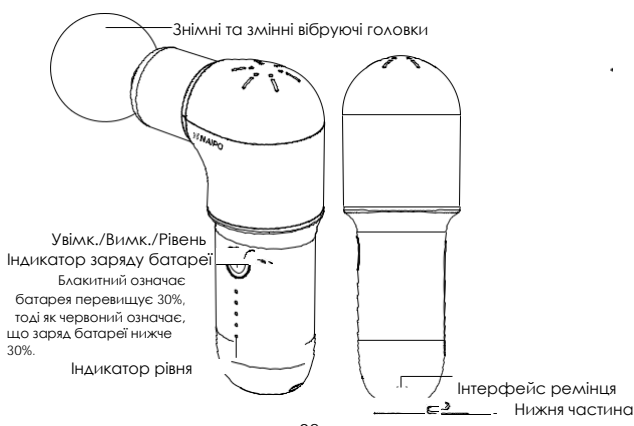

- 02 -

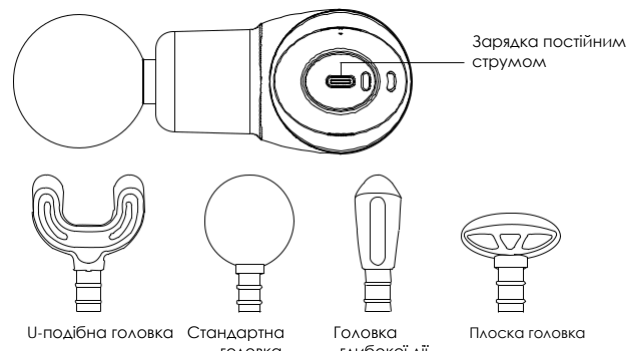

Інструкція із використання

Зарядка

- Індикатор живлення світліть зеленим кольором, коли їде зарядка, і припиняє світитись, коли пристрій повністю заряджений.
- Встановлення масажних головок: Коли пристрій вимкнено, з силою натисніть на масажну головку та вставте її у основний корпус. (Примітка: Під час встановлення U-подібної головки, вирівняйте пружку з пазом. Установка закінчена, коли пружка вставлена в паз. Якщо її не встановити на своє місце, існує ризик сповзання.)
- Зняття масажних головок: Коли пристрій вимкнено, витягніть головку. (Примітка: тягніть головку рівно, уникайте кругових рухів).
- Завантаження: Довго натискайте кнопку "1" на панелі протягом 2 секунд і починайте з Рівня 1.
- Перемикач рівнів: Швидко натисніть кнопку "2" на панелі, рівні можна змінювати між 0—5.
- Зупинення масажу: Коли пристрій перебуває на рівні між 1-5, довго натискайте кнопку "1" протягом 2 секунд, поки рівень не зміниться на рівень 0 (нульовий). І тоді масаж припиниться.
- Вимкнення пристрою: Коли пристрій знаходиться на нульовому рівні (0), довго натискайте кнопку "1" протягом 2 секунд, і тоді пристрій вимкнеться.
- Вибірайте рівень масажу відповідно до особистих потреб.

- 03 -

Обслуговування, Чистка та Зберігання

- Почистіть пристрій вологим рушником і витріть надлишки води сухою тканиною.
- Тривалий час невикористання: Помістіть пристрій в оригінальну упаковку та зберігайте в сухому середовищі. Заряджайте пристрій раз на місяць, щоб уникнути несправності акумулятора.
- Не намагайтеся розбирати або відкручувати деталі пристрою.
- Для того, щоб нова батарея досягла максимальних значень, будь ласка, повністю зарядьте і розрядьте пристрій принаймні три рази.

Інструкції до масажних насадок

U-подібна головка	
	Щільові області: Відновлення м'язів спини та хребту. Функції: Полещити роботу м'язових груп та відновити еластичність м'язів спини.
Плоска головка	
	Щільові області: М'язи, для відновлення яких потрібні сильні вприси. Функції: Розслаблення та масаж м'язів глибоких тканин.
Головка глибокої дії	
	Щільові області: Специфічні групи м'язів та глибокі травми м'язів / суглобів (щільспрямованій масаж). Функції: Зняти ригідність (нерухомість) м'язів і розтягнути вузли.
Стандартна головка	
	Щільові області: Все тіло, м'язові спазми (м'язи розслабляються). Функції: покращують відновлення м'язів тканин і зменшують м'язову хворобливість після тренувань.

Примітка: Наведені вище інструкції призначені лише для ознайомлення. Будь ласка, використовуйте насадки, виходячи зі стану вашого здоров'я або за рекомендаціями лікаря.

- 04 -

Усунення несправностей

Проблема	Причина	Рішення
Не працює.	Низький заряд батареї.	Повторно запустіть пристрій після того, як він буде повністю заряджений.
Пристрій зупиняється при зустрічі з опором.	Захисна установка була активована для запобігання перевантаження струмом.	Повторно підключіть живлення, щоб активувати пристрій.

Технічні характеристики виробу

Модель	MGPC-002
Назва	Масажер для м'язів глибокої дії
Відна потужність	DC 5В 2А
Підтримка заряду акумулятора (1 зарядка)	≥2 години
Час зарядки	≈3 години
Автоматична зупинка	≈10 хвилин
Ємність акумулятора	2500 mAh
Масажні зони	Все тіло

Якщо вам потрібна допомога щодо питань стосовно виробу, післяпродажного обслуговування або інших відповідей питань, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою, яка вказана на етикетці.

* Примітка: Вироби, придбані безпосередньо у NAIPO, отримують переваги від наших умов стосовно післяпродажного обслуговування. Якщо покупки здійснювались в інших пунктах продажу, ми рекомендуємо звертатися до них щодо питань гарантії.

- 05 -

Інформація про утилізацію електричного та електронного устаткування

Належна утилізація цього виробу. Це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване виведення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів. Для повернення відпрацьованого виробу використовуйте відповідні системи збору і повернення, або зв'яжіться із продавцем цього виробу. Він може забрати цей виріб для подальшої безпечної переробки.

Дата продажу	№
Найменування виробу	№
IMEI/SN	№
Підпис продавця/М.П.з	№
Найменування та адреса торговельної організації	№
ПБ/Підпис клієнта	№

Дата	Опис надійності	Зміст виконаних робіт, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломби/паролі
№	№	№	№	№
№	№	№	№	№
№	№	№	№	№
№	№	№	№	№

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів. Підпис та печатка виконавця
 Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів. Підпис та печатка виконавця
 Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів. Підпис та печатка виконавця
 Під час купівлі виробу переконатися просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень.

- 06 -

У випадку неправильного чи неповного заповнення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі подвійного та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних uszkodжень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комір. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклеїтки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклеїтки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

Обмежена гарантія:

- Гарантійний термін виробу становить 1 рік. Цей термін не розповсюджується на батарею та витратні матеріали.
- Гарантійний термін батареї та зарядного пристрою становить 6 місяців. Шини, гальмівні колодки, гальмівні системи та камери виробу відносяться до витратних матеріалів, гарантійний термін для яких становить 1 місяць.
- ремонт по гарантії проводиться у разі виявлення заводського браку. Механічні пошкодження пристрою та частин пристрою не є гарантійним випадком.
- Впродовж дії гарантійного терміну клієнту рекомендується кожні 6 місяців проводити технічне обслуговування пристрою у сервісному центрі. Технічне обслуговування не є гарантійним ремонтом. Надання технічного обслуговування є платною послугою. Причини відмови в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування:
 - Несправність, яка виникла через неправильне або агресивне використання пристрою.
 - Попадання вологи у пристрій.
 - Несправність, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не авторизованими особами.
 - Випадкові пошкодження або несправності, які виникли через недотримання умов зберігання.
 - Не відповідність інформації на документі, що підтверджує придбання гарантійного талону з параметрами продукту.
 - Пошкодження поверхонь виробу.
 - Розбирання виробу, не передбачене цим Керівництвом з експлуатації.
 - Пошкодження або несправності, які викликані поїздками під дощем або по калюжам.
- Адреси авторизованих сервісних центрів:
 - М. Дніпро, вул. Харківська, 3
 - М. Київ, вул. Вербова, 17А
 - М. Одеса, вул. Маралієвська, 1/20
 - М. Харків, вул. Пушкінська, 36

УВАГА! Гарантія діє за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦІТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦІТРУС» зазначені за посиланням <https://service.cts.com.ua/>