


Naipo

Посібник користувача

**Обертвий 3D масажер шиацу з
перезаряджаємою акумуляторною
батареєю**

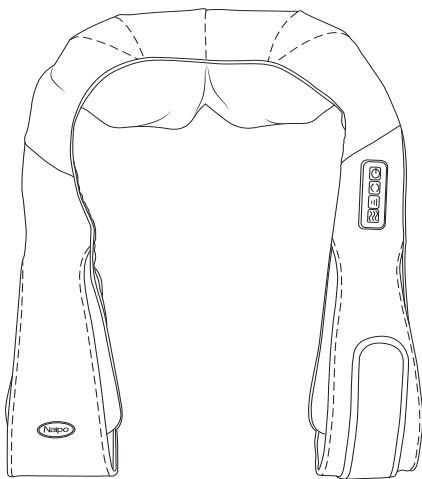

Модель MGS-321

Будь ласка, повністю зарядіть його перед першим використанням, оскільки акумулятор може не мати достатньо заряду після тривалого зберігання.

Важливо:

Будь ласка, зберігайте цей посібник належним чином для подальшого використання. Перед використанням цього приладу уважно прочитайте всі інструкції.

Інструкції з безпеки:

Будь ласка, дотримуйтеся основних інструкцій з техніки безпеки, наведених нижче, щоб зменшити небезпеку або ризик ураження електричним струмом, ударів або будь-яких інших травм.

- Завжди від'єднуйте прилад від електричної розетки одразу після використання та перед чищенням.
- Не тягніться до приладу, який впав у воду, негайно від'єднайте його від мережі.
- Не використовуйте його під час купання або душу.
- Не ставте та не зберігайте прилад у місці, де він може впасти у ванну чи раковину.
- Ніколи не використовуйте шпильки чи інші металеві застібки з цим приладом.
- Не використовуйте його у мокрому або вологому стані.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду, коли він увімкнений в розетку.

Від'єднайте вилку від розетки, коли нею не користуєтеся, а також перед тим, як встановлювати або знімати частини та насадки.

- Необхідний ретельний нагляд, коли цей прилад використовується дітьми, інвалідами або особами з обмеженими можливостями, або поблизу них.
- Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Використовуйте лише насадки, що постачаються разом із пристроєм.
- Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо він має пошкоджений шнур або вилку або не працює належним чином.
- Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.
- Ніколи не використовуйте його під час сну та не засинайте під час використання масажера.
- Ніколи не кидайте та не вставляйте предмети в будь-які отвори.
- Не працюйте під час використання аерозольних (розпиленних) продуктів або під час введення кисню.

- Не працюйте під ковдрою чи подушкою. Надмірне нагрівання може стати причиною пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.
- Не переносьте цей прилад за шнур живлення та не використовуйте шнур як ручку. • Щоб від'єднати, поверніть усі елементи керування в положення «ВИМК.», потім вийміть вилку з розетки.
- Цей прилад призначений лише для особистого, непрофесійного використання.
- Не використовуйте на вулиці.
- Не використовуйте на немовляті чи інваліді, а також на сплячій чи непритомній людині. • Не використовуйте його на чутливій шкірі або на тих, хто нечутливий до тепла. • Не тягніть і не скручуйте прилад за кабель, блок живлення або керування.

Застереження:

Перед початком роботи уважно прочитайте всі інструкції.

- Цей продукт не призначений для людей (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, якщо вони не знаходяться під наглядом дорослого, який відповідає за їх безпеку.
- Пристрій можна використовувати лише з акумуляторною батареєю або безпосередньо з адаптером живлення.
- Якщо у вас виникли ускладнення зі здоров'ям або стани, як зазначено нижче, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням: - ви вагітні. - у вас є серцевий миротворець, штучні суглоби або електронні імпланти. - Ви страждаєте на одне або декілька з наступних захворювань або скарг: порушення кровообігу, варикозне розширення вен, відкриті рани, синці, пошкодження шкіри, запалення вен.
- Не використовуйте цей пристрій для заміни лікування.
- Якщо ви відчуваєте будь-який біль або дискомфорт під час масажу, будь ласка, негайно припиніть і зверніться до лікаря.
- Ніколи не використовуйте цей продукт безпосередньо на опухлих або запалених ділянках або висипаннях на шкірі.
- Не використовуйте цей продукт перед сном. Масаж має збудливу дію і може затримати сон.
- Діти або інваліди повинні використовувати цей продукт під наглядом дорослих.

Технічні параметри:

Опис	Масажер шию для шиї та плечей з акумуляторною батареєю		
Модель	MGS-321	Потужність	25,6 Вт
Вхід	12,8В DC 2А		
Літій-Іонова батарея	11,1В 2000 мАг		



Кнопка живлення УВІМК/ВИМК



Напрямок обертання: проти годинникової стрілки / за годинниковою стрілкою



Швидкість масажу: середня / висока / низька



Кнопка нагріву: УВІМК/ВИМК

Інструкція з експлуатації

1. Використання під час зарядки

- Правильно підключіть адаптер живлення та масажер, а потім підключіть його до джерела живлення.
- Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій, і стандартним режимом буде середня швидкість обертання та функція нагріву. Під час використання літєва батарея не заряджається.
- Налаштуйте функції масажу, вибравши відповідно напрямок обертання, швидкість або нагрівання.
- Натисніть кнопку живлення ще раз, щоб вимкнути пристрій.


2. Використання його з акумулятором

- Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій, і режимом за замовчуванням є середня швидкість обертання та функція нагріву.
- Налаштуйте функції масажу, вибравши відповідно напрямок обертання, швидкість або нагрівання.
- Натисніть кнопку живлення ще раз, щоб вимкнути пристрій.


*Повністю заряджену літєву батарею можна безперервно використовувати протягом 6 періодів. (15 хв./за період) Будь ласка, повністю зарядіть його перед першим використанням, оскільки акумулятор може не мати достатньо заряду після тривалого зберігання. Під час заряджання світиться синє світло, а після повного згасне заряджений.

Зони масажу:


Цей масажер можна застосовувати для шиї, плечей, спини, талії, живота, стегон або ніг.

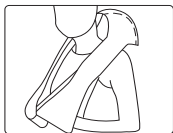


Спина та шія

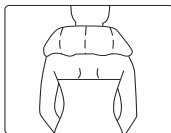


Шія

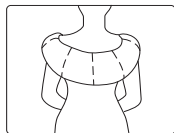

Спина

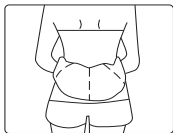

Талія

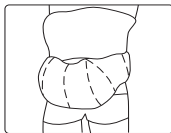

Живіт



Стегна

Очищення та обслуговування:

Перед очищенням переконайтеся, що виріб вимкнено. Цей прилад можна чистити лише чистим м'яким рушником. НІКОЛИ не використовуйте щітки, засоби для чищення, бензин, розчинники або спирт. Не перегинайте кабель.

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:



Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів.

Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи.

Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.



Увага! Пристрої, які оснащені літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталюатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусканалагоджувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctr.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				