



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Aukey International Limited

Веб: www.naipocare.com

Електронна адреса: wholesale@naipocare.com

Адреса: Кімната 601 6/F Комерційна будівля Тунг Хіп,
248 Des Voeux Road Central Sheung Wan, Гонконг

oCuddle

МАСАЖЕР ДЛЯ ПЛЕЧЕЙ

ЗРОБЛЕНО В КИТАЇ



[/naipocare](#) [/naipocare](#) [/naipocare](#)

ЗМІСТ |

Англійська

02

Німецька

10

Французька

18

Іспанська

26

Італійська

34



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Під час використання виробу слід дотримуватися всіх наступних інструкцій та основних запобіжних заходів



НЕБЕЗПЕКА

З метою зменшення ризику ураження електричним струмом, отримання опіків, пожежі, та інше.:

Завжди відключайте виріб від електричної мережі відразу після використання та перед чищенням.

Будь ласка, не розбирайте виріб самостійно.

УВАГА

Небезпека – необхідно зменшити ризик ураження електричним струмом:



Не використовуйте виріб під ковдрою або подушкою; забезпечуйте нормальне розсіювання (вихід назовні) тепла, щоб виріб не перегрівався, що може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм.



Ніколи не тягніть за шнур живлення для того, щоб вимкнути виріб.



Використовуйте цей виріб лише з блоком живлення, що постачається разом з виробом, і лише при напрузі, яка зазначена на етикетці.



Не використовуйте в місцях, де знаходяться їдкі речовини або там, де є кисень.



Не використовуйте в середовищі з високою вологістю (наприклад: у ванній кімнаті) або при високій температурі, яка може призвести до ураження електричним струмом або до інших небезпечних ситуацій.



Щоб уникнути високих температур, не залишайте виріб у машині.



Не використовуйте на відкритому повітрі.

Увага – Перед використанням виробу, уважно прочитайте всі інструкції:



Цей виріб є засобом для особистого масажу, а не медичним приладом, і його не можна використовувати для іншої комерційної діяльності.



Використовуйте цей виріб лише за призначенням, як описано в цьому посібнику.



Будь ласка, вимикайте живлення, коли не користуєтесь цим виробом.



Виріб ніколи не можна залишати без нагляду, коли він підключений до мережі. Вимкніть живлення, коли не користуєтесь цим виробом.



Виріб оснащений функцією нагрівання. Людям, нечутливим до тепла, слід бути обережними при використанні.



Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь, щоб не викликати серйозних опіків.

Будь ласка, звертайте особливу увагу на елементи, які можуть сильно зноситися, такі як масажні головки. Негайно замінійте зношені деталі та / або не користуйтеся виробом до запланованого ремонту.



Не використовуйте виріб, якщо у нього пошкоджений шнур або вилка, якщо він не працює належним чином, якщо він впав, пошкоджений або якщо він потрапив у воду.



Негайно припиніть використання виробу, якщо під час використання ви відчуваєте дискомфорт або біль.



Негайно припиніть використання виробу, якщо він працює неналежним чином.



Не використовуйте виріб під час руху та дотримуйтесь усіх правил дорожнього руху.



Цей виріб не призначений для дітей, і діти не повинні гратися з ним.

Якщо у вас є якісь із наведених нижче захворювань (станів), будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем перед початком використання цього виробу:



Люди з фізичними вадами.



Люди, які відстають у розвитку або мають психіатричні проблеми.



Люди з хронічними захворюваннями.



Вагітні жінки.



Жінки, у яких зараз менструація.




Люди з фізіологічними проблемами.



Люди з кардіостимуляторами або ті, які мають занепокоєння щодо свого здоров'я.

МАСАЖНІ ЗОНИ

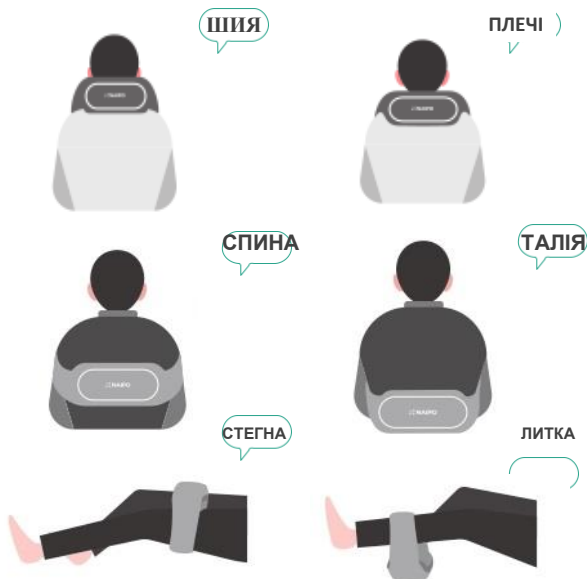

ВМІСТ УПАКОВКИ



Масажер



Сумка для перенесення



Настінний адаптер



Автомобільний адаптер

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Як використовувати виріб

- Підключіть настінний адаптер до електричної розетки (або автомобільний адаптер до автомобільного прикурювача).
- Правильно розташуйте виріб на бажаному місці.
- Натисніть кнопку живлення, щоб розпочати масаж. Функції нагрівання та роликів масажу також відразу ж будуть активовані. Масажер автоматично вимикається через 20 хвилин роботи.
- Натискайте кнопку нагрівання, щоб налаштувати між двома рівнями нагрівання (високий або низький або вимкнути цю функцію).
- Натисніть кнопку регулювання напрямку масажу, щоб змінити напрямок масажу.
- Натисніть кнопку регулювання швидкості масажу, щоб обрати один з трьох рівнів швидкості масажу: Низький / Середній / Високий.
- Натисніть кнопку живлення, щоб у будь-який час зупинити масаж.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА НАСТУПНЕ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ МАСАЖЕРУ:

- Використовуйте масажер 20 хвилин в день, або навіть менше.
- Не користуйтеся масажером під час сну.

ЧИСТКА ТА ЗБЕРІГАННЯ



Щоб уникнути пошкодження та зміни кольору, не можна чистити виріб їдким миючим засобом. Не пишіть на виробі та не пробивайте виріб гострими кінчиками ручок.



Перед чищенням переконайтеся, що виріб вимкнено та адаптер витягнуто з розетки. Почистіть виріб сухою ганчіркою.



Чохол з тканини на блискавці знімний. Його можна знімати та чистити.



Зберігайте виріб у чистоті та у безпечному місці. Необхідно зберігати виріб подалі від середовищ із високою вологістю або високою температурою.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Проблеми	Рішення
Масажер зупиняється під час використання	Автоматичний таймер вимкнувся Він зупинився через надлишковий тиск. Перед перезапуском дайте масажеру відпочити.
Виявляється, що масажер пошкоджено	Не продовжуйте користуватися масажером. Зверніться за допомогою до дилера або кваліфікованого персоналу з досвідом технічного обслуговування.

ПРИМІТКА: Не розбирайте та не вносите зміни у виріб самостійно. NAIPO не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим розбиранням або модифікацією виробу. Ця дія може бути небезпечна для користувача та / або зробити виріб непридатним для використання. Будь ласка, зверніться до служби обслуговування клієнтів NAIPO для отримання додаткової допомоги.

NAIPO не несе відповідальності за втрати, збитки або ремонт, понесені внаслідок, або через наступне:

- Гарантійний термін закінчився.
- Несанкціоновані дії, такі як: ремонт виробу, неправильне використання, зловживання, модифікація, розбирання, та інше.
- Навмисне або випадкове пошкодження.
- Пошкоджена внутрішня та зовнішня упаковка або відсутні аксесуари.
 - Шкода, завдана форс-мажорними обставинами.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС».

Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.citrus.ua/>

НАЗВА ВИРОБУ	oCuddle Масажер для плечей
МОДЕЛЬ	oCuddle-C
ВАГА НЕТТО	1.4кг
РОЗМІРИ	Д370*Ш150*В190мм
АКУМУЛЯТОР	2600mAh
ВХІДНА НАПРУГА	12В \rightarrow 2.5А
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ	30Втат