


ENCHEN


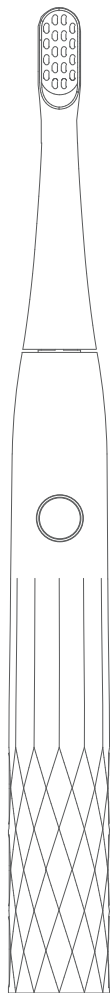


T501


ЕЛЕКТРИЧНА ЗУБНА ЩІТКА

Посібник користувача

Деталі та компоненти

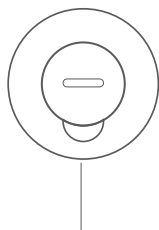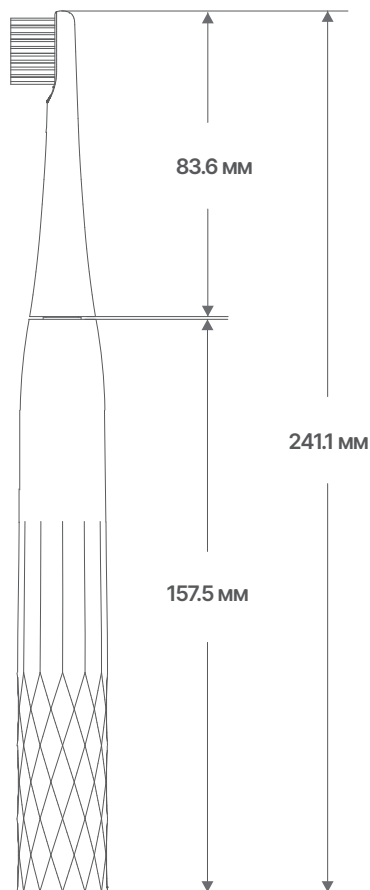

Індикатор зарядки

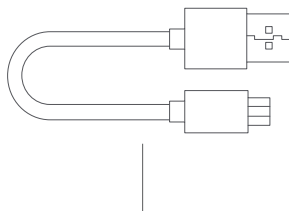

USB-кабель для зарядки

Особливості приладу

Три додаткові режими чищення

1. Режим очищення (щоденне чищення зубів)
2. Режим для чутливих зубів (м'яка вібрація для чутливих зубів)
3. Режим відбілювання (глибоке відбілювання зубів)

*Протягом 5 секунд після початку чищення натисніть на кнопку перемикання режимів, щоб змінити режим, або утримуйте кнопку, щоб вимкнути щітку.

Функція пам'яті

Щітка автоматично запам'ятовує останній використовуваний режим очищення.

30-секундна зміна зони чищення та 2-хвилинний розумний таймер

Вбудований таймер допомагає вам чистити зуби протягом схвалених стоматологом 2 хв, в той час як інтелектуальне нагадування робить паузу кожні 30 секунд, щоб нагадати вам про перехід до наступної зони порожнини рота.

30-секундна зміна зони чищення та 2-хвилинний розумний таймер

Ознайомлення з продуктом

Щиро дякуємо за вибір нашої продукції.
Для більш комфортного використання зубної щітки уважно прочитайте інструкцію користувача.

Технічна характеристики

Назва продукту	Електрична зубна щітка
Модель	T501
Номинальна потужність	1,2 Вт
Номинальна напруга	5 В =200 мА
Час зарядки	1,5 години
Клас водонепроникності	IPX 7
Тривалість тримання заряду акумулятора	30 днів за умови повної зарядки 1,5 години та використання щітки 2 рази на день



Комплектація

Пункт щітки	Основний пристрій	Головка для зубної щітки	Зарядний кабель	Інструкція
Кількість	1	1	1	1

Три режими очищення

Світловий диспей

Режим очищення-біле світло

Чутливий режим-синє світло

Режим відбілювання-зелене світло

Протягом 5 секунд після початку чищення натисніть на кнопку перемикання режимів, щоб змінити режим, Після цього щітка буде призупинятись на 0,5 секунди після кожних 30 секунд роботи, щоб нагадати вам про необхідність зміни зони очищення зубів і автоматично вимкнеться через 2 хвилини.

Перемикайте між режимами та обирайте саме той що вам підходить. Обирайте чутливий режим очищення для догляду за чутливими яснами, режим очищення-для щоденного догляду за зубами та яснами та режим відбілювання для бездоганної білизни ваших зубів.


Примітка

Завдяки функції пам'яті щітка автоматично запам'ятовує останній використовуваний режим очищення.


Особливі вказівки з техніки безпеки

- Під'єднуючи основний корпус до зарядного пристрою, спершу перевірте, чи напруга, зазначена на виробі, відповідає напрузі зарядного пристрою.
- Замінійте головку зубної щітки кожні три місяці. Якщо головка зубної щітки пошкоджена замініть її.
- Даний прилад не може використовуватися дітьми до 10 років а також особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження і їм не надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.
- Якщо ви проходите лікування ротової порожнини або маєте інші проблеми в ротовій порожнині, перед використанням цього продукту обов'язково проконсультуйтеся з вашим стоматологом.
- Даний прилад використовується лише для чищення зубів, не використовуйте його для інших цілей.
- Якщо після користування приладом ви відчуваєте погіршення самопочуття та інші симптоми, які не зникають, або у вас тривала кровотеча з ясен, припиніть його використання та зверніться до стоматолога.


Використання приладу

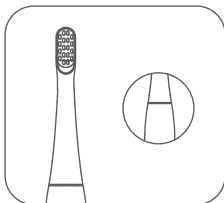

1. Обережно вставте головку зубної щітки у вихідний вал та зафіксуйте її.

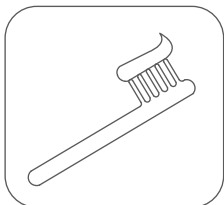


2. Перед використанням нанесіть відповідну кількість зубної пасти на головку щітки, змочіть її водою, а потім помістіть у рот.

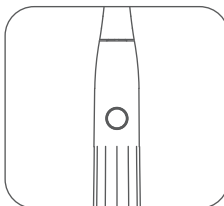

3. Увімкніть живлення та виберіть відповідний режим, відповідно до ваших потреб.



4. Розташуйте щітку в роті під кутом 45° до лінії ясен, та повільно нею рухайте.

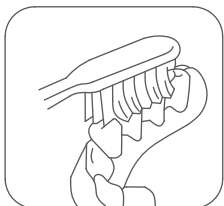

Тримайте основний корпус зубної щітки рукою та повільно рухайте нею в ротовій порожнині круговими рухами. Не натискайте та не тріть щіткою занадто сильно.



6. Після чищення прополощіть рот та головку зубної щітки водою.

Інструкції щодо зарядки

1. Перед першим використанням зарядіть основний корпус.
2. Якщо червоний світловий індикатор блимає під час першого використання, це означає що рівень заряду батареї менше 30%. Будь-ласка якомога швидше зарядіть щітку.
3. Якщо індикатор живлення постійно блимає, це означає що рівень заряду менше 10-30%. , негайно зарядіть прилад перед подальшим використанням.
4. Блимаючий зелений індикатор означає що прилад заряджається. Після повної зарядки індикатор буде світитись постійним зеленим світлом. Пристрій автоматично вимикається, якщо заряд батареї занадто низький.





Спосіб зарядки:

Для зарядки зубної щітки використовуйте USB-адаптер 5 В, або ви можете підключити її до USB-порту комп'ютера.

Примітка. Щоб захистити даний пристрій, уникайте заряджання за допомогою адаптера з напругою вище 5 В. Пристрій потрібно заряджати за допомогою адаптера 5 В або USB-порту комп'ютера.

Видалення батареї

- 1: Від'єднайте водонепроникне гумове кільце з основного корпусу.
- 2: Використовуйте інструмент, щоб відкрити пряжку основи через маленький круглий отвір і зніміть нижню кришку
- 3: Використовуйте інструмент, щоб відкрити пряжку фіксуючої рамки та вийняти фіксуючу рамку
- 4: Відріжте провідні пластини на обох кінцях батареї, вийміть батарею та утилізуйте її належним чином.

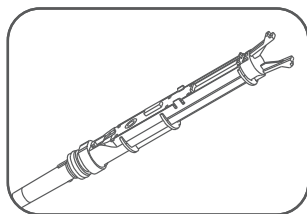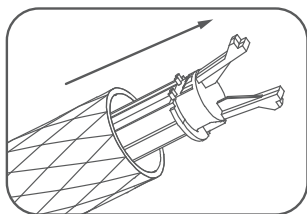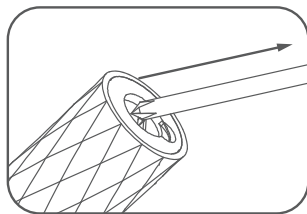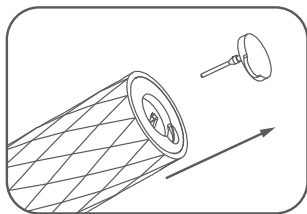

Охорона навколишнього середовища

Вбудована акумуляторна батарея може містити речовини, які можуть забруднювати довкілля. Перш ніж викинути машинку для стрижки волосся, батарею потрібно вийняти або відправити приладна офіційну станцію переробки для утилізації батареї. Ви також можете відправити прилад до спеціального відділу переробки компанії, в якій відділ технічного обслуговування розкладе та переробить акумулятор.

УВАГА. Не допускайте короткого замикання акумулятора в разі спалаху, викликаного згорянням акумулятора. Не кидайте акумулятор у вогонь у разі вибуху або виділення отруйних речовин.

Видалення батареї

Помилки	Можлива причина	Можливе вирішення
Знижена інтенсивність вібрації	<ol style="list-style-type: none">1. Зубна щітка сильно притискається до зубів2. Головка щітки надто глибоко притиснута до основного корпусу.	<ol style="list-style-type: none">1. Не тисніть сильно щіткою на зуби2. Зніміть головку щітки з ручки та знову надягніть її на вихідний вал. Слідкуйте за тим, щоб між головкою щітки та ручкою була достатня відстань
Знижена інтенсивність вібрації	<ol style="list-style-type: none">1. Основний корпус неправильно розміщений на зарядному пристрої, тому він не заряджається.2. Низький рівень заряду батареї	Розташуйте основний корпус вертикально так, щоб його нижня частина торкалася зарядного пристрою, і перевірте, чи світиться індикатор зарядки
Знижена інтенсивність вібрації	<ol style="list-style-type: none">1. Недостатній час заряджання пристрою.2. Термін служби батареї закінчився	<ol style="list-style-type: none">1. Будь ласка, зарядіть пристрій2. Замініть батарею в сервісному центрі нашої компанії

Гарантійний талон продукту

Назва виробу	Електрична зубна щітка	Гарантійний період
Модель виробу		Один рік з дати покупки
Дата придбання	Рік ,місяць, день	Рік ,місяць, день
Адреса клієнта		

Будь ласка, правильно заповніть дану інформацію та надішліть гарантійний талон разом з продуктом на ремонт до нашого сервісного центру. Ми надамо послуги з перевірки, ремонту або заміни приладу.

Примітка: Для отримання інформації щодо гарантії прочитайте відповідний розділ в цьому посібнику з користування.

ENCHEN

Виробник: AMEUDA TECHNOLOGY CO., Ltd.
Адреса: Кімната 2102, комплексна будівля, зона вільної торгівлі Цзянцзінь, № 88, проспект Майя, місто Луохуан, Район Цзянцзінь, місто Чунцін, Китай