

成品: 103*245mm

展开尺寸: 618*245mm 105g 铜板纸 四色正反面印刷 5折页 (共6页)

PECHAM TRAVEL

ПОРТАТИВНИЙ ІРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТІ РТА

Інструкція




Пожалуйста, оставьте свой отзыв



ЗДРАВСТВУЙ, УВАЖАЕМЫЙ НАШ ПОКУПАТЕЛЬ!


Спасибо, что вы выбрали нашу продукцию Pecham. Для нас очень важно Ваше мнение и обратная связь, так как наша команда вкладывает всю душу в качество товара, упаковку, дизайн и сервис. Будем Вам очень благодарны, если Вы оставите отзыв на том магазине, где вы покупали товар. В случае брака или поломки, Вы без стеснения можете обратиться к нам напрямую, и мы постараемся оперативно решить Ваш вопрос. Контакты указаны на инструкции и на упаковке.

Здоровья Вам и Вашей семье!

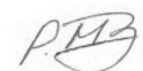

С Уважением
Директор Руслан Мартыненко

Описание ирригатора

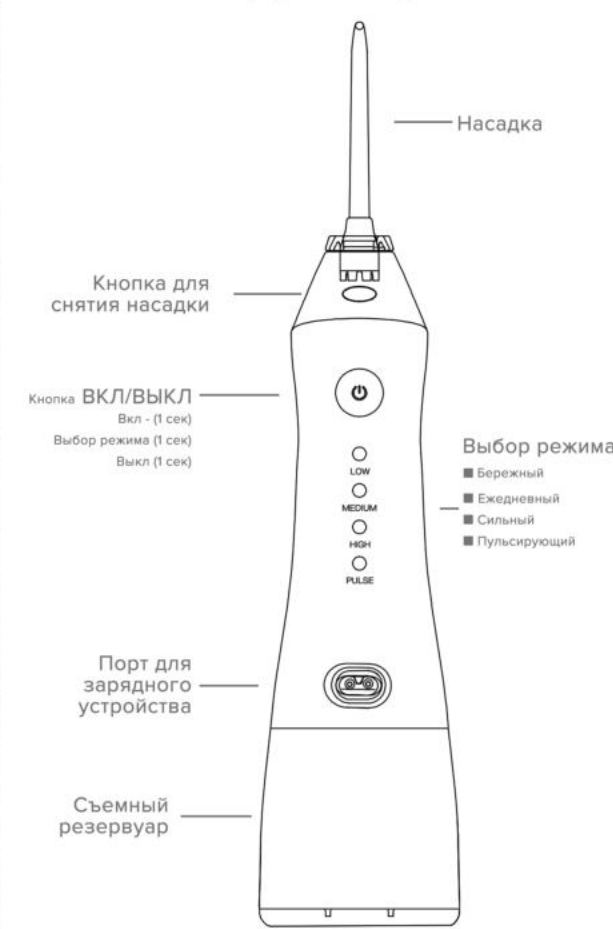


Особенности ирригатора

- При включении ирригатора и перехода на другой режим и выключения ирригатора необходимо нажать один раз кнопку
- Водонепроницаемый и матовый корпус.
- Взаимозаменяемые насадки.
- Высокочастотные водяные импульсы эффективно удаляют зубной налет и глубже очищают межзубные карманы!
- Функция USB заряда и светодиодный индикатор показывает выбранный вами режим)
- Зарядка автоматически прекратится при полном заряде.
- Когда батарея будет на низком уровне, устройство перейдет на экономичный режим)
- 4 режима работы: бережный, ежедневный, сильный, пульсирующий.

Подготовка к началу работы

- 1 Убедитесь, что с ирригатора полностью снята защитная пленка
- 2 Аккумулятор заряжен.
- 3 Зарядите ирригатор, подключив USB-кабель к зарядному порту, затем подключите другой конец к зарядному блоку (не входит в комплект), затем подключите к сетевой розетке)

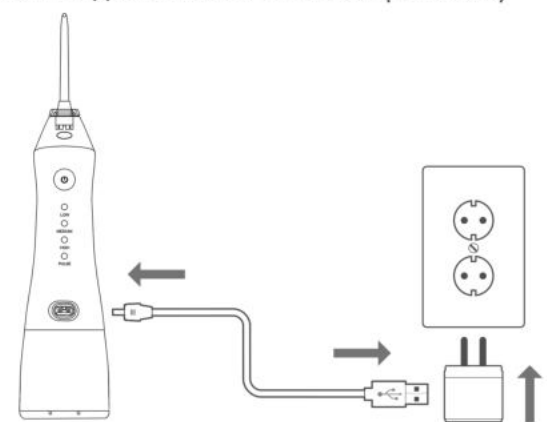

- 4 Когда устройство заряжается, индикаторы медленно мигают в порядке возрастания. Когда устройство полностью заряжено, все индикаторы начнут гореть постоянно, а затем автоматически выключаются через 20 минут.

Начало работы

- 1 Извлеките USB-кабель из ирригатора
- 2 Залейте воду в резервуар. Рекомендуем использовать теплую воду, ни в коем случае не наливайте кипяток или ледяную воду.
- 3 Перед началом работы, установите насадку на ирригатор
- 4 Расположите насадку близко к зубам, но не соприкасаясь с ними
- 5 Нажмите кнопку ВКЛ 1 сек, выберите режим наиболее подходящий для вас
Выбор режима - нажатие кнопки 1 сек.
Выключить ирригатор - задержать кнопку - 1 сек.
- 6 Перемещайте насадку ирригатора по полости рта, задерживаясь на одной стороне не более чем на 2 секунды
- 7 Во время использования ирригатора, давайте стекать воде, чтобы она не накапливалась в полости рта
- 8 Заканчивая процедуру, выключайте ирригатор, пока насадка у вас в ротовой полости, чтобы избежать разбрызгивание воды

Как установить/снять насадку

- 1 Вставьте насадку в отверстие пока не услышите щелчок
- 2 Чтобы сменить насадку надавите на кнопку для её снятия и поставьте другую
- 3 Когда насадки не используются, храните их в недоступном для детей месте



Ежедневный уход за ирригатором

- После использования ирригатора, протрите его сухим материалом и уберите в сухое и безопасное место)
- Рекомендуем вынимать насадку и ополаскивать ее теплой водой. Так же старайтесь протирать ватным диском место соединения ирригатора и насадки, чтобы избежать возникновения плесени
- Если плесень все-таки образовалась, используйте мыло и воду, чтобы очистить поверхность
- Если ирригатор не использовался долгое время, ополосните резервуар водой и дайте ему высохнуть, перед тем как установите его на ирригатор
- Не погружайте ирригатор полностью и на долго в воду, так как он не настільки водонепроницаем.

ВАЖНО!

Если из насадки не струится вода, а идет только воздух, вам нужно вытянуть воздух из насадки, после чего поток воды восстановится. Или вы можете вылить воду из резервуара и перевернуть ирригатор на 10-15 секунд, чтобы воздух из трубки вышел. Как показывает практика, первый способ намного эффективнее. Не переживайте, это обычная ситуация с портативными ирригаторами.

Насадки



- 1 1 шт. Классическая одноструйная насадка
- 2 1 шт. Пародонтальная насадка
- 3 1 шт. Ортодонтическая насадка
- 4 1 шт. Для удаления зубного налета
- 5 1 шт. Зубная щетка

Спецификация

Размер продукта: 81мм X 65,5 мм X 226,5 мм
 Вес Нетто продукта: 246 гр.
 Давление струи воды: 10 – 120 PSI
 Напряжение: 5V
 Мощность: 5W
 Способ зарядки: USB
 Вместимость резервуара: 220 мл
 Количество пульсаций: 1700 в минуту
 Аккумулятор: Li-ion 2000 мАч
 Время заряда: 3 часа
 Уровень шума: 72 дБ
 Водонепроницаемый корпус: IPX7
 Время непрерывного использования: 20 дней

Утилизация устройства

Ирригатор нельзя выбрасывать вместе с пищевыми отходами. Устройство необходимо доставить в соответствующее место для переработки электрооборудования.

Гарантия

Гарантия от производителя 1 год.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные падением, так же может аннулироваться, если вы будете использовать не оригинальный кабель, который идет в комплекте, для заряда ирригатора.

Для любых претензий по гарантии, пожалуйста, сохраняйте чек.

PECHAM TRAVEL

ПОРТАТИВНИЙ ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА

Інструкція



Будь ласка, залиште свій відгук



ДОБРИЙ ДЕНЬ, ШАНОВНИЙ НАШ ПОКУПЕЦЬ!


Дякуємо, що ви обрали нашу продукцію Pecham. Для нас дуже важлива Ваша думка та зворотній зв'язок, так як наша команда вкладає всю душу у якість товару, упаковку, дизайн та сервіс. Ми бажемо, щоб наш клієнт був повністю задоволений товаром та сервісом. Будемо вам щиро вдячні, якщо Ви залишите відгук на тому магазині, в якому Ви купували товар. У випадку браку або поломки, Ви не вагайтесь звертатися до нас напряму у сервісний центр Pecham «день в день», і ми вирішимо Ваше питання програм для. Контакти зазначені в кінці даної інструкції та на коробці.

Здоров'я Вам і Вашій родині!



З повагою
Директор Руслан Мартыненко

Опис іригатора

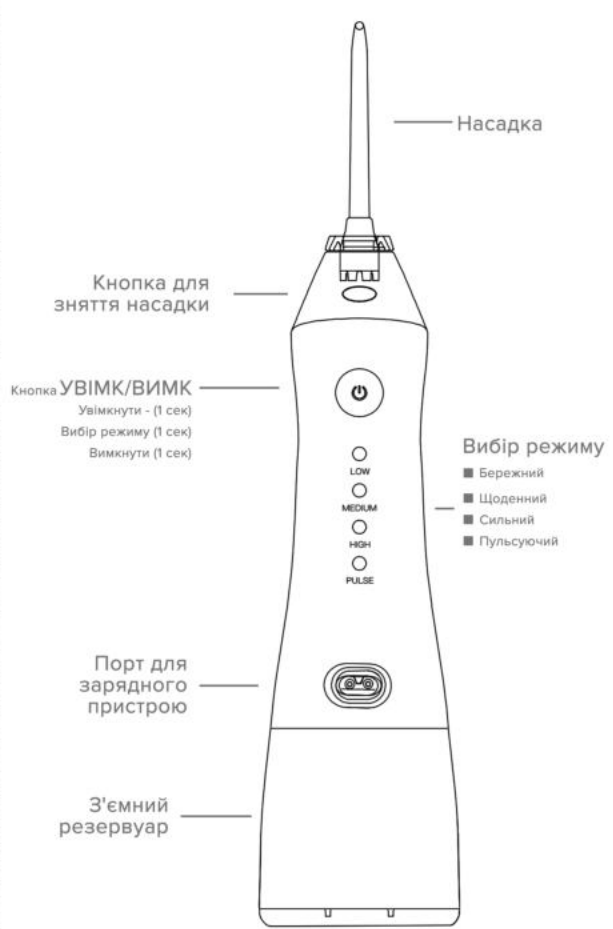


Особливості іригатора

- При включенні іригатора та переходу на інший режим та виключенні іригатора необхідно натиснути один раз кнопку
- Водонепроникний і матовий корпус.
- Взаємозамінні насадки.
- Високочастотні імпульси ефективно видаляють зубний наліт і глибоко очищають міжзубні кишені.
- Функция USB зарядки і світлодіодний індикатор показує вибраний вами режим.
- Зарядка автоматично припиниться при повному заряді.
- Коли батарея буде на низькому рівні, пристрій перейде на економний режим.
- 4 режими роботи: дбайливий, щоденний, сильний, пульсуючий.

Підготовка до початку роботи

- 1 Переконайтеся, що з іригатора повністю знята захисна плівка.
- 2 Аккумулятор заряджений.
- 3 Зарядіть іригатор, підключивши USB-кабель до зарядного порту, потім підключіть інший кінець до зарядного блоку (не входить в комплект), потім підключіть до розетки.

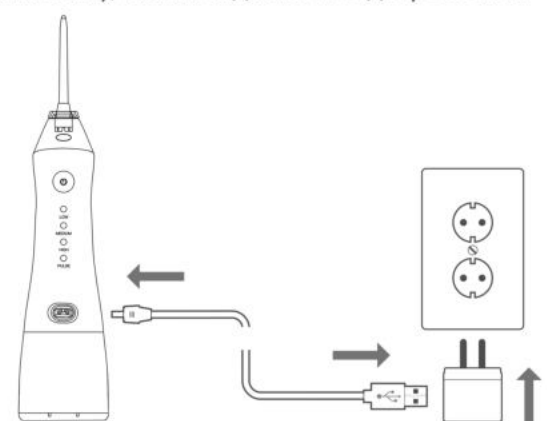

- 4 Коли пристрій заряджається, індикатори повільно блимають у ворязку зростання. Коли пристрій буде повністю заряджено, усі індикатори почнуть горіти постійно, а потім автоматично вимкнуться через 20 хвилин

Початок роботи

- 1 Вийміть USB-кабель з іригатора.
- 2 Залейте воду в резервуар. Рекомендуємо використовувати теплу воду, ні в якому разі не наливайте окріп або крижану воду.
- 3 Перед початком роботи, встановіть насадку на іригатор.
- 4 Розмістіть насадку близько до зубів, але не притискайте насадку до них.
- 5 Натисніть кнопку УВІМКНУТИ 1 сек, виберіть режим, що вам підходить найбільше.
Вибір режиму - натискання кнопки - 1 сек
Вимкнути іригатор - затримати кнопку 1 сек.
- 6 Переміщайте насадку іригатора вздовж лінії ясен.
- 7 Під час використання іригатора, давайте можливість воді вільно витікати, щоб вона не накопичувалася в порожнині рота.
- 8 Закінчуючи процедуру, вимкніть іригатор, поки насадка у вас в ротовій порожнині, щоб уникнути розбризкування води.

Як встановити / зняти насадку

- 1 Вставте насадку в отвір поки не почуєте клацання.
- 2 Щоб змінити насадку натисніть на кнопку управління насадками для її зняття і поставте іншу.
- 3 Коли насадки не використовуються, зберігайте їх в недоступному для дітей місці.



Щоденний догляд за іригатором

- Коли насадки не використовуються, зберігайте їх в недоступному для дітей місці.
- Рекомендуємо виймати насадку щоразу після процедури і обполіскувати її теплою водою. Так само намагайтеся протирати ватним диском місце з'єднання іригатора і насадки, щоб уникнути виникнення цвілі.
- Якщо цвіль все-таки утворилася, використовуйте мило і воду, щоб очистити поверхню.
- Якщо іригатор не використовувався тривалий час, обполосніть резервуар водою і дайте йому висохнути, перед тим як встановити його на іригатор.
- Не занурюйте іригатор повністю і на довго в воду, так як він не настільки водонепроникний.

ВАЖЛИВО!

Якщо з насадки НЕ струмє вода, а йде тільки повітря, вам потрібно втягнути повітря з насадки, після чого потік води відновиться. Або ви можете вилити воду з резервуара і перевернути іригатор на 10-15 секунд, щоб повітря з трубки вийшло. Як показує практика, перший спосіб набагато ефективніше. Не турбуйтеся, це звичайна ситуація з портативними іригаторами.

Насадки



- 1 1 шт. Класична одноструменева насадка
- 2 1 шт. Пародонтальна насадка
- 3 1 шт. Ортодонтична насадка
- 4 1 шт. Для видалення зубного нальоту
- 5 1 шт. Зубна щітка

Специфікація

Розмір продукту: 81мм X 65,5 мм X 226,5 мм
 Вага Нето продукту: 246 гр.
 Тиск води: 10 – 120 PSI
 Напруга: 5V
 Потужність: 5W
 Спосіб зарядки: USB
 Місткість резервуару: 220 мл
 Кількість пульсацій: 1700 в хвилину
 Аккумулятор: Li-ion 2000 мАч
 Час зарядки: 3 години
 Рівень шуму: 72 дБ
 Водонепроникний корпус: IPX7
 Час безперервного використання: 20 днів

Утилізація пристрою

Іригатор слід утилізувати окремо від харчових відходів. Пристрій необхідно доставити в відповідний пункт утилізації електрообладнання.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантія на товар 12 місяців

Дякуємо, що обрали іригатор Pecham Travel. Всі іригатори та насадки продезинфіковані. Всі товари Pecham були протестовані та успішно отримали декларацію про відповідність. Товари відповідають вимогам технічних регламентів.

Звернення у сервісний центр

Дата звернення _____ ФІО _____ Підпис _____

У випадку, якщо прилад вийшов з ладу, будь ласка зверніться до нашого сервісного центру «День В День» і ми вирішимо Ваше питання протягом дня.

- Для цього потрібно зробити наступні дії:
1. Зарядити іригатор, включити та виключити без підключення до мережі
 2. Зняти коротке відео: (1-2 хвилини) на якому повинно бути відображено:
 - Яка саме у Вас поломка приладу серійний номер
 - На зворотній стороні приладу показати дані гарантійного талона
 3. Це відео потрібно надіслати на Viber за номером: 067 320 31 08



Вироблено в КНР
Ексклюзивний представник в Україні ТОВ «РУНГА»
Вул. Вікентія Хвойки 21, БЦ «Веста», офіс 1307 м.Київ, Україна, 04655

- www.pecham.ua
- pecham.ua
- pechamukraine
- Офіс тел. 050 732 67 53
- Сервісний центр тел. 067 320 31 08
- info@pecham.ua