

Інструкція з експлуатації

Масажер Naipo Deep Muscle Massager



01. ВСТУП

Дякуємо, що придбали масажер Nairo Deep Muscle Massager. Цей продукт підходить для фізичного масажу до або після тренування. Він може зменшити жорсткість м'язів, зменшити біль у м'язах, підвищити кровообіг, зняти втому та сприяти відновленню м'язів. Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію, щоб забезпечити правильну роботу. Будь ласка, збережіть цей посібник для подальшого використання.

НЕБЕЗПЕКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Увага - уважно прочитайте всі інструкції перед використанням продукту. Недотримання попереджень та інструкцій

A) Безпечне середовище для масажу

1. Не використовуйте Nairo Deep Muscle Massager у потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад навколо легкозаймистих рідин, газів або пилу.
2. Під час роботи тримайте подаль від дітей. Будь-яке відволікання може призвести до втрати контролю над собою.

B) Особиста безпека

1. Не використовуйте масажер, коли ви втомилася або під впливом наркотиків або алкоголю. Якщо ви недбало користуєтесь масажним обладнанням, це може призвести до травми.
2. Завжди підтримуйте належний баланс тіла, щоб краще контролювати масажне обладнання в несподіваних ситуаціях.

УВАГА - УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ:

01. Не використовуйте цей продукт на голові або інших кісткових частинах тіла. Будь ласка, використовуйте тільки на м'яких частинах тіла. Не рекомендується використовувати на ділянках з меншим покриттям м'язів.
 02. Продукт не може замінити лікування. Якщо у вас фізичний біль, ви отримуєте медичне лікування або використовуєте інші медичні пристрої, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту.
 03. Щоб уникнути защемлення, тримайте пальці та волосся подаль від задньої частини робочої масажної головки
 04. Не ждайте вирибу у воду. Якщо вирибу впаде у воду, відправете його на перевірку.
 05. Тримайте цей вирибу подаль від вогню
 06. Ні в якому разі не розбирайте цей вирибу
 07. Будь ласка, вимніть живлення, коли вирибу не використовується.
 08. Не користуйтеся виробом за кермом, дотримуйтеся усіх правил водіння, щоб забезпечити безпеку
 09. Цим приладом можуть користуватися люди зі зменшеними фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з відсутністю досвіду та знань, лише якщо вони перебувають під наглядом чи інструктажем щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з пристроєм. Діти не повинні виконувати чищення та обслуговування користувача без нагляду.
 10. Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Не використовуйте насадки, не рекомендовані виробником. Використовуйте цей вирибу лише з наданим блоком живлення та лише з напругою, зазначеною на етикетці
- Якщо масажна головка не встановлена, не торкайтеся цієї частини, щоб уникнути защемлення. Встановлюючи масажну головку для запуску пристрою, не торкайтеся цієї частини, щоб уникнути защемлення.

НЕ РЕКОМЕНДУЮТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОДУКТ

Якщо у вас є будь-які з наступних умов, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту:


1. Люди, які вагітні;
2. Люди з кардіостимуляторами або занепокоєні про своє здоров'я;
3. Люди з фізичними вадами;
4. Люди, які нещодавно перенесли операції.

Ці умови не означають, що ви не можете використовувати продукт для вправ, але ми рекомендуємо проконсультуватися з лікарем. Практичний досвід показав, що в багатьох випадках додавання вібраційного тренування до плану лікування також може бути ефективним методом лікування. Це необхідно робити під порадою або наглядом лікаря, експерта або фізіотерапевта.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ МАСАЖУ ПЛОЩА



НЕ МАСАЖУЙТЕ ЦІ ОБЛАСТІ

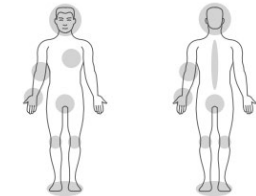

Комплектація: Масажер, 5 масажних головок, Адаптер, Керівництво користувача



УСТАНОВКА МАСАЖНОЇ ГОЛОВКИ

Прикріпіть бажану масажну головку.

МАСАЖ

Вимніть

Увімніть перемикач «живлення», засвітиться індикатор живлення

Почніть масаж

Натисніть кнопку запуску, щоб почати.

Натисніть кнопку, щоб відрегулювати швидкість від рівня 1 - 5.

Зупинити масаж.

Натисніть і утримуйте кнопку «Пуск» протягом 2 секунд.

Вимніть

Вимніть вимикач «Power», індикатор живлення загориться

вийти.

Продукт має 15-хвилинне автоматичне відключення

функція таймера.

ЗАРЯДКА

Підключіть до джерела живлення за допомогою адаптера до акумулятора, повністю зарядити, займає близько 6 годин.

Для першого використання рекомендується повна зарядка.

Індикатори зарядки

1. Якщо індикатор останнього зарядження завжди світиться, це означає, що батарея розряджена
 2. Під час зарядження індикатор блимає білим. Коли акумулятор заповнений, він показує 5 білих індикаторів
- УВАГА: НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ ПІД ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ.

ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Не перевищуйте рекомендоване щоденне використання 30 хвилин на день.

Переконайтеся, що вирибу вимкнено після використання або перед очищенням.

Не підходьте під використання.

Чистіть сухою тканиною, не використовуйте моторне масло, органічні розчинники та інші хімічні речовини

засоби для очищення цього продукту.

Зберігайте продукт у сухому місці, якщо він не використовується протягом тривалого часу. Тримайте подаль від середовища з високою вологістю або температурою. Рекомендується заряджати вирибу кожні шість місяців, щоб запобігти пошкодженню акумулятора

ПРОБЛЕМИ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ ВИРІШЕННЯ

Пристрій не включається

Температура значно нижча: активність батареї/пристрою знизилася і не запуститься нормально, якщо воно буде перебувати в середовищі нижче 32 градусів за Фаренгейтом протягом тривалого часу. Може здатися, що машина може нормально запуститися, але не може нормально працювати. Температура значно вища: вирибу може перегрітися, якщо воно використовується в середовищі вище 104 градусів за Фаренгейтом. Можливо, машина не зможе нормально запуститися. Недостатній заряд акумулятора: коли акумулятор знаходиться в стані низького заряду і пристрій не заряджається протягом тривалого періоду часу, акумулятор може перейти в режим захисту від низького заряду (захист від надмірного розряду). У цей час машина не буде працювати нормально.

Помістіть пристрій в середу вище 32 градусів за Фаренгейтом на 2 години або використовуйте фен, щоб швидко підвищити температуру пристрій. Помістіть пристрій в середовище при температурі нижче 104 градусів за Фаренгейтом на 2 години, потім увімніть його. У вимкненому стані підключіть пристрій до зарядки. Машина може нормально працювати після повної зарядки

Масажні головки віддалюються

Масажні головки прикріплені неправильно.

Перевірте і правильно закріпіть масажні головки

Вирибу не заряджається, і індикатор на панелі не горить.

Кабель для зарядки, порт зарядки та джерело живлення неправильно під'єднані.

Перевірте та знову під'єднайте кабель зарядки, порт зарядки та джерело живлення належним чином.

Незначні відхилення у використанні

Використовуйте його деякий час, щоб поспостерігати, чи є якісь відхилення від норми. Якщо так, будь ласка, відправте його на перевірку.

Припиняє працювати, коли масажна головка заблокована. Виріб запускає режим захисту та перемикається з режиму роботи в режим очікування.
Перезапустіть машину, натиснувши кнопку запуску.



ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Цей виріб містить батареї, тому його не можна викидати разом із побутовими сміттям. Будь ласка, отримайте рекомендації щодо переробки відповідно до місцевих екологічних норм.

ЮРИДИЧНІ ПРИМІТКИ

Весь наведений вище вміст не містить жодних заяв про лікування. Для діагностики та лікування захворювання необхідна допомога лікаря або терапевта. Найпо не обіцяє, що продукт має якийсь лікувальний ефект.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВА ПРОДУКТУ	Масажер NAIRO DEEP MUSCLE MASSAGER
МОДЕЛЬ	MG-G-2103
Вага НЕТТО	900г
РОЗМІРИ	163*63*228 мм
АККУМУЛЯТОР	2500mAh
ВХІД	27В постійного струму
Номінальна потужність	13.5Вт

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.citrus.ua/>