

VITAMMY splash

ЗВУКОВА ЗУБНА ЩІТКА

Модель TB8132A-CE

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням щітки, обов'язково ознайомтесь з інструкцією з використання.

ВСТУП

Дякуємо за вибір звукової зубної щітки VITAMMY SPLASH (TB8132A-CE).

⚠ Перед першим використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації


Дана інструкція з експлуатації містить важливу інформацію щодо безпечного використання та поради з належного застосування та догляду за придбаним виробом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Під час користування електроприладами, завжди дотримуйтеся основних правил безпеки, зокрема таких: Прочитайте всі інструкції, надані виробником.

- Переконайтесь, що напруга в мережі відповідає напрузі вказаній на пристрої.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або інших травм, не використовуйте зарядний пристрій у ванній кімнаті та не занурюйте шнур та вилку приладу у воду чи інші рідини. Не занурюйте пристрій у воду.
- Не використовуйте зарядний пристрій, якщо його шнур чи вилка пошкоджені.
- Від'єднуючи зарядний пристрій від мережі тягніть за вилку на не за шнур.
- Не занурюйте зубну щітку в гарячу воду
- Даний пристрій може використовуватися дітьми з 8 років а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду і знань, якщо їм надано контроль або інструкція щодо безпечного використання пристрою і розуміння пов'язаної з ним небезпеки.
- Діти не повинні гратися з цим пристроєм.
- Чищення та обслуговування пристрою не повинно проводитись дітьми без нагляду дорослих.
- Не тисніть зубною щіткою на зуби та/або ясна з надмірною силою.
- Не чистіть одну ділянку протягом тривалого часу, щоб не пошкодити поверхню зубів і/або ясен.
- Перед кожним використанням перевіряйте зубну щітку на наявність пошкоджень.
- Якщо ви перенесли операцію або стоматологічну процедуру, перед використанням зубної щітки необхідна консультація стоматолога.
- Під час перших використань зубної щітки, ваші ясна можуть кровоточити. Якщо це не зникає після тижня використання зубної щітки, зверніться до лікаря.
- Якщо вам встановлено кардіостимулятор або інший імплантат, перед використанням пристрою зверніться до свого лікаря або виробника імплантованого пристрою.
- Це пристрій особистої гігієни, який не призначений для використання кількома особами.
- Рекомендовано замінювати головку щітки кожні 3 місяці.
- Пристрій потрібно заряджати лише за допомогою джерела живлення 5В/0,5 А
- Акумулятор зубної щітки містить шкідливі речовини, тому зубну щітку слід утилізувати безпечним для навколишнього середовища способом. Не викидайте зубну щітку разом з побутовими відходами.

ОПИС ПРИСТРОЮ

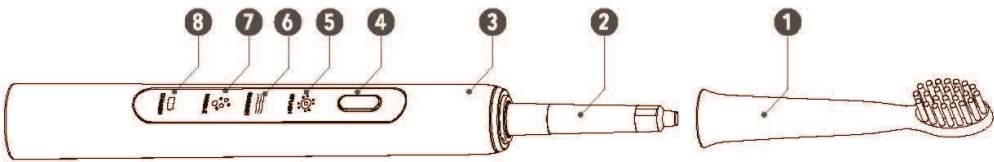


1. Головка щітки
2. Вібраційний штифт
3. Ручка
4. Кнопка Увімкн/Вимкн.
5. Режим SPLASH
6. Режим SMOOTH
7. Режим BUBBLE
8. Індикатор заряду акумулятора

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

ЗАРЯДІТЬ СВОЮ ЩІТКУ

УВАГА! Перед заряджанням вимкніть зубну щітку.

1. Переконайтесь, що зарядний пристрій відповідає вимогам: 5В, ±0,5А.
2. Підключіть зарядний кабель до зубної щітки, як показано на малюнку нижче.
3. Підключіть інший кінець кабелю (USB) до зарядного пристрою та вставте його в електричну розетку.
4. Під час заряджання індикатор зарядки буде блимати. Коли зубна щітка буде повністю заряджена, індикатор буде світитися постійним світлом.

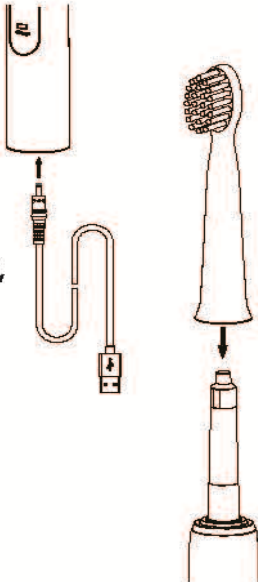

ВСТАНОВІТЬ ГОЛОВКУ ЩІТКИ

1. Прикріпіть головку щітки, на штифт, як показано на малюнку збоку

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Нанесіть зубну пасту на вимкнену зубну щітку.
2. Помістіть зубну щітку в рот і притисніть її щетиною до поверхні зубів.
3. Увімкніть зубну щітку за допомогою кнопки I/O і почніть чистити зуби.
4. Щітка буде працювати протягом 4 циклів по 30 секунд кожен, з короткою паузою між ними. Після останнього циклу щітка вимкнеться автоматично.
5. Після закінчення промийте головку щітки під проточною водою. Струсіть надлишок води з головки щітки та висухіть ручку рушником.

ЗМІНА РЕЖИМІВ РОБОТИ ЩІТКИ

Зубна щітка Vitammy Splash має 3 режими очищення:

SPLASH – щоденна доза свіжості. Бездоганно видаляє зубний наліт та всі залишки їжі. Ваші зуби стануть білішими, завдяки систематичному звуковому очищенню. Ідеальний режим для чищення зубів вранці.

SMOOTH – м'які вібрації, які очищають та заспокоюють.

BUBBLE - масажний ефект. Очищає зуби та масажує ясна.

Під час роботи зубної щітки ви можете змінювати режим роботи щітки одним натисканням кнопки. VITAMMY Splash запам'ятовує останній режим чищення зубів і почне працювати з нього під час наступного використання.

УВАГА ! В разі недостатнього заряду приладу, індикатор заряду акумулятора буде блимати червоним кольором.

VITAMMY splash

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Очистіть корпус щітки вологою тканиною
- Промийте зубну щітку під проточною водою при температурі нижче 45°C.
- ПРИМІТКА: ніколи не занурюйте всю зубну щітку у воду.
- Ніколи не використовуйте для очищення щітки миючі засоби.

⚠ **УВАГА: не використовуйте для очищення щітки корозійні хімікати, грубі абразивні матеріали або металеві губки. Ми рекомендуємо замінювати насадку щітки кожні 3 місяці.**

СИМВОЛИ ТА ЗНАКИ

Попереджувальні знаки та символи, які є в посібнику та на самому пристрої, важливі для безпечного використання придбаного обладнання.

Їх значення пояснюється в таблиці нижче:

	Прочитайте інструкцію з експлуатації		Виробник
	Постійний струм		Пристрій відповідає вимогам, зазначеним у відповідних директивах CE
	Дата виготовлення		Відповідно до директиви WEEE 2012/19/EU: відпрацьоване обладнання має бути утилізовано відповідно до чинних норм.
	Серійний номер		

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Тримач зубної щітки Vitammy Splash (TB8132A-CE).
- 1 х головка щітки
- 1х шнур живлення
- Інструкція з використання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 1,2 В

Потужність: 1 Вт

Специфікація джерела живлення: 5 В, 1 А

ГАРАНТІЯ

Пристрій	Vitammy Splash (TB8132A-CE).	
Продавець	Компанія Extreme Pride, м.Київ, Машинобудівна, 41 +38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram) service@extremepride.com.ua diagnostic@extremepride.com.ua	
Гарантія	Продавець запевняє Покупця, що прилад VITAMMY, на який поширюється ця гарантія, був розроблений і виготовлений відповідно до високих стандартів якості. Також запевняє покупця в тому, що пристрій належної якості, без дефектів матеріалів, які можуть перешкоджати його належній роботі. У разі виявлення дефектів, пошкоджень і несправностей протягом гарантійного терміну, Продавець безкоштовно відремонтує або замінить пристрій на новий у найкоротший термін, але не більше ніж за 14 днів.	
Гарантійний термін	Ця гарантія передбачає, що обладнання буде доставлено до сервісного центру за рахунок Покупця, безкоштовно відремонтовано та безкоштовно повернуто Покупцю.	
	Гарантійний термін пристрою становить 24 місяці	
Порядок дій у разі виявлення несправності	Гарантія не поширюється на частини та аксесуари, які зношуються під час нормального використання: насадка для щітки, акумулятор. Гарантія дійсна з дати покупки, підтвердженої доказом покупки, який повинен бути доданий до гарантійного талона. Ця гарантія діє на території України Щоб скористатися гарантією, протягом 14 днів з моменту виявлення дефекту зверніться на гарячу лінію для довідки та технічної підтримки для отримання допомоги та, якщо необхідно, ініціювання процедури рекаламції. У рамках процедури розгляду рекаламції, обладнання, на яке подано скаргу, слід надіслати на адресу сервісу, додавши цей гарантійний талон і доказ покупки. Для збереження чинності гарантії разом із пристроєм необхідно надати цей гарантійний талон (правильно заповнений і підписаний) і чек, що містить дату покупки та назву придбаного пристрою.	
На що не поширюється гарантія	Гарантія не передбачає будь-якої компенсації за пряму чи непряму шкоду, заподіяну особам або пристроям, коли пристрій не працював або перебував в обслуговуванні.	
	Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли через неправильну експлуатацію, використання виробу не за призначенням, на пошкодження, які виникли в зв'язку з неправильним зберіганням та обслуговуванням приладу, на несанкціоноване втручання в обслуговування, несанкціонований ремонт, модифікацію та зміну конструкції або порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику.	
	Гарантія не поширюється на поломку виробу внаслідок зміни властивостей (зниження якості) елементів, що піддаються природному зносу.	
	Гарантійний ремонт не поширюється на дії, пов'язані з обслуговуванням і очищенням пристрою, описані в Посібнику користувача.	
Печатка та підпис продавця	Дата	Підпис

УТИЛІЗАЦІЯ



Це маркування вказує, що цей виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних джерел.

Щоб отримати додаткову інформацію про пункти збору використаного обладнання, зверніться до місцевих органів влади або місцевого пункту утилізації побутових відходів.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Компанія Extreme Pride, м.Київ, Машинобудівна, 41
+38 (067) 654-32-86
(Viber, Telegram)
service@extremepride.com.ua
diagnostic@extremepride.com.ua

Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.
Південна дорога Чженхе, місто Леліу, район Шунде, місто Фошань, провінція Гуандун, Китай
Зроблено в Китаї / Made in China

