

VITAMMY®

SYMPHONY

ЗВУКОВА ЗУБНА ЩІТКА З ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ USB

Модель ТВ9071AF-CE

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням щітки, обов'язково ознайомтесь з інструкцією з використання.

ВСТУП

Дякуємо за вибір звукової зубної щітки Vitammy Symphony (ТВ9071AF-CE)

Дана інструкція з експлуатації містить важливу інформацію щодо безпечного використання та поради з належного застосування та догляду за придбаним виробом.


⚠ Перед першим використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Під час користування електроприладами, завжди дотримуйтеся основних правил безпеки, зокрема таких: Прочитайте всі інструкції, надані виробником.

- Переконайтесь, що напруга в мережі відповідає напрузі вказаній на пристрої.
- Пристрій потрібно заряджати лише за допомогою джерела живлення 5В/0,5 А
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або інших травм, не використовуйте зарядний пристрій у ванній кімнаті та не занурюйте шнур та вилку приладу у воду чи інші рідини. Не занурюйте пристрій у воду.
- Не використовуйте зарядний пристрій, USB-кабель, якщо його шнур чи вилка пошкоджені.
- Від'єднуючи зарядний пристрій від мережі тягніть за вилку на не за шнур.
- Не занурюйте зубну щітку в гарячу воду
- Даний пристрій може використовуватися дітьми з 8 років а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду і знань, якщо їм надано контроль або інструкція щодо безпечного використання пристрою і розуміння пов'язаної з ним небезпеки.
- Діти не повинні гратися з цим пристроєм.
- Чищення та обслуговування пристрою не повинно проводитись дітьми без нагляду дорослих.
- Не тисніть зубною щіткою на зуби та/або ясна з надмірною силою.
- Не чистіть одну ділянку протягом тривалого часу, щоб не пошкодити поверхню зубів і/або ясен.
- Перед кожним використанням перевіряйте зубну щітку на наявність пошкоджень.
- Якщо ви перенесли операцію або стоматологічну процедуру, перед використанням зубної щітки необхідна консультація стоматолога.
- Під час перших використань зубної щітки, ваші ясна можуть кровоточити. Якщо це не зникає після тижня використання зубної щітки, зверніться до лікаря.
- Якщо вам встановлено кардіостимулятор або інший імплантат, перед використанням пристрою зверніться до свого лікаря або виробника імплантованого пристрою.
- Зубна щітка призначена для чищення зубів, ясен і язика. Не використовуйте її для будь-яких інших цілей.
- Рекомендовано замінювати головку щітки кожні 3 місяці.
- Акумулятор зубної щітки містить шкідливі речовини, тому зубну щітку слід утилізувати безпечним для навколишнього середовища способом. Не викидайте зубну щітку разом з побутовими відходами.

ОПИС ПРИСТРОЮ

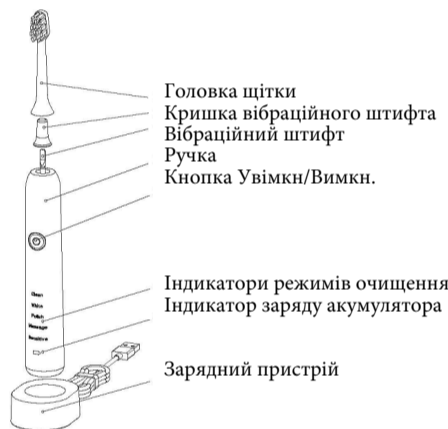

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

УВАГА! Перед заряджанням вимкніть зубну щітку.

1. Зубну щітку можна заряджати за певних умов: температура навколишнього середовища має бути 0-45 °С. Заряджання щітки за межами даного температурного діапазону може призвести до небезпеки.
2. Переконайтесь, що зарядний пристрій відповідає вимогам: 5В, ±0,5А.
3. Встановіть зарядну базу на стійку рівну поверхню.
4. Підключіть USB- кабель зарядної бази до USB - адаптера (не входить до комплекту постачання).
5. Встановіть вертикально зубну щітку на зарядну базу.
6. Під час заряджання індикатор зарядки буде блимати червоним кольором. Коли зубна щітка буде повністю заряджена, індикатор буде світитися постійним світлом.

ВСТАНОВЛЕННЯ ГОЛОВКИ ЩІТКИ

1. Зніміть кришку з вібраційного штифта.
2. Прикріпіть головку щітки, як показано на малюнку нижче



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Нанесіть зубну пасту на вимкнену зубну щітку.
- Помістіть зубну щітку в рот і притисніть її щетиною до поверхні зубів.
- Увімкніть зубну щітку за допомогою кнопки I/O і почніть чистити зуби.

- Щітка буде працювати протягом 4 циклів по 30 секунд кожен, з короткою паузою між ними. Після останнього циклу щітка вимкнеться автоматично.
- Після закінчення промийте головку щітки під проточною водою. Струсіть надлишок води з головки щітки та висушіть ручку рушником.

Примітка: Зубна щітка призначена виключно для домашнього використання.

ВИБІР ПРОГРАМ ЧИЩЕННЯ

Зубна щітка Vitammy Symphony має 5 унікальних режимів очищення

Clean (Очищення): щоденне очищення та видалення нальоту (стандартний режим)

White (Відбілювання): режим відбілювання

Polish: (Полірування): режим полірування для освітлення поверхні зубів

Massage (Масаж): Режим масажу, який поєднує в собі режим очищення з масажними рухами - стимулює ясна і покращує їх стан.

Sensitive (Чутливий режим): надзвичайно ніжний режим, рекомендований для ніжних ясен і чутливих зубів
Зубна щітка запам'ятовує вибраний режим і почне з нього наступне чищення.

УВАГА! В разі недостатнього заряду приладу, індикатор заряду акумулятора буде блимати . Завжди вчасно заряджайте свою зубну щітку.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ


- Очистіть корпус щітки вологою тканиною
- Промийте зубну щітку під проточною водою при температурі нижче 45°С.

ПРИМІТКА: ніколи не занурюйте всю зубну щітку у воду.

- Ніколи не використовуйте для очищення щітки миючі засоби.

⚠ УВАГА: не використовуйте для очищення щітки корозійні хімікати, грубі абразивні матеріали або металеві губки. Ми рекомендуємо замінювати насадку щітки кожні 3 місяці.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

 Це маркування вказує, що цей виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних джерел.

Щоб отримати додаткову інформацію про пункти збору використаного обладнання, зверніться до місцевих органів влади або місцевого пункту утилізації побутових відходів.

СИМВОЛИ ТА ЗНАКИ

Попереджувальні знаки та символи, які є в посібнику та на самому пристрої, важливі для безпечного використання придбаного обладнання.

Їх значення пояснюється в таблиці нижче:

	Прочитайте інструкцію з експлуатації		Виробник
	Постійний струм		Імпортер
	Дата виготовлення		Маркування матеріалів, призначених для контакту з їжею
	Серійний номер		Подвійна ізоляція
	Відповідно до директиви WEEE 2012/19/EU: відпрацьоване обладнання має бути утилізовано відповідно до чинних норм.		Пристрій відповідає вимогам, зазначеним у відповідних директивах CE

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Тримач зубної щітки Vitammy Symphony (TB9071AF-CE)
- 1 x головка щітки
- 1x зарядний пристрій
- Інструкція з використання

ГАРАНТІЯ

Пристрій	Vitammy Symphony (TB9071AF-CE)	
Продавець	Компанія Extreme Pride, м.Київ, Машинобудівна, 41 +38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram) service@extremepride.com.ua diagnostic@extremepride.com.ua	
Гарантія	Продавець запевняє Покупця, що прилад VITAMMY, на який поширюється ця гарантія, був розроблений і виготовлений відповідно до високих стандартів якості. Також запевняє покупця в тому, що пристрій належної якості, без дефектів матеріалів, які можуть перешкоджати його належній роботі. У разі виявлення дефектів, пошкоджень і несправностей протягом гарантійного терміну, Продавець безкоштовно відремонтує або замінить пристрій на новий у найкоротший термін, але не більше ніж за 14 днів.	
Гарантійний термін	Ця гарантія передбачає, що обладнання буде доставлено до сервісного центру за рахунок Покупця, безкоштовно відремонтовано та безкоштовно повернуто Покупцю. Гарантійний термін пристрою становить 24 місяці	
Порядок дій у разі виявлення несправності	Гарантія не поширюється на частини та аксесуари, які зношуються під час нормального використання: насадка для щітки, акумулятор. Гарантія дійсна з дати покупки, підтвердженої доказом покупки, який повинен бути доданий до гарантійного талона. Ця гарантія діє на території України Щоб скористатися гарантією, протягом 14 днів з моменту виявлення дефекту зверніться на гарячу лінію для довідки та технічної підтримки для отримання допомоги та, якщо необхідно, ініціювання процедури рекамації. У рамках процедури розгляду рекамації, обладнання, на яке подано скаргу, слід надіслати на адресу сервісу, додавши цей гарантійний талон і доказ покупки. Для збереження чинності гарантії разом із пристроєм необхідно надати цей гарантійний талон (правильно заповнений і підписаний) і чек, що містить дату покупки та назву придбаного пристрою.	
На що не поширюється гарантія	Гарантія не передбачає будь-якої компенсації за пряму чи непряму шкоду, заподіяну особам або пристроям, коли пристрій не працював або перебував в обслуговуванні. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли через неправильну експлуатацію, використання виробу не за призначенням, на пошкодження, які виникли в зв'язку з неправильним зберіганням та обслуговуванням приладу, на несанкціоноване втручання в обслуговування, несанкціонований ремонт, модифікацію та зміну конструкції або порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику. Гарантія не поширюється на поломку виробу внаслідок зміни властивостей (зниження якості) елементів, що піддаються природному зносу. Гарантійний ремонт не поширюється на дії, пов'язані з обслуговуванням і очищенням пристрою, описані в Посібнику користувача.	
Печатка та підпис продавця	Дата	Підпис

УТИЛІЗАЦІЯ



Це маркування вказує, що цей виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних джерел.

Щоб отримати додаткову інформацію про пункти збору використаного обладнання, зверніться до місцевих органів влади або місцевого пункту утилізації побутових відходів.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 Компанія Extreme Pride, м.Київ, Машинобудівна, 41
+38 (067) 654-32-86
(Viber, Telegram)
service@extremepride.com.ua
diagnostic@extremepride.com.ua

 Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.
Південна дорога Чженхе, місто Леліу, район Шунде, місто Фошань, провінція Гуандун, Китай
Зроблено в Китаї / Made in China