

ПІДТРИМКА МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

iOS 8.0 і вище / Android 4.3 і вище.

ДОГЛЯД

Використовуйте вологу тканину для очищення ваг.
Не використовуйте засоби для чищення.
Не мийте ваги під струменем води.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед використанням розумних ваг YUNMAI будь ласка переконайтеся, що ви не вагітні, не використовуєте/не використовували кардіостимулятор, електрокардіографи або інші медичні пристрої. Не розбирайте, не натискайте, не кидайте виріб, не занурюйте у воду, вогонь, не піддавайте впливу температури, вищої за 60°C (140°F).

КАЛІБРУВАННЯ ВАГІВ

Наступіть і зійдіть з ваг швидко. Шкала має показати «0.0» – це означає, що калібрування завершено.
Для повторного калібрування потрібно 5 секунд, будь ласка почекайте якийсь час перед наступним зважуванням.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва продукту: розумні ваги YUNMAI Balance

Модель: M1690

Одиниці вимірювання: кг/фунт

Тип з'єднання: Bluetooth 4.0

Розмір: 260 x 260 x 26 мм

Виконавчий стандарт: Q / HC 001 – 2016

Вага Нетто: 1.3 кг

Діапазон зважування: 3 – 180 кг

Точність: ±50г

Робоча температура: -5 °C – 40 °C

Зовнішній матеріал: екологічно чистий ABS

Тип акумулятора: батарейка AA 1.5В x 3.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування

Модель

Серійний номер

Дата продажу

Гарантійний строк

Підпис покупця

З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений

Печатка та підпис продавця

При купівлі виробу вимагайте його перевірки у Вашій присутності і заповнення гарантійного талона. Гарантійний талон є документом, що дає право на гарантійний ремонт. При втраті гарантійний талон не відновлюється.

Гарантія не поширюється на вироби з явними механічними пошкодженнями або на ті, що вийшли з ладу через недотримання правил експлуатації або зберігання виробу, а також якщо виріб був розкритий або ремонтвався особою, нами на це не уповноваженою.

Гарантія не поширюється на витратні матеріали і додаткові пристрої, що використовуються разом з виробом, зокрема фотоплівку, відеокасети, елементи живлення тощо.

Строк гарантії обчислюється від дня покупки. Під час заміни товару гарантійний строк обчислюється заново від дня передачі його покупцю.

Ця гарантія не поширюється на вироби, що використовуються у промислових та комерційних цілях.

Інформацію про розташування авторизованих сервісних центрів можна отримати на сайті офіційного дистрибутора yunmai.ua

Виробник на свій розсуд і без додаткових повідомлень може змінювати комплектацію, зовнішній вигляд, країну виробництва, строк гарантії та технічні характеристики моделі. Перевіряйте їх у момент отримання товару.

Термін служби виробу при дотриманні правил експлуатації становить 1 (один) рік з дня передачі виробу споживачеві. Термін служби встановлений відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів.

Строк зберігання не обмежений. Умови зберігання: при температурі від + 5°C до + 40°C і відносній вологості 60%. Уникати потрапляння прямих сонячних променів.

Виробник: Shenzhen YUNMAI Technology Co., Ltd Шеньжень Юнмай Текнолоджі Ко., Лтд

Адреса: Room 2201, Block B, Sunshine TDI Building, Nanshan District, Shenzhen 518000, China Послуги 2201, Блок Б, Саншайн ТДАЙ Білдинг, Наньшань Дистрикт, Шеньжень 518000, Китай




YUNMAI Balance

Керівництво з використання смарт-ваг

Будь ласка, прочитайте це керівництво перед використанням і надалі тримайте його під рукою для отримання необхідної інформації

ВИКОРИСТАННЯ РОЗУМНИХ ВАГ

Дякуємо за те, що обрали YUNMAI. Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням. Збережіть її на майбутнє.

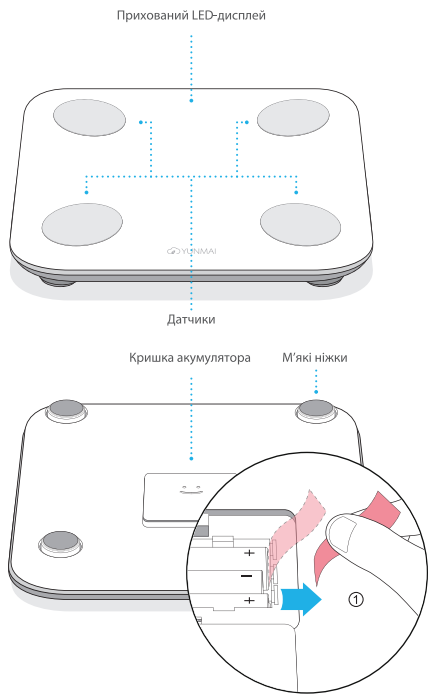

❶ Важливо! Для запуску ваг зніміть ізолюючу стрічку в батарейному відсіку.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКА

Знайдіть додаток «YUNMAI» у Google Play або App Store чи проскануйте цей QR-код для завантаження та встановлення програми. З'єднання зі смартфоном відбудеться після вмикання ваг.



Для iOS




Для Android

З'ЄДНАННЯ З ВАГАМИ ПО BLUETOOTH

Відкрийте додаток «YUNMAI» та увімкніть Bluetooth. Підключення відбудеться автоматично, а ваші дані в режимі реального часу синхронізуються з додатком.




iOS: Проведіть по екрану знизу вгору, щоб відкрити Центр Керування та натисніть на значок [Bluetooth].

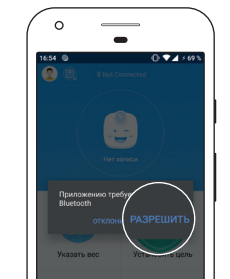

Android: Натисніть на кнопку [Дозволити], щоб активувати Bluetooth при запиті додатка YUNMAI.


ПОЧАТОК ВИКОРИСТАННЯ

Переконайтеся у правильності розташування ступень, як показано на малюнку нижче:

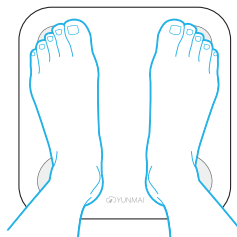


Правильне розташування

Ступні розташовуються на всіх 4-х сенсорах

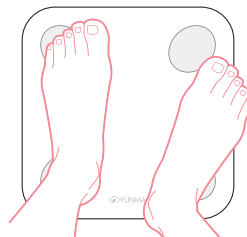


Неправильне розташування

Заступ за край може спричинити неточність у вимірах

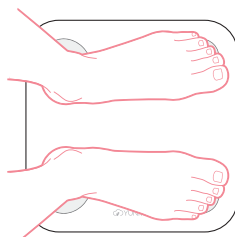

Неправильне розташування

Станьте у правильному напрямку, щоб не перекривати екран

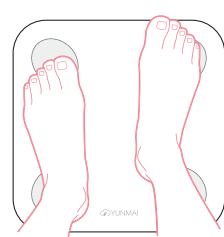

Неправильне розташування

Положення ніг не на одній лінії, що може спричинити неточності у вимірах


Примітка: для забезпечення точності вимірів зважуватися слід босоніж і у правильному положенні.

ДОДАТОК YUNMAI

Використовуючи YUNMAI Balance із додатком YUNMAI Ви зможете записувати, аналізувати і ставити цілі для свого здоров'я.

Програма зберігає усю інформацію, надає короткий звіт про стан здоров'я та рекомендації щодо його покращення.

Примітка: Дана картинка представлена лише як приклад. Для докладнішої інформації завантажте останню версію програми YUNMAI.

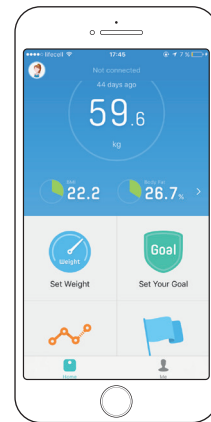

ДИСПЛЕЙ ВАГІВ



ІНДЕКС МАСИ ТІЛА (BMI)

| ІМТ/BMI (для чоловіків і жінок) | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|----------------------|
| Вік | Нестача ваги | Норма | Зайва вага | Ожиріння | Патологічне ожиріння |
| 18 - 120 | < 18.5 | 18.5 - 24.9 | 25 - 29.9 | 30 - 34.9 | ≥ 35 |

Індекс маси тіла (ІМТ) = Вага (кг) / Зріст * 2 (м)
Приклад: ІМТ = 70 кг / (1,75 * 1,75) = 22,86 (Норма)

Примітка: ІМТ – це стандарт, що широко використовується при оцінюванні стану здоров'я людини.