



Зубна щітка Electric toothbrush Ocliclean X Pro Elite

Інструкція з експлуатації

Ласкаво просимо! Дякуємо, що придбали наш товар.

Пам'ятка з безпеки

Цей виріб рекомендується використовувати з 12 років. Виріб можна використовувати тільки зі змінними насадками Ocliclean. Ми не несемо відповідальності за будь-які наслідки використання несертифікованих насадок інших виробників.

Цей виріб призначений тільки для персонального очищення і його використання в медичних цілях або декількома людьми не рекомендується.


Виріб призначений лише для використання у приміщенні. Не залишайте виріб під прямими сонячними променями протягом тривалого часу. Рекомендуємо зберігати його в сухому, добре провітрюваному місці за кімнатної температури.

Перш ніж заряджати, насухо протріть корпус виробу і регулярно очищуйте зарядний пристрій сухою ганчіркою, не допускаючи утворення плям.

З обережністю повинні використовувати виріб особи з проблемами ротової порожнини, зокрема:

- Користувачі, які нещодавно перенесли хірургічне втручання на пародонті або в даний момент проходять лікування.
 - Особи з іншими симптомами в ротовій порожнині, в тому числі користувачі з нестійкими протезами або хронічною сильною кровотечею ясен.
 - Інші особи з проблемами, пов'язаними зі здоров'ям ротової порожнини.
- Цей виріб не рекомендується використовувати зазначеним вище категоріям осіб або перед застосуванням їм слід проконсультуватися із професійним стоматологом.

- Цей виріб не призначено для людей з обмеженими фізичними можливостями, психічними розладами або для тих, хто не має достатнього досвіду і знань (в тому числі дітей віком від 0–12 років). Крім ситуацій, коли виріб використовується під наглядом опікуна або іншого законного представника.

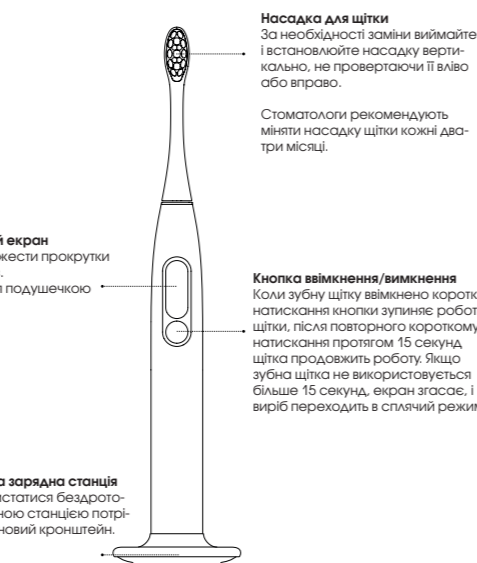

Насадка для щітки
За необхідності заміни виймайте і встановлюйте насадку вертикально, не повертаючи її вліво або вправо.

Стоматологи рекомендують міняти насадку щітки кожні два-три місяці.

Сенсорний екран
Підтримує жести прокрутки вгору і вниз. Торкайтеся подушкою пальця.

Кнопка ввімкнення/вимкнення
Коли зубну щітку ввімкнено коротке натискання кнопки зупиняє роботу щітки, після повторного короткому натискання протягом 15 секунд щітка продовжить роботу. Якщо зубна щітка не використовується більше 15 секунд, екран згасає, і виріб переходить в сплячий режим.

Бездротова зарядна станція
Щоб скористатися бездротою зарядною станцією потрібен силіконовий кронштейн.

Перше використання: торкніться кнопки ввімкнення/вимкнення, щоб ввімкнути зубну щітку і активувати модуль Bluetooth. Після цього зубна щітка перейде в режим очікування, а Bluetooth продовжить працювати в постійному режимі.

Програма чищення зубів: без попереднього налаштування зубна щітка працює протягом 2 хвилин, за замовчуванням виконуючи стандартну програму щоденного чищення, тобто виріб буде оповіщати користувача про необхідність зміни зони очищення, змінюючи характер вібрації кожні 30 секунд, і автоматично припинить роботу через 2 хвилини.

Заряджання зубної щітки: перш ніж заряджати, насухо витріть корпус, а потім вставте щітку в бездротову зарядну станцію. Стан заряджання можна визначити за допомогою індикатора на бездротовій станції, а рівень заряду акумулятора у відсотках відображається на дисплеї електричної зубної щітки Ocliclean. Не залишайте зубну щітку на бездротовій зарядній станції надовго і разі неодноразового заряджання. Коли зубна щітка повністю зарядиться, зніміть її з бездротової зарядної станції. Заряджайте щітку, коли вона сигналізує про низький заряд акумулятора.

Встановлення додатку: відскануйте QR-код і скачайте додаток Ocliclean, в цьому додатку знайдіть свою зубну щітку і підключіть її. Примітка. Підключити зубну щітку в налаштуваннях системи в розділі «Налаштування Bluetooth» не вдасться.

Бездротова зарядна станція: під час заряджання зубна щітка повинна розташовуватися горизонтально, не кладіть на неї інші металеві предмети. Під час заряджання встановіть на станцію спеціальну захисну муфту, а потім вставте зубну щітку в гніздо бездротової зарядної станції.

Настінне кріплення: для зручного розміщення в комплект зубної щітки входить настінне кріплення.

Примітка



Монтаж нижньої частини настінного кріплення
У разі використання настінного кріплення зубну щітку слід вставляти насадкою вгору.

Інструкція із застосування

Перше ввімкнення виробу

Під час першого використання зубної щітки злегка натисніть кнопку On (Вімк.), зубна щітка ввімкнеться, при цьому модуль Bluetooth буде також функціонувати в постійному режимі. Можна завантажити і встановити додаток Ocliclean, а потім підключити і налаштувати зубну щітку в ньому. Щоб встановити додаток і налаштувати зубну щітку, відскануйте QR-код, щоб завершити встановлення додатку, в якому можна налаштувати різні функції зубної щітки, наприклад: ввімкнення/вимкнення сповіщення про зміну зони чищення через 30 секунд, функцію захисту зубів з автоматичним зниженням частоти (Automatic Frequency Reduction Tooth Guard) тощо. Крім того, можна індивідуально налаштувати програму чищення зубів і ввести її безпосередньо в зубну щітку.

Використання сенсорного екрану для налаштування зубної щітки
Налаштувати зубну щітку також можна за допомогою сенсорного екрану, не підключаючись до додатка.

Доступно чотири режими: чищення, масаж, відбілювання і режим для чутливих зубів, а також можна обрати тривалість та інтенсивність. Після отримання заданої в додатку програми чищення зубів, якщо така передбачена режимом, інтенсивність або тривалість налаштується за допомогою сенсорного екрану, у цьому разі зубна щітка вже не виконує попередні програми чищення, отримані із додатку.

Таймер і сповіщення про необхідність зміни зони чищення
За замовчуванням тривалість програми чищення зубів становить 2 хвилини, а кожні 30 секунд короткочасно змінюється характер вібрації, сигналізуючи про необхідність зміни зони чищення.

Звіт про чищення зубів

Після завершення процедури виріб відобразитиме час, оцінку за чищення та підказки щодо чищення пропущених місць для цього сеансу.

Налаштування режиму чищення

Проводячи по дисплею пальцем вгору-вниз або вправо-вліво, оберіть потрібний параметр, наприклад: «режим чищення» (Brushing Mode). Зубна щітка автоматично внесе в пам'ять зміни після завершення налаштування, і наступні операції будуть проводитися згідно із новими параметрами.

Налаштування інтенсивності: проведіть пальцем по екрану вгору або вниз, щоб збільшити або, відповідно, зменшити рівень на 1 одиницю; якщо провести пальцем вгору або вниз по краю екрану, інтенсивність буде змінюватися з кроком 5 одиниць.



Проведіть пальцем вгору і вниз



Для підтвердження налаштувань натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення



Регулювання часу:

Після підключення до додатка і синхронізації даних із сполученою зубною щіткою, час, що відображається на ній, автоматично оновлюється згідно з місцевим часом.



• Значок нового повідомлення
Значок нового повідомлення відображається на дисплеї, коли на виріб надходить повідомлення про нові дії, повідомлення про оновлення програмного забезпечення або інші сповіщення.

• Перегляд даних про чищення в додатку
Для отримання даних про чищення необхідно встановити зв'язок між зубною щіткою та іншим пристроєм і підключити її до додатка. Оскільки зубна щітка має обмежений обсяг пам'яті для зберігання даних, дані про чищення зазвичай зберігаються не більше 7 днів.



• Сповіщення про низький рівень заряду акумулятора
Коли рівень заряду нижче 20%, на дисплеї зубної щітки періодично відображається сповіщення про те, що акумулятор розряджений і незабаром знадобиться заряджання. У разі сильного розрядження акумулятора (менше 1%) зубна щітка вимкнеться, її двигун почне вібрувати, нагадуючи про необхідність заміни, екран також не вмикатиметься.

Заряджання

Розташуйте спеціальну бездротову зарядну станцію на рівній поверхні і вставте в неї штекер. Коли почне надходити живлення, індикатор на станції заблимає.

Попередньо встановивши силіконову захисну муфту на поверхню бездротової зарядної станції, вставте руків'я зубної щітки в гніздо зарядної станції. Якщо виріб заряджається, індикатор буде світитися. Якщо у бездротовий зарядний пристрій потрапив сторонній предмет або якщо виріб не заряджається як слід, індикатор почне швидко блимати. Якщо зубна щітка заряджається правильно, індикатор почергово загоряється і згасає, і зазвичай приблизно за 3,5 години акумулятор заряджається повністю.

Важлива інформація про заряджання

Цей виріб використовує механізм бездротового заряджання, тому рекомендується, щоб він знаходився в зарядному пристрої лише у разі необхідності. Не забувайте виймати зубну щітку із зарядної станції після закінчення заряджання. Якщо надовго залишити зубну щітку в увімкненій бездротовій зарядній станції, це може призвести до передчасного зниження ресурсу вбудованого акумулятора і, як наслідок, якості роботи виробу.

Рекомендований спосіб чищення зубів



Повільно переміщайте зубну щітку, підтримуючи кут 45° до лінії ясен. Під час виконання цієї процедури немає необхідності вручну водити щіткою вгору-вниз



Аккуратно тримаючи руків'я зубної щітки, повільно водіть нею круговими рухами без надмірного тиску



Після чищення прополощіть рот чистою водою.

Очищення та догляд



Очищення корпусу і насадки зубної щітки
Промийте щітку під краном і просушіть на повітрі, не витягайте щетинки з насадки



Основні параметри

Назва виробу	Зубна щітка
Oclean Smart Sonic	Oclean X
Модель	Y2087
Версія	Pro Elite
Потужність випромінювання	0 дБм
Ступінь захисту	IPX7
Потужність на корпусі зубної щітки	1,5 Вт
Заряджання	зарядна станція Oclean із інтерфейсом USB
Вхідна напруга	5 В--- 0,3 А
Час роботи*	20 днів (на 32-у рівні інтенсивності), 40 днів (на 1-у рівні інтенсивності)
Ємність акумулятору	800 мА·г
Тривалість заряджання	3,5 години
Еталонні стандарти	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008
Версія Bluetooth	Bluetooth 5,0 і вище

Bluetooth 2400-2483MHz, максимальна потужність випромінювання < 10 мВт

*В залежності від режиму чищення, розраховано за умови чищення зубів протягом 2 хвилин 2 рази на день.



- ЗАБОРОНЕНО розбирати, бити, здавлювати або кидати виріб в вогонь.
- НЕ використовуйте зубну щітку, якщо її акумулятор роздувся або збільшився в об'ємі.
- НЕ піддавайте акумулятор дії високої температури.
- НЕ використовуйте акумулятор, якщо він піддавався впливу вологи.
- НЕ кладіть на зарядну станцію металеві предмети, окрім самої зубної щітки.
- Перед тим, як викинути виріб, з нього необхідно виняти акумуляторну батарею.
- Перш, ніж виняти акумуляторну батарею, вимкніть виріб.
- Акумуляторну батарею слід утилізувати безпечним способом.



Oclean



APP

Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентилязоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага!

Пристрої, які оснащені літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.



Гарантійний талон

Дата продажу: _____

Найменування виробу: _____

IMEI/SN: _____

Підпис продавця/М.П.: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіватора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — Зроки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобі-

гання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплатчених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 1.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
 - будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організація не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямиий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації

або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, реміні, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібно оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
- 4.2 Ушкодження, спричинені недбалістю, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
- 4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником.
- 4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
- 4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
- 4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Увага! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>