




Інструкція з експлуатації

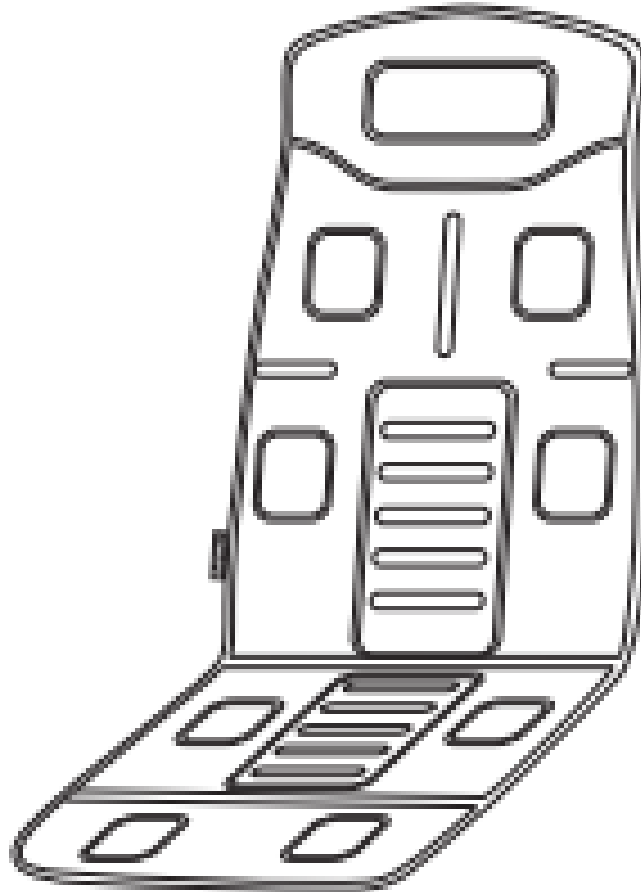

Масажер (накидка)

Модель: MGC-168



Вступ

Дякуємо вам за те, що придбали Портативну подушку для сидіння з вібромасажем та підігрівом компанії Naipo! Будь-ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією з експлуатації і зберігайте її у безпечному місці для повторного перегляду у майбутньому.

Комплектація виробу

1 × масажна накидка

1 × інструкція з експлуатації

Технічні параметри

Модель:	MGC-168
Назва	Масажер (накидка)
Торгівельна назва	Naipo Portable Seat Cushion with Vibration and Heat
Вхідне живлення	12 В = 2 А
Споживана потужність	24 Вт
Стандартний час роботи	30 хв
Розміри виробу	43×33×13 см
Вага	1,2 кг

Важливі вказівки щодо техніки безпеки

Особи з імплантованими кардіостимуляторами або будь-якими іншими медичними пристроями не повинні використовувати даний вирів. Якщо у вас є проблемі зі здоров'ям або будь-який з наведених нижче станів, перед використанням виробу обов'язково зверніться до свого лікаря за консультацією:

1. Пацієнти з лихоманкою
2. Пацієнти з онкологічними захворюваннями
3. Пацієнти з імплантатами хрящів
4. Пацієнти з гострими захворюваннями
5. Пацієнти із серцевими захворюваннями
6. Пацієнти з порушеннями функцій хребта
7. Пацієнти з штучними протезами
8. Особи у незадовільному фізичному стані
9. Особи, які почувуються зле або які відчувають нудоту

Щоб упевнитись в тому, що ви зможете використовувати даний пристрій належним і коректним чином, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією перед початком використання пристрою.

Застереження

1. Не використовуйте даний пристрій більше 30 хвилин за один раз
2. Не використовуйте пристрій на ділянках тіла, що болять
3. Не допускається використання даного пристрою дітьми віком до 12 років та вагітними жінками
4. Якщо пристрій не використовується, відключіть його від мережі живлення
5. Не допускається класти масажний пристрій, регулятор, адаптер живлення або будь-які інші компоненти пристрою у воду або близько до води
6. Не рекомендується зберігати пристрій під прямими сонячними променями або поблизу джерел тепла, таких як пічка або камін
7. Не рекомендується використовувати пристрій у пильних, задимлених або іншим чином забруднених умовах

Питання та відповіді

Проблема	Причина	Рішення
Пристрій не працює	Неправильно підключений адаптер живлення Ви забули натиснути кнопку увімкнення	Перевірити підключення і, у разі некоректного підключення, підключити адаптер правильно. Натисніть кнопку увімкнення пристрою
Ефект підігріву неочевидний	Ви забули натиснути кнопку увімкнення режиму підігріву Для розігріву повинен пройти певний час	Натисніть кнопку увімкнення режиму підігріву Зачекайте 10 хвилин, поки пристрій не прогріється
Занадто слабка або висока інтенсивність масажу	Інтенсивність масажування може здаватись занадто високою, якщо ви сильно сперлись на масажер або якщо ви використовуєте його понад 45 хвилин Інтенсивність масажування може здаватись занадто слабкою, якщо ви одягнені у товстий одяг або якщо ви неправильно сидите	Відрегулюйте інтенсивність масажування за допомогою регулятора. Вам необхідно знайти правильну і найзручнішу позу для сидіння або зняти товсті предмети одягу.

Схематичний вигляд пристрою

1. Зона для вібраційного масажування спини
2. Зона для вібраційного масажування попереку
3. Зона для вібраційного масажування тазової ділянки
4. Зона для вібраційного масажування стегон
5. Зона підігріву попереку
6. Зона підігріву тазової ділянки
7. Дистанційний регулятор

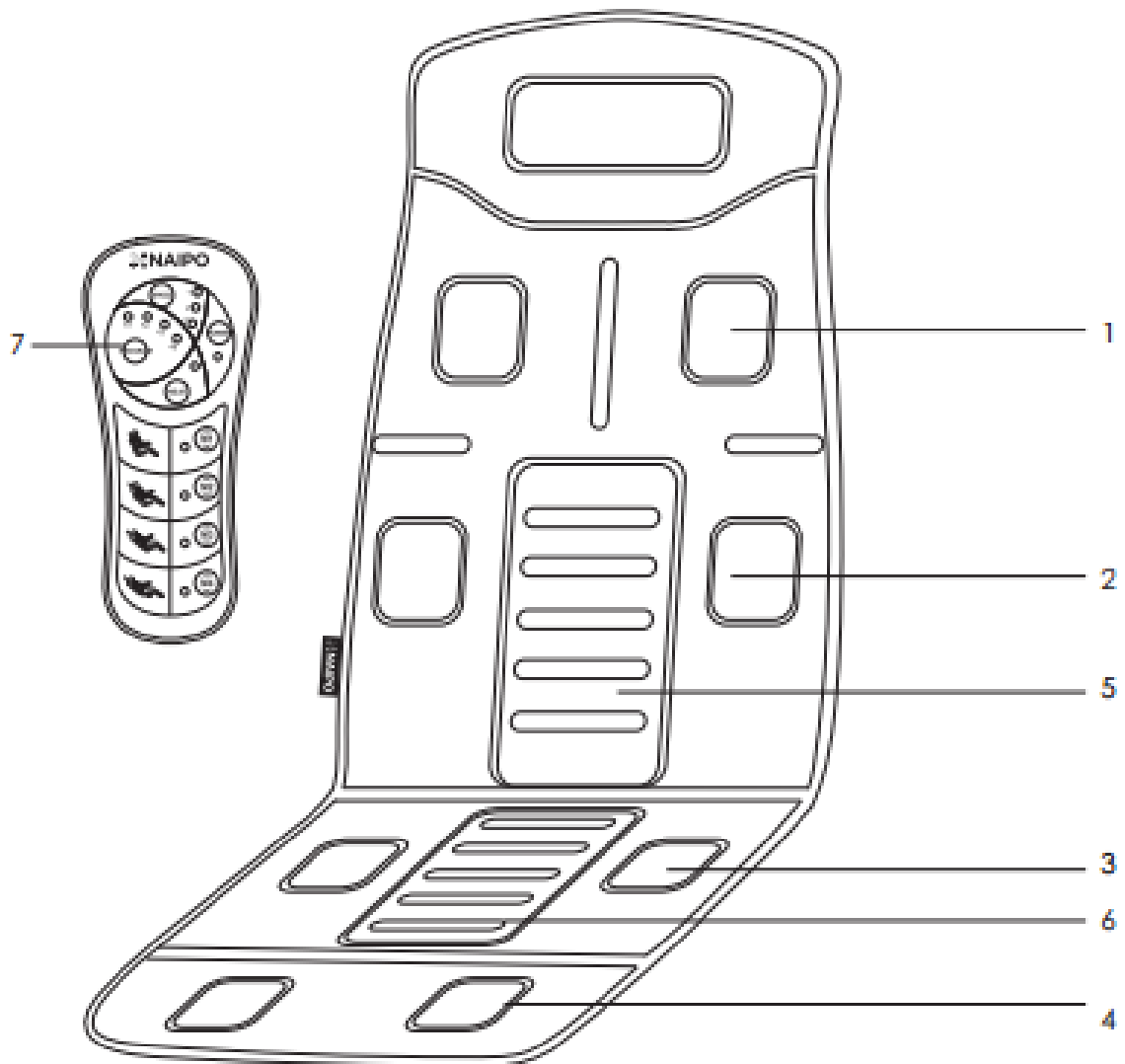


Схема розташування органів контролю на регуляторі



1. Кнопка увімкнення/вимкнення

Ця кнопка використовується для увімкнення або вимкнення пристрою. Для увімкнення пристрою натисніть на кнопку один раз, і пристрій увімкнеться у режимі за вмовчуванням, з якого можна перемикатись між режимами 1, 2, 3 та 4. Для вимкнення пристрою необхідно натиснути на цю кнопку ще раз.

2. Режим

Всього пристрій може працювати на одній з 4 доступних програм:

- (1) Режим імпульсного циркуляційного масажу (2) Режим масажу постукуванням
- (3) Режим перкусійного масажу
- (4) Режим хвилеподібного масажу

Натисніть на цю кнопку 1 раз для активації режиму 1, повторне натискання на кнопку активує режим 2 і так далі – 3, 4. При перемиканні у певний режим буде світитись відповідний індикатор.

3. Швидкість

Ця кнопка використовується для зміни швидкості масажування. За вмовчуванням обраний 2й рівень швидкості. Натисканням на цю кнопку можна перемикатись між режимами 1, 3 та 2, при цьому буде світитись відповідний індикатор.

4. Підігрів

Ця кнопка активує режим підігріву. Натисніть її 1 раз для активації режиму підігріву; повторне натискання на цю кнопку вимкне режим підігріву.

5. **М1: верхня частина спини/плечі**
- М2: нижня частина спини/поперек**
- М3: тазова ділянка тіла**
- М4: стегна**

Порядок використання пристрою

Режим: На пристрої доступні 4 програми роботи, кожна з яких відповідає за різний вид масажу. Ви можете обрати будь-який з 3 рівнів швидкості для індивідуальних потреб.

Програма 1: пристрій проводить циклічний масаж усіх 4 зон у наступному порядку – М1, М2, М3 та М4, при цьому швидкість зростає поступово, переходячи на рівень вище у кожному режимі. Процес почнеться заново після 4 рівня.

Програма 2: пристрій проводить циклічний масаж усіх 4 зон у наступному порядку – М1, М2, М3 та М4.

Програма 3: пристрій проводить циклічний масаж усіх 4 зон у наступному порядку – М1, М2, М3 та М4, при цьому буде чергування режимів, наприклад: М1 та М2, М2 та М3, М3 та М4, М4 та М1 під час використання.

Програма 4: пристрій буде проводити масаж усіх 4 зон одночасно і зменшувати інтенсивність поступово. Після цього програма повільно повертатиметься до попередньої інтенсивності масажування.

Технічне обслуговування

- Очистіть пристрій ледь вологим рушником з невеликою кількістю води, а потім протріть його сухим рушником невеликою кількістю води, а потім протріть його сухим рушником.
- Не мочіть та не занурюйте у воду.
- Будь ласка, помістіть пристрій у коробку, якщо він не використовується протягом тривалого часу. Не розбирайте пристрій.
- Якщо ви сподіваєтесь, що нова батарея матиме чудову продуктивність протягом короткого періоду часу, будь ласка, зарядіть її до 100% і використовуйте до 0% три чи більше разів.
- Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, заряджайте його раз на місяць.
- Забороняється розбирати пристрій без дозволу.
- Штучне пошкодження не покривається гарантією.

Умови транспортування та зберігання

Умови навколишнього середовища для роботи продукту:

- Температура навколишнього середовища: +5°C ~ +40°C
- Відносна вологість: <90%
- Атмосферний тиск: 70 кПа ~ 106 кПа

Утилізація і переробка



Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів.

Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Юридичні примітки

Весь наведений вище вміст не містить жодних заяв про лікування. Для діагностики та лікування захворювання необхідна допомога лікаря або терапевта. Naipo не обіцяє, що продукт має якийсь лікувальний ефект.

Гарантія та підтримка клієнтів

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №_____

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням. Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПШ	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1.				
2.				
3.				

Виробник: "Аукі Інтернешенел Лтд", № 102, будинок Р09, південне місто Китаю, місто Пінху, район Лунган, Шеньчжень, Гуандун, КНР

Імпортер вказаний на упаковці.